


Anheben der Sitzfläche:

Den Sitz anheben, bis die Beckenstütze einrastet.

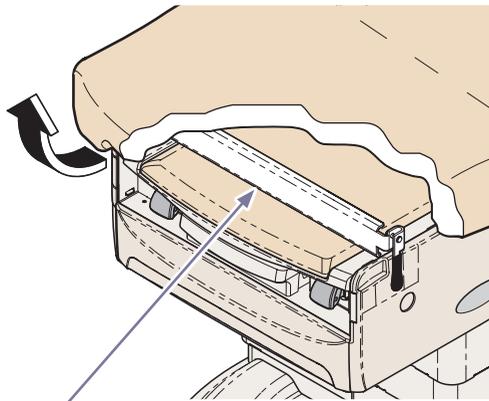


Beckenstütze

MA10307i

Zurückstellen der Sitzfläche in die horizontale Position:

- A) Die Sitzfläche leicht anheben.
- B) Den Griff der Beckenstütze nach oben drehen.
- C) Die Sitzfläche absenken.

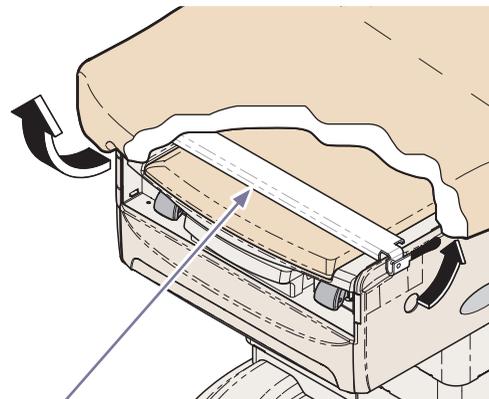

Beckenstütze

MA10308i

Kontaktinformationen

Serviceanfragen

Im Wartungs- oder Reparaturfall setzen Sie sich bitte mit Ihrem Midmark-Vertragshändler in Verbindung.
Im Wartungs- oder Reparaturfall setzen Sie sich bitte direkt mit Midmark in Verbindung
US 844.856.1230 / Kanada 937.526.8585
Montag-Donnerstag 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr (ET)

English: Refer to midmark.com
Deutsch: Siehe midmark.com
Français : Référez-vous à midmark.com
Español: Refiera a midmark.com
Dansk: Se midmark.com
Suomi: Katso midmark.com
Italiano: fare riferimento a midmark.com
Svenska: Se midmark.com
Norsk: Se midmark.com
Nederlands: Zie midmark.com
Polski: Patrz midmark.com
Türkçe: midmark.com 'a bakın

Wartung

Folgendes ist regelmäßig zu kontrollieren:

- Netzkabel dürfen keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Fußbedienungskabel dürfen keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Alle Befestigungsteile müssen angebracht und gesichert sein.
- Alle mechanischen Funktionen müssen ordnungsgemäß arbeiten.

Reinigung

Polsterung

Die Polsterung wöchentlich mit einer Mischung aus milder Flüssigseife und Wasser waschen, mit klarem Wasser abspülen und komplett trocknen lassen, um Rückstände vom Desinfektionsreiniger zu entfernen.

Die Polsterung mit einer Standard-Bleichlösung und Wasser in einer Mischung von 1:10 (10 %) oder mit einem Reinigungsmittel auf Chlorbasis desinfizieren (siehe aktuellen Leitfaden der CDC für Desinfektion & Sterilisation in medizinischen Einrichtungen). Danach das Material mit klarem Wasser abspülen und gründlich trocknen lassen.

Um Schäden durch Rückstände von Desinfektions-/Reinigungsmitteln so gering wie möglich zu halten, darauf achten, dass sich Desinfektionsmittel nicht auf der Polsteroberfläche ansammeln. Sobald die genehmigte Kontaktzeit erreicht ist, übermäßige Flüssigkeitsreste auf der Oberfläche entfernen und trocknen.

Ausführliche Pflege- und Wartungsanweisungen liegen Ihrem Produkt bei. Diese Informationen sind auch auf midmark.com in der Technischen Bibliothek unter der Rubrik Benutzerinformationen Ihres Produkts verfügbar.

Lackierte Metallflächen und Kunststoffflächen

Lackierte Metallflächen und Kunststoffflächen wöchentlich mit einem sauberen, weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Bei Verwendung eines Desinfektionsmittels auf Chlorbasis kann die Handbedienung beschädigt werden.

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 USA
1.800.643.6275
+1.937.526.3662
midmark.com



**Kurzanleitung
627 (-011)**

Barrier-Free® Untersuchungsstuhl

Modellnummer:
Seriennummer:


Händlerinformationen:

Kaufdatum:

Polsterfarbe:

003-10032-01 Rev AA5 (12/9/22)

Diese Anleitung beschreibt den grundlegenden Betrieb des Stuhls. Die im Lieferumfang enthaltene Bedienungsanleitung enthält zusätzliche Anweisungen für Betrieb und Pflege sowie Informationen zu den regulatorischen Anforderungen. Setzen Sie sich im Wartungs- oder Reparaturfall bitte mit Ihrem Midmark®-Vertragshändler in Verbindung.

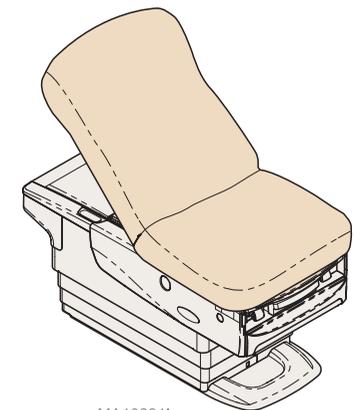


MA10291i

Hinweis

Der Stuhl stoppt automatisch, wenn die maximale bzw. minimale Höhe erreicht ist.


Stuhl AUF oder AB bewegen:

Die entsprechende Taste drücken und gedrückt halten, bis die gewünschte Position erreicht ist.

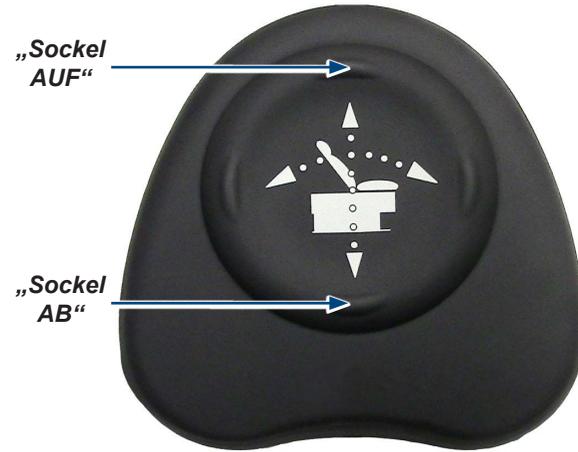

Max.
94 ± 1,3 cm (37 ± 0,5 in.)

Min.
46 ± 1,3 cm (18 ± 0,5 in.)

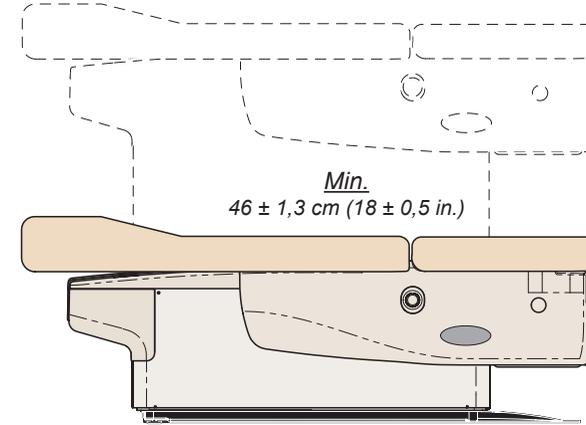


Hinweis


Die Rückenlehne hält bei Erreichen der maximalen und minimalen Höhe automatisch an.

Positionieren der Rückenlehne:

Die entsprechende Taste drücken und gedrückt halten, bis die gewünschte Position erreicht ist.

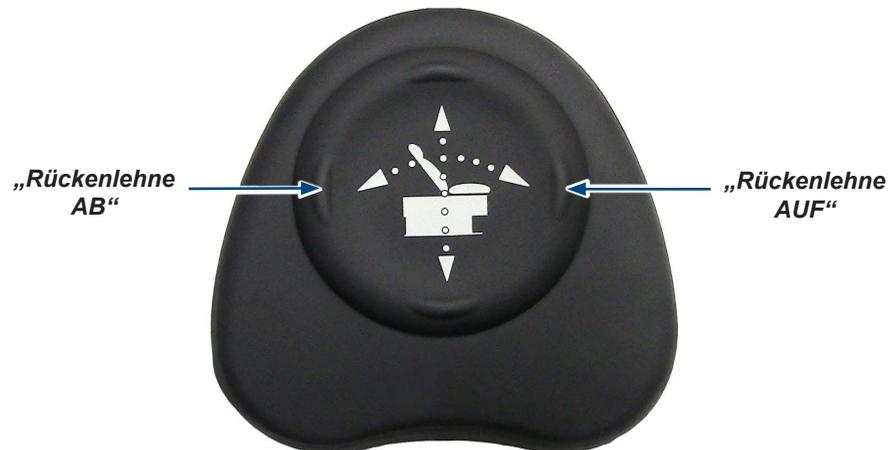

0° (horizontal)
bis
+80° ± 5°

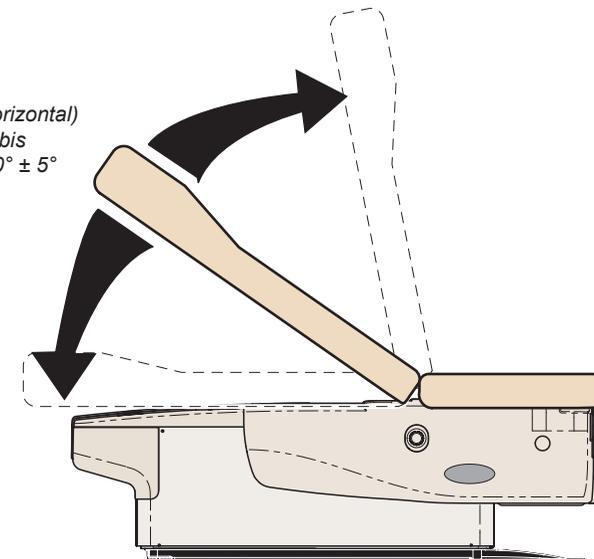

MA10293i