

Informacje kontaktowe

Wzywanie serwisu

W razie konieczności serwisowania skontaktować się ze sprzedawcą firmy Midmark.
Jeśli wymagany jest serwis, skontaktuj się bezpośrednio z firmą Midmark:
USA 844.856.1230 / Kanada 937.526.8585 Od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 18:00 Piątek od 8:00 do 17:00 (ET)

English: Refer to midmark.com
Deutsch: Siehe midmark.com
Français : Référez-vous à midmark.com
Español: Refiera a midmark.com
Dansk: Se midmark.com
Suomi: Katso midmark.com
Italiano: fare riferimento a midmark.com
Svenska: Se midmark.com
Norsk: Se midmark.com
Nederlands: Zie midmark.com
Polski: Patrz midmark.com
Türkçe: midmark.com 'a bakın

Konserwacja

Okresowo sprawdzać następujące elementy:

- Kabel zasilający nie może mieć żadnych widocznych uszkodzeń.
- Kabel sterownika nożnego nie może mieć żadnych widocznych uszkodzeń.
- Wszystkie mocowania muszą być założone i zaciśnięte.
- Wszystkie funkcje mechaniczne powinny działać.

Czyszczenie

Tapicerka

Myć tapicerkę raz w tygodniu mieszaniną łagodnego mydła w płynie i wody, spłukać czystą wodą i całkowicie wysuszyć, aby usunąć nagromadzony środek dezynfekcyjny. Dezynfekować tapicerkę roztworem standardowego wybielacza wymieszanego z wodą w stosunku 1:10 (10%) lub środkami czyszczącymi na bazie chloru (sprawdzić najnowsze wytyczne CDC dotyczące dezynfekcji i sterylizacji w placówkach opieki zdrowotnej). Następnie spłukać czystą wodą i dokładnie wysuszyć materiał.

Aby zminimalizować uszkodzenia spowodowane przez nagromadzone pozostałości środka dezynfekcyjnego, nie dopuszczać do zbierania się takich środków na powierzchni tapicerki. Po odczekaniu zatwierdzonego czasu kontaktu usunąć i wysuszyć nadmiar płynu pozostający na powierzchni.

Wraz z produktem dostarczane są szczegółowe instrukcje dbania o sprzęt i konserwacji. Te informacje są też dostępne na stronie midmark.com w sekcji Technical library (Biblioteka techniczna) w zakładce User Information (Informacje dla użytkownika) dla danego produktu.

Malowane powierzchnie metalowe / z tworzyw sztucznych

Malowane powierzchnie metalowe / z tworzyw sztucznych czyścić raz w tygodniu czystą, miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym. Środki dezynfekcyjne na bazie chloru mogą spowodować uszkodzenia sterownika ręcznego.

Ritter®

**Krótki przewodnik
224 (-011)**

Fotel diagnostyczny Barrier-Free®

Numer modelu:
Numer seryjny:

Informacje
o sprzedawcy:


Data zakupu:

Kolor tapicerki:

003-10137-18 ver. AA5 (5/24/23)

Niniejszy przewodnik opisuje podstawy obsługi fotela. Załączona instrukcja użytkownika zawiera dodatkowe wskazówki dotyczące obsługi i utrzymania urządzenia oraz informacje o zgodności z przepisami. W razie konieczności serwisowania skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Midmark.

Aby unieść sekcję siedziska...
podnosić siedzisko, aż podpora miednicy opadnie, ustawiając się we właściwej pozycji.

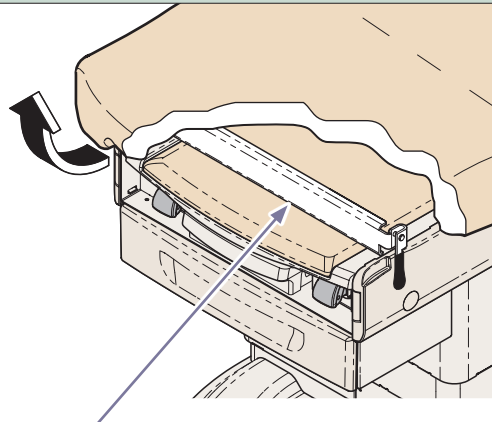


Podpora miednicy

MA10514i

Aby przywrócić płaską pozycję sekcji siedziska...


- Lekko unieść sekcję siedziska.
- Odchylić uchwyt podpory miednicy w górę.
- Opuścić sekcję siedziska.

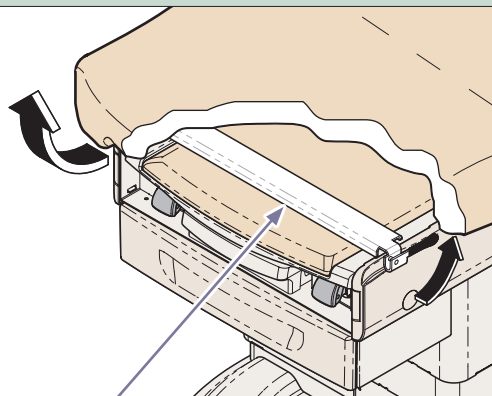

Podpora miednicy

MA10515i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 Stany Zjednoczone
1.800.643.6275
1.937.526.3662
midmark.com

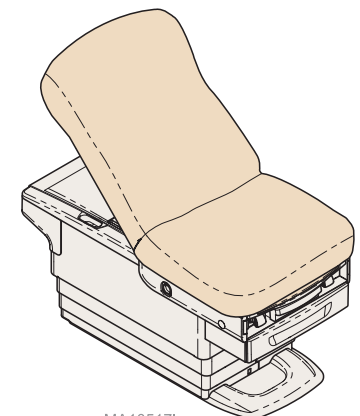


MA10517i

Uwaga

Fotel automatycznie zatrzymuje się na maksymalnej i minimalnej wysokości.

Aby przemieszczać fotel w górę lub w dół...
nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk.

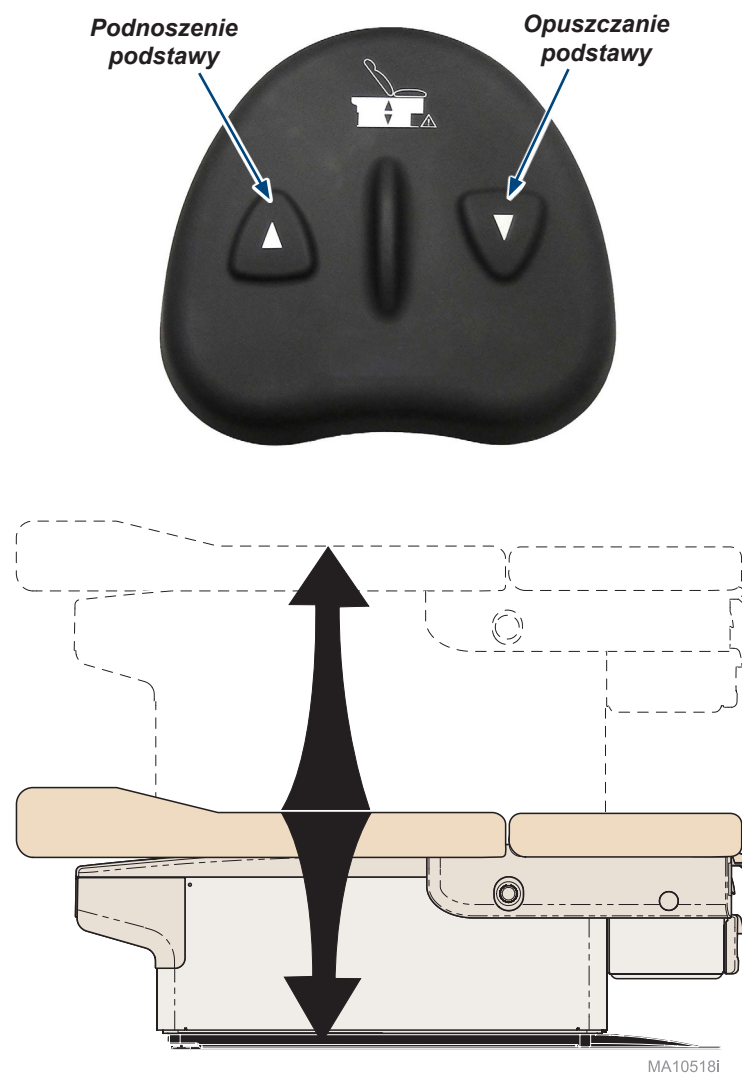**Aby ustawić sekcję oparcia 224...**

- A) Przytrzymując sekcję oparcia, ścisnąć uchwyt zwalniania oparcia (po obu stronach).
- B) Przesunąć sekcję oparcia.
- C) Zwolnić uchwyt, aby zablokować pozycję sekcji oparcia.

