



Supply Assistant Rear Storage Unit [9A638001]

Applies to Models:
224 (-001 /-002 /-003 /-011)
225 (-002 /-003)
627 (-011)


Special Tools:
none

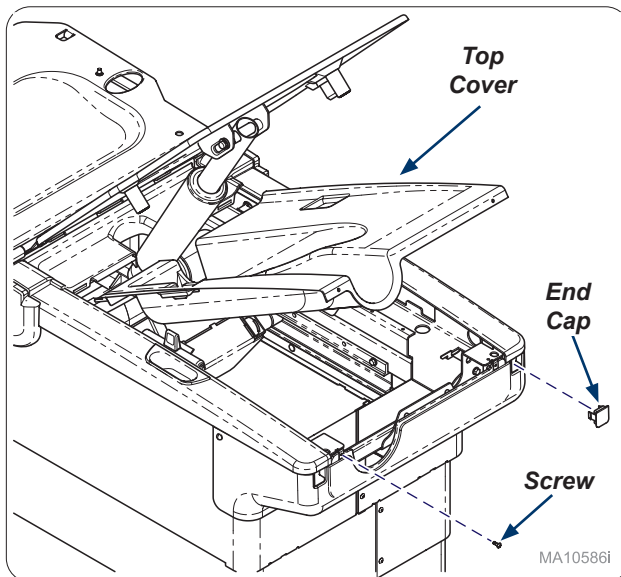

Step 1:
Remove two screws and Top Cover.
Depress tabs and remove End Caps.

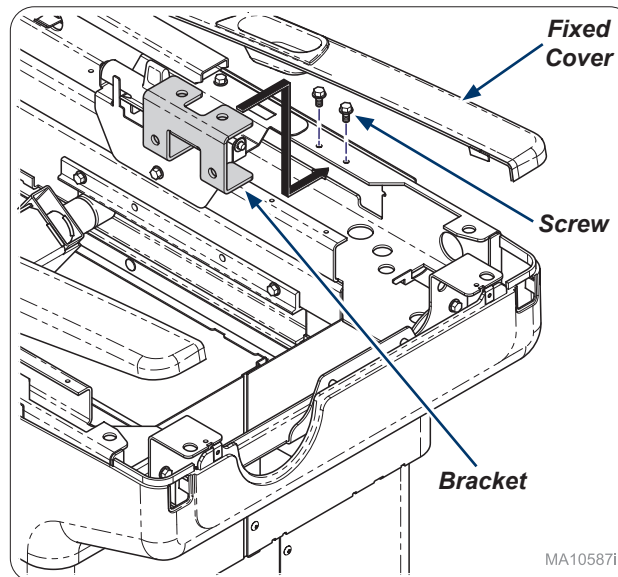

Step 2:
Lift up on Fixed Cover. Align bracket with mounting holes
and secure with two screws. Repeat for other side.

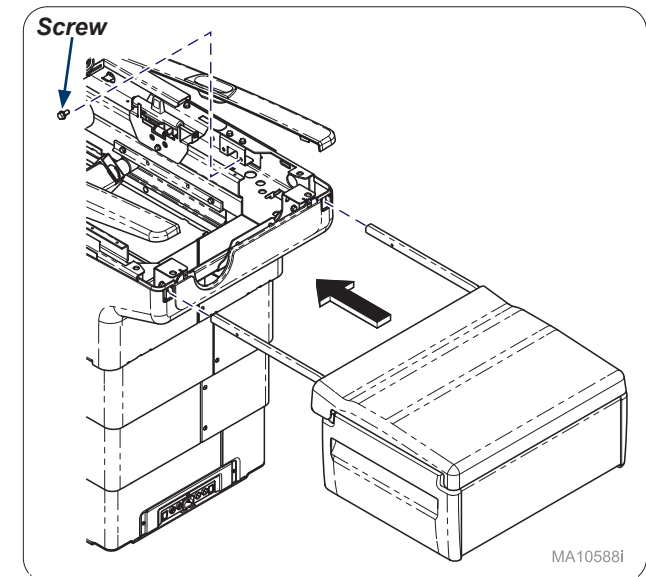

Step 3:
Insert Rear Storage Assembly into upperwrap and secure
with one screw in each rail.

Hintere Aufbewahrungseinheit für Untersuchungsbedarf [9A638001]

Gültig für die Modelle:


224 (-001 /-002 /-003 /-011)

225 (-002 /-003)

627 (-011)


Sonderwerkzeuge:

keine

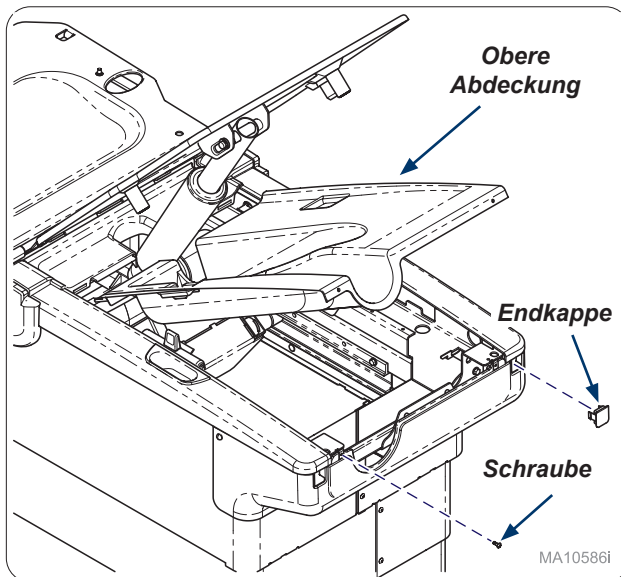


Schritt 1:

Zwei Schrauben und die obere Abdeckung entfernen.
Lasche drücken und Endkappe entfernen.

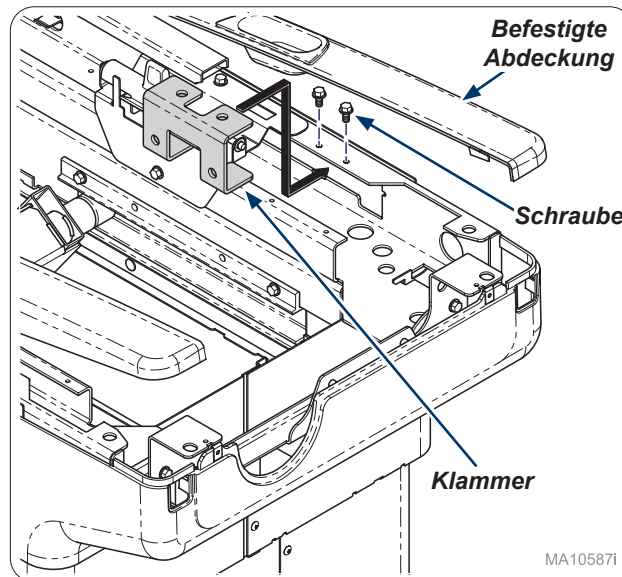

Schritt 2:

Befestigte Abdeckung hochheben. Öffnungen der Klammer
über die Montagebohrungen legen und mit zwei Schrauben
befestigen. Auf der anderen Seite wiederholen.

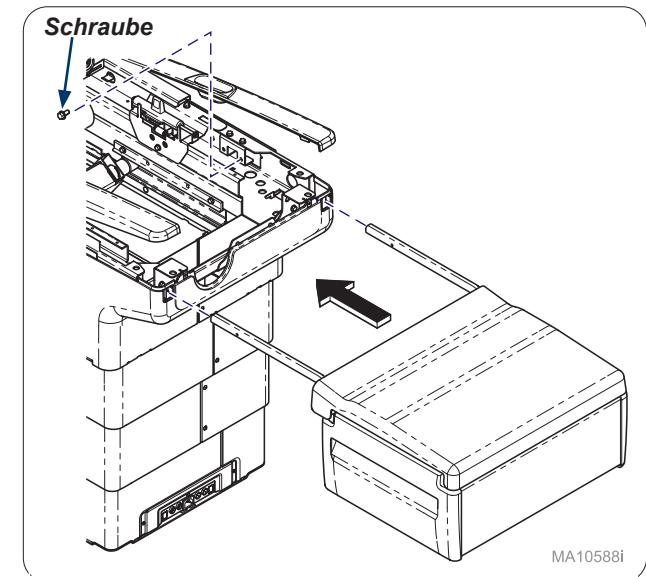

Schritt 3:

Die hintere Aufbewahrungseinheit in die obere Halterung
einsetzen und mit jeweils einer Schraube pro Schiene
befestigen.


Fournir une unité de stockage arrière pour assistant [9A638001]

Modèles concernés :

224 (-001 /-002 /-003 /-011)
225 (-002 /-003)
627 (-011)


Outils spéciaux :

aucun

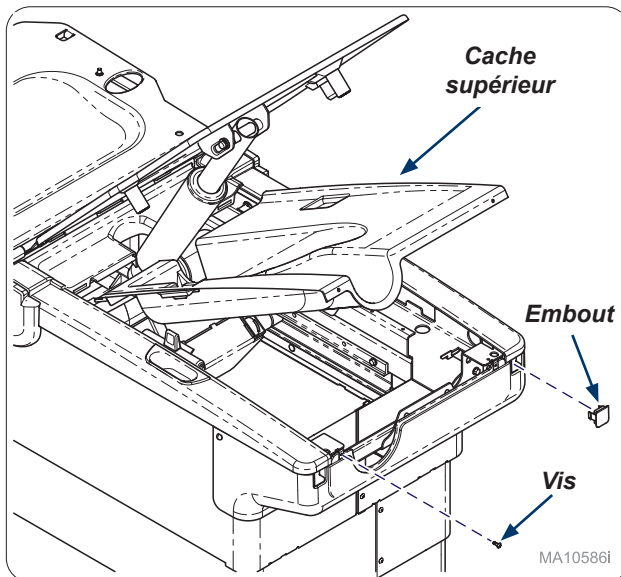


Étape 1 :

Retirer les deux vis et le cache supérieur.
Appuyer sur les languettes et retirer les embouts.

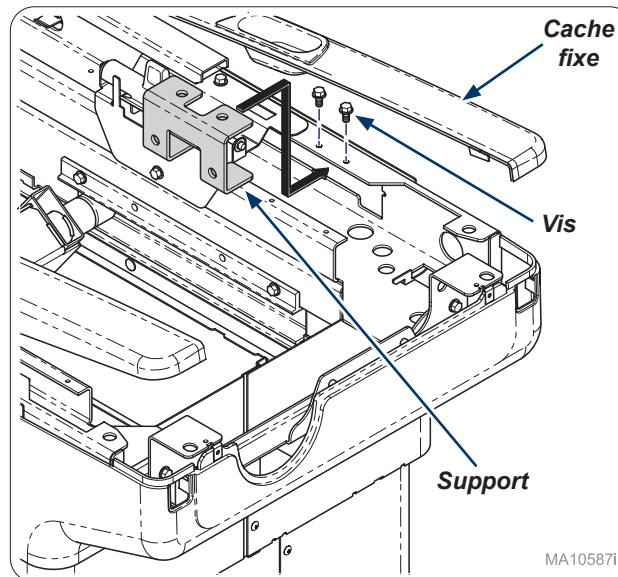

Étape 2 :

Soulever le cache fixe. Aligner le support avec les trous de montage et bloquer avec deux vis. Répéter la procédure de l'autre côté.

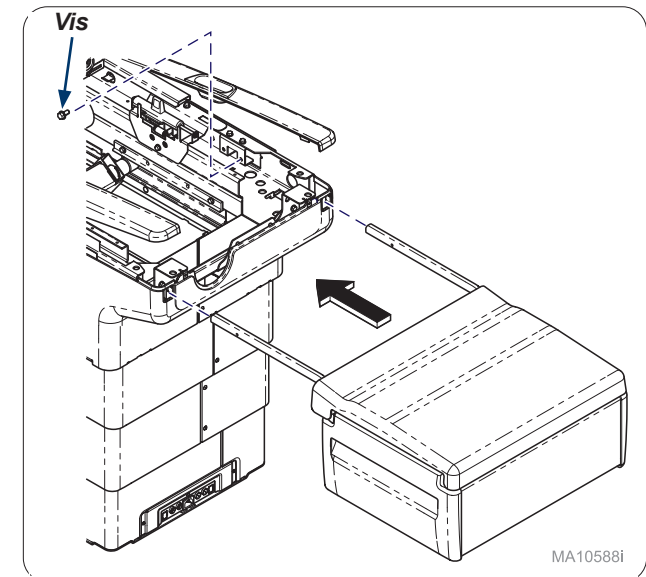

Étape 3 :

Insérer un ensemble de stockage arrière dans l'enroulement supérieur et bloquer en insérant une vis dans chaque rail.

Unidad de almacenamiento trasera auxiliar de suministros [9A638001]

Se aplica a los

modelos:

224 (-001 /-002 /-003 /-011)


225 (-002 /-003)

627 (-011)

Herramientas


especiales:

ninguna

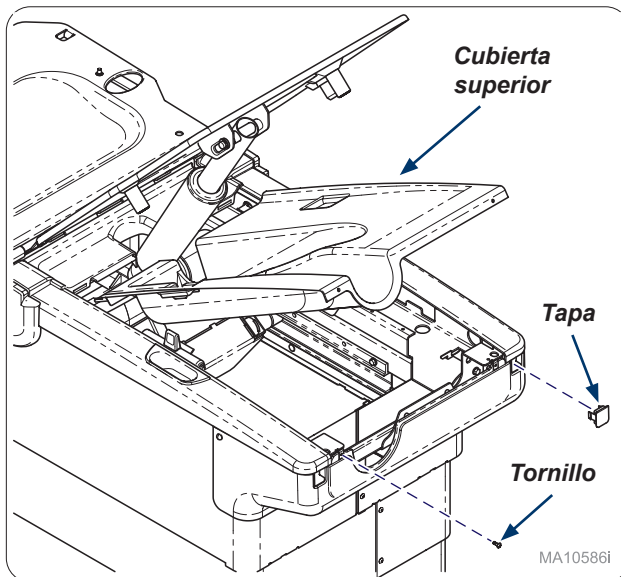


Paso 1:

Retire dos tornillos y la cubierta superior.
Presione las lengüetas y retire las tapas.

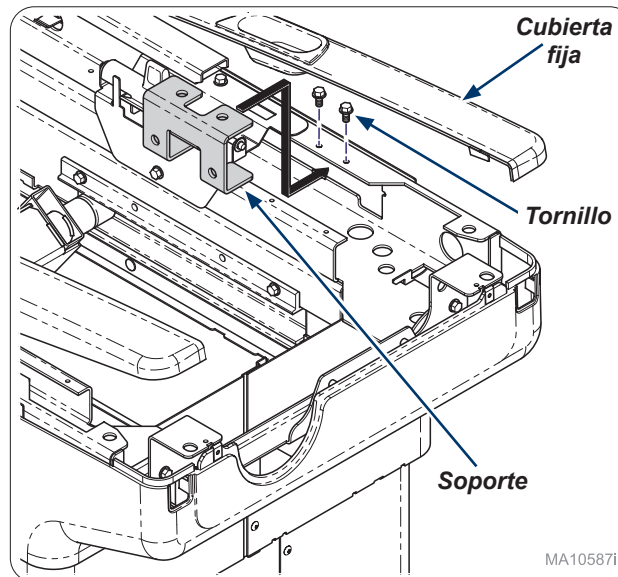

Paso 2:

Levante la cubierta fija. Alinee el soporte con los orificios de montaje y fíjelo con dos tornillos. Repita el procedimiento en el otro lado.

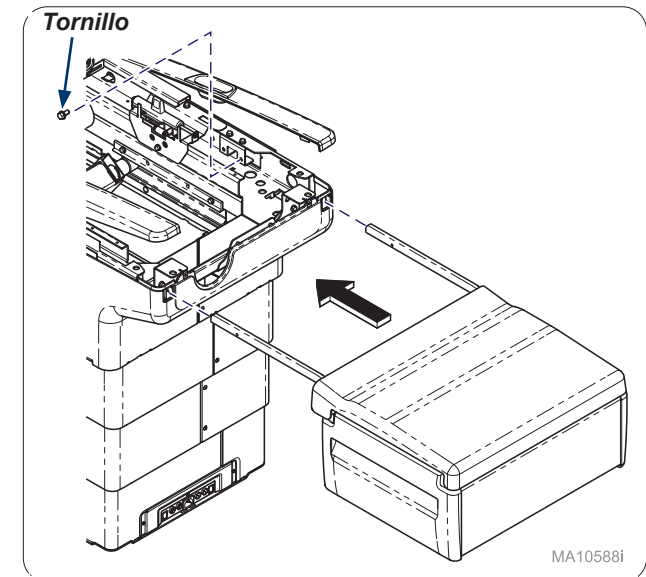

Paso 3:

Inserte el conjunto del almacenamiento trasero en la envoltura superior y fíjelo con un tornillo en cada riel.

Voorraadassistent opslageenheid voor achterzijde [9A638001]


Van toepassing
op de volgende
modellen:

224 (-001 /-002 /-003 /-011)


225 (-002 /-003)

627 (-011)


Speciale middelen:
geen

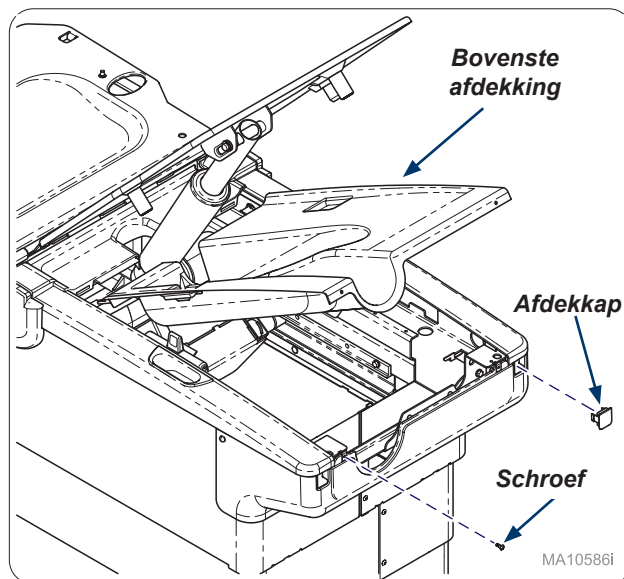

Stap 1:
Verwijder de twee schroeven en de bovenste afdekking.
Druk de vergrendelingen in en verwijder de afdekkappen.

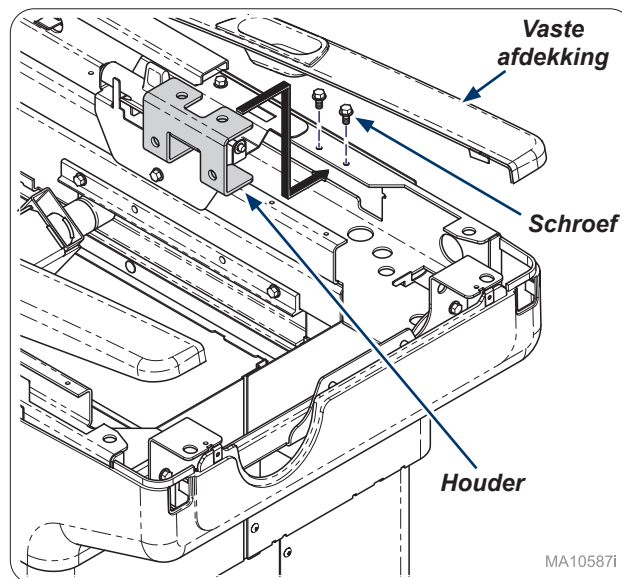

Stap 2:
Til de voordien vastgeschroefde afdekking op. Lijn de
houder uit met de montagegaten en bevestig deze met
twee schroeven. Herhaal dit aan de andere kant.

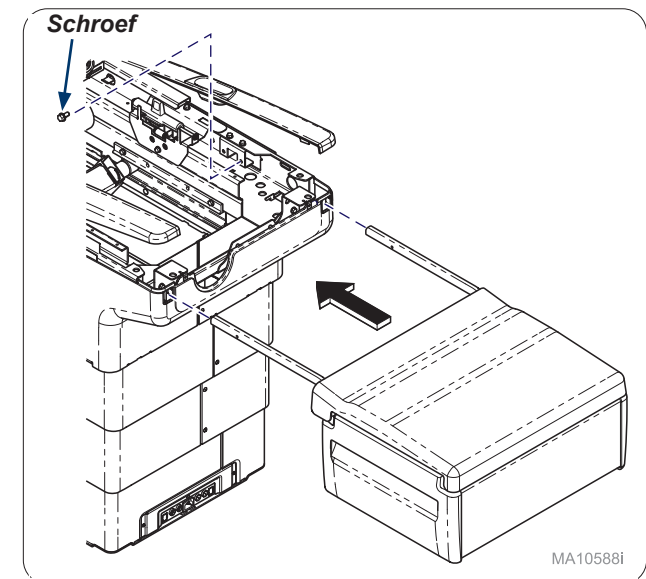

Stap 3:
Schuif de opslageenheid voor de achterzijde in de
bovenste wikkel en bevestig deze met een schroef per rail.

Tylna jednostka magazynowa zasobnika [9A638001]

Dotyczy modeli:


224 (-001 /-002 /-003 /-011)

225 (-002 /-003)

627 (-011)


**Narzędzia
specjalne:**

brak

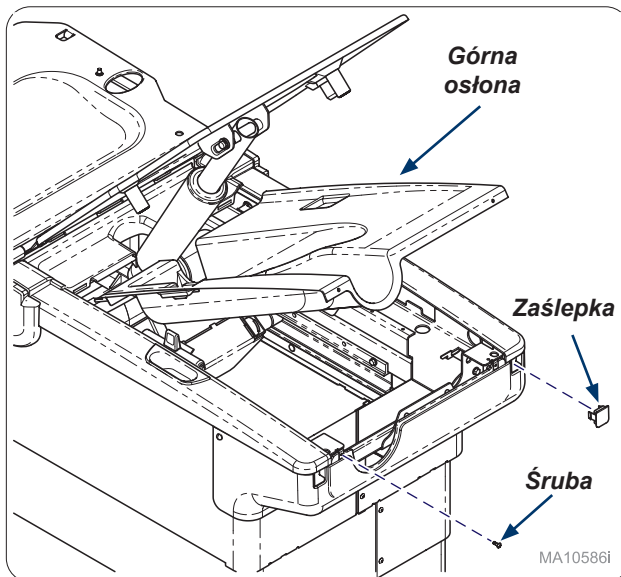


Krok 1:

Zdemontować dwie śruby i pokrywę górną.
Nacisnąć kłapki i zdemontować zaślepki.

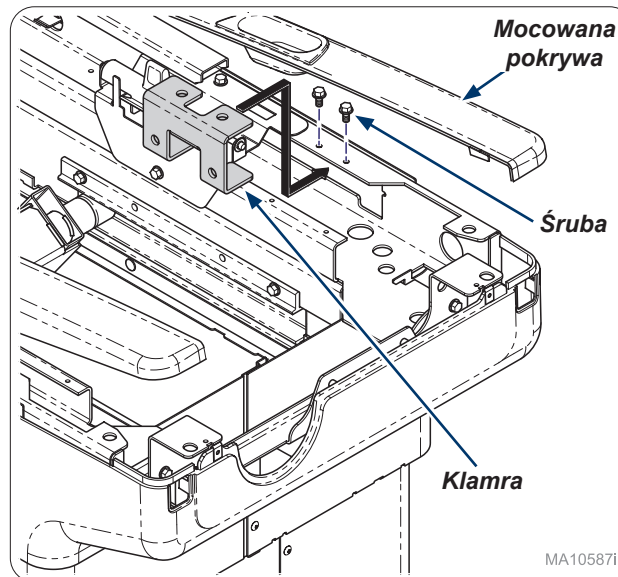

Krok 2:

Podnieść mocowaną pokrywę. Ustawić klamrę na otworach montażowych i zamocować dwiema śrubami.
Powtórzyć czynności po drugiej stronie.

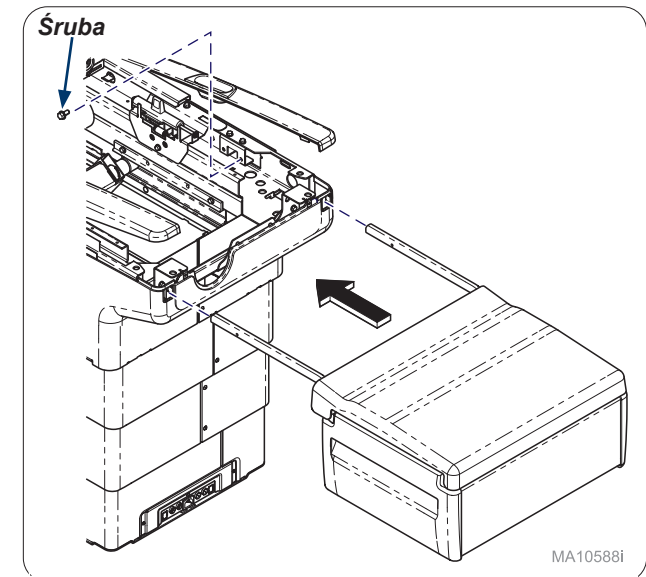


Krok 3:

Włożyć tylny zespół magazynowy w górne prowadnice i zamocować przez wkręcenie po jednej śrubie w każdej szynie.


Zadní úložná jednotka zásuvky na provozní materiál [9A638001]

Platí pro modely:
224 (-001 /-002 /-003 /-011)
225 (-002 /-003)
627 (-011)


Zvláštní nástroje:
žádné

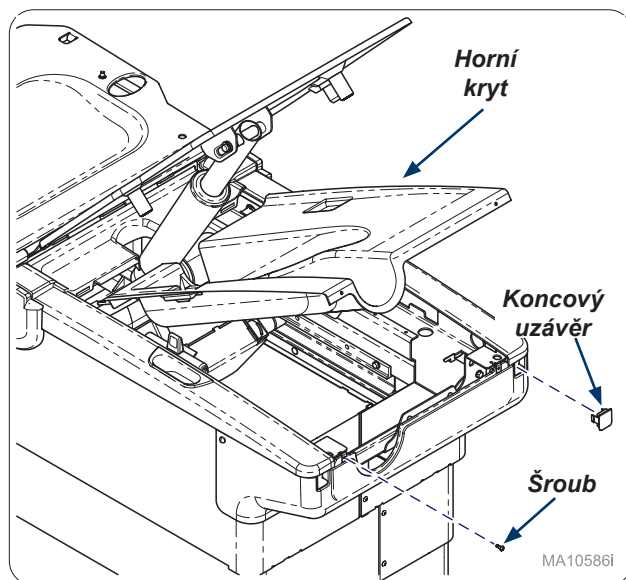

Krok 1:
Odstraňte dva šrouby a horní kryt.
Stlačte desky a odstraňte koncové uzávěry.

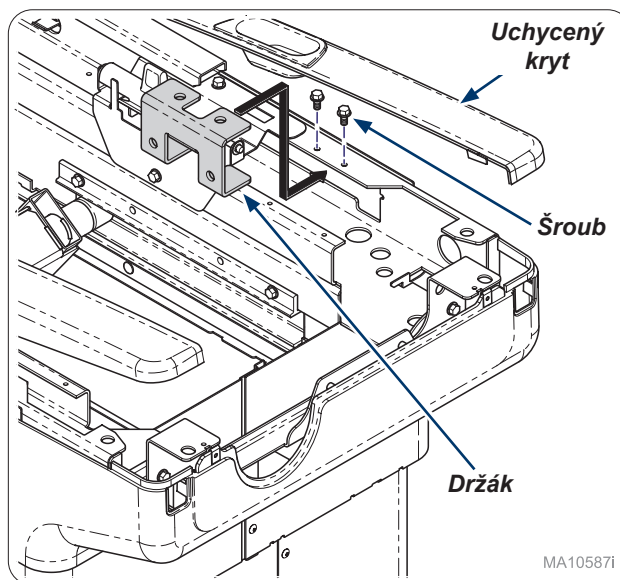

Krok 2:
Vyzvedněte na uchycený kryt. Zarovnejte držák s montážními otvory a zajistěte dvěma šrouby. Totéž proveďte na druhé straně.

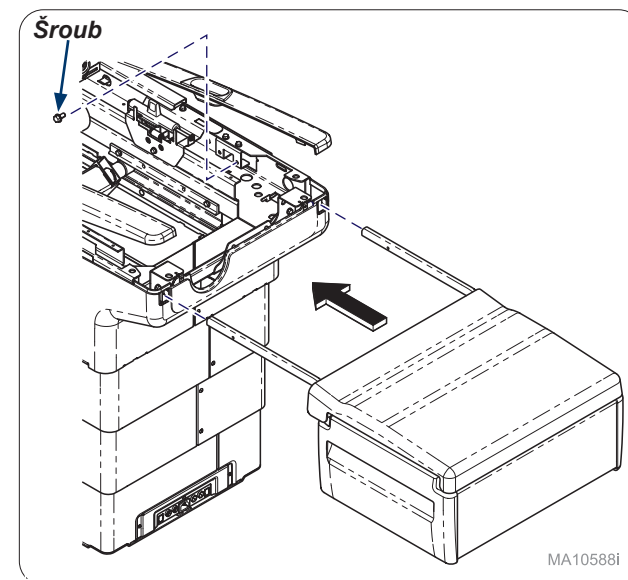

Krok 3:
Vložte sestavu zadní úložné jednotky do horního dílu a zajistěte jedním šroubem v každé kolejnici.