



Barrier-Free® Exam Chair Heated Upholstery Setup Instructions

Applies to Models:
Midmark 626 (-002 /-004 /-006)

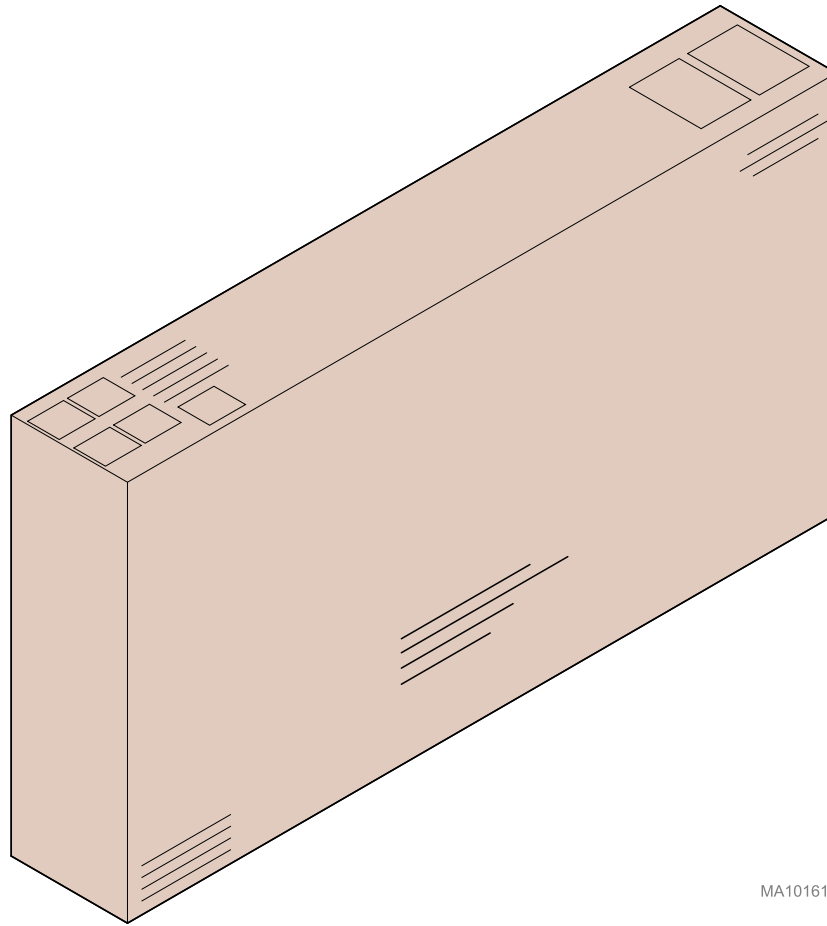


MA10161i

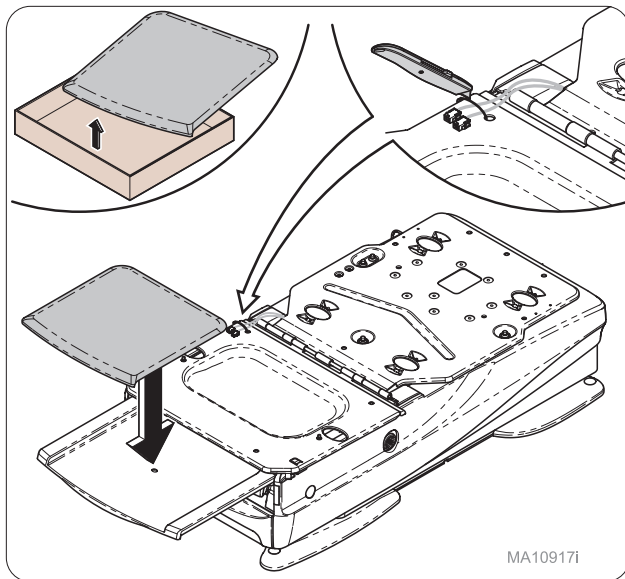

MA10917i

Step 1:


Cut zip tie. Install footrest upholstery, inserting pin on bottom of upholstery into footrest shelf hole.

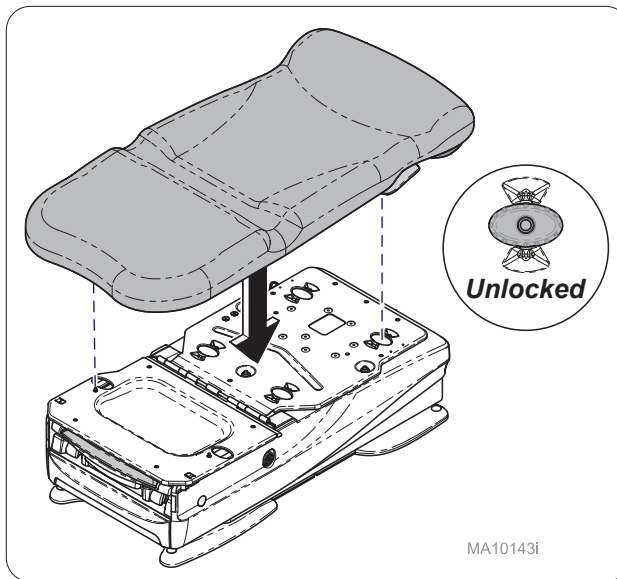

MA10143i

Step 2:


With locking knobs in the unlocked position and chair flat, place upholstery on chair top aligning locking knobs with holes.

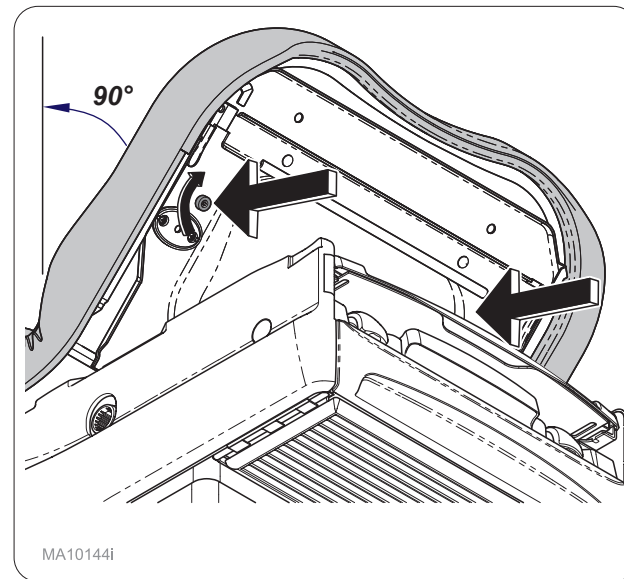

MA10144i

Step 3:


Raise seat pan 90 degrees and secure seat section using attached thumb screws (2). Lower seat pan.

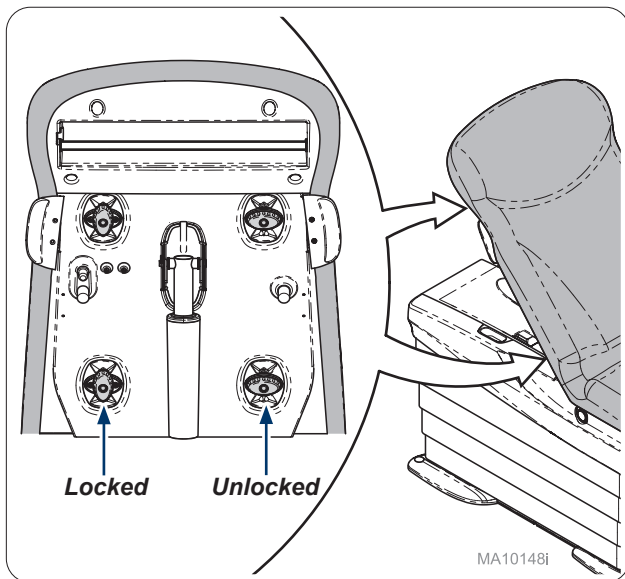

MA10148i

Step 4:


Raise back and latch upholstery locking knobs (4).

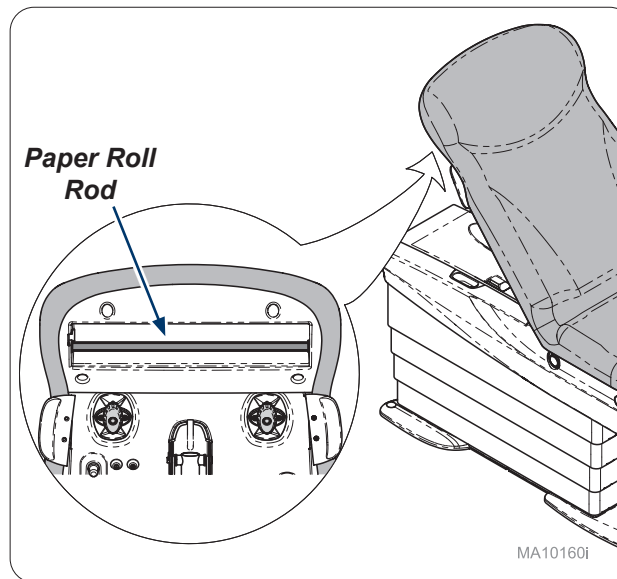

MA10160i

Step 5:

Ensure paper roll rod is in place.

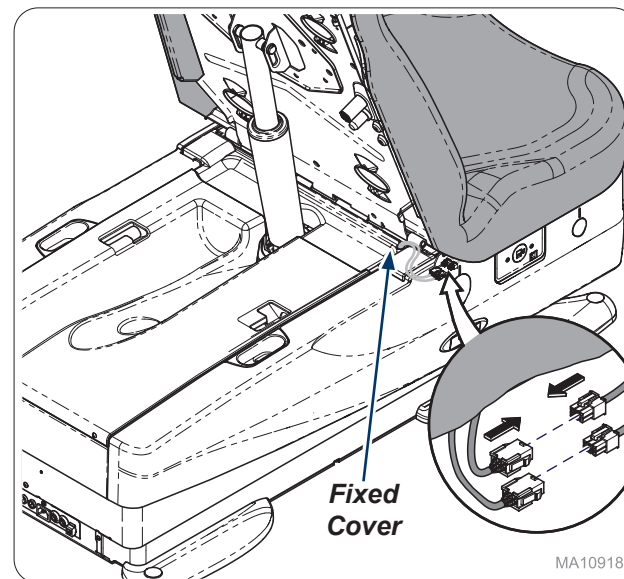


MA10918i

Step 6:


Plug wire harnesses from fixed cover into upholstery harnesses as shown.

Instructions de montage de la garniture chauffante du fauteuil d'examen Barrier-Free®

Modèles concernés :
Midmark 626 (-002 /-004 /-006)

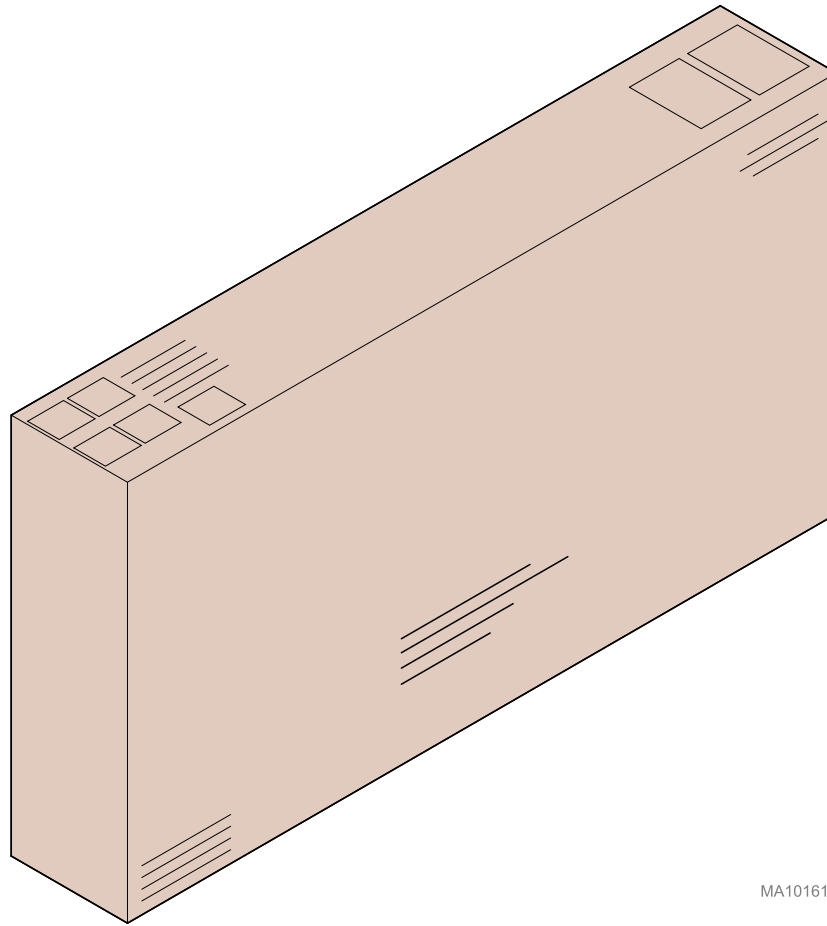


MA10161i

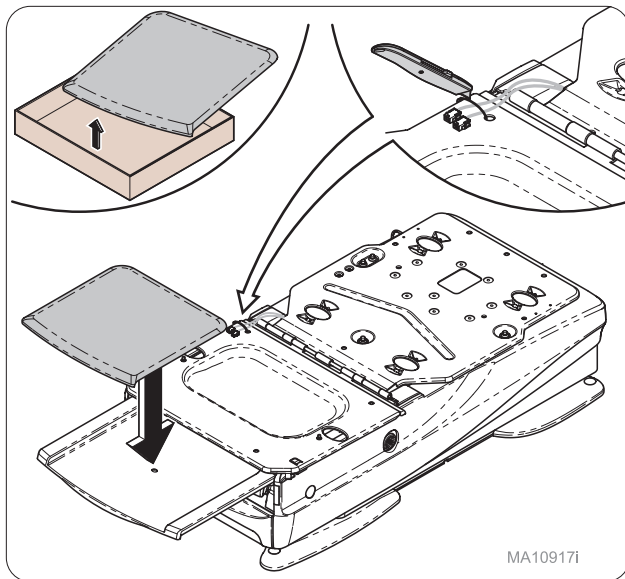

MA10917i

Étape 1 :


Couper les lien. Installer la garniture du repose-pied, en insérant la tige située à l'arrière de la garniture à travers le trou du repose-pied.

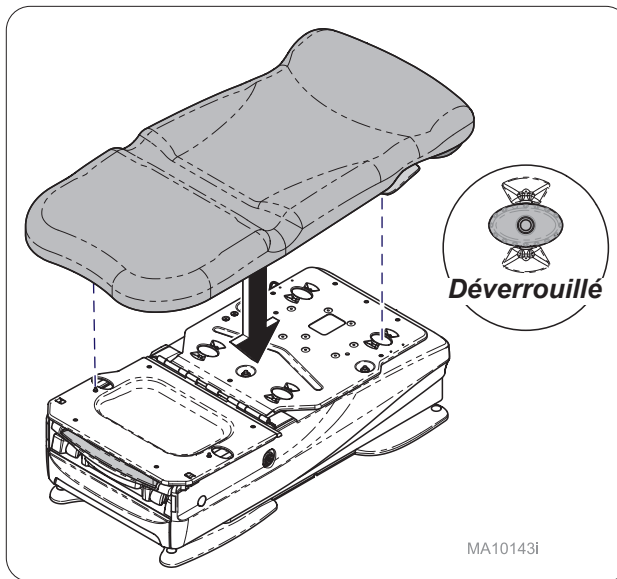

MA10143i

Étape 2 :


Avec les boutons de verrouillage en position déverrouillée et le fauteuil à plat, placer la garniture sur le dessus du fauteuil en alignant les boutons de verrouillage avec les trous.

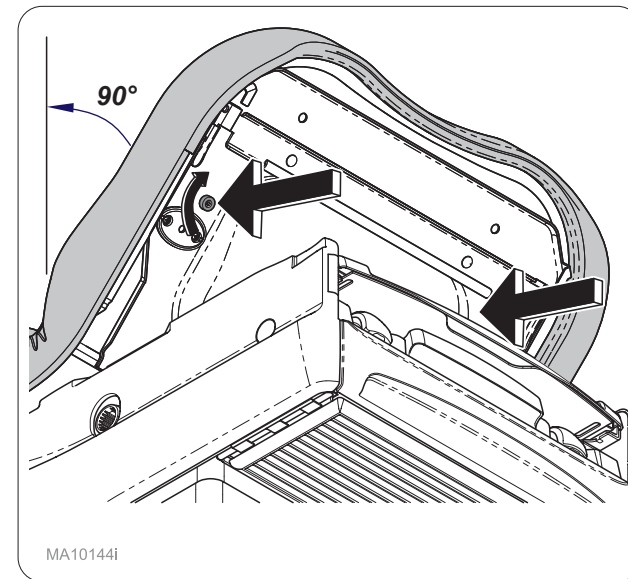

MA10144i

Étape 3 :


Relever l'assise à 90 degrés et fixer l'assise à l'aide des vis papillon fournies (2). Abaisser l'assise.

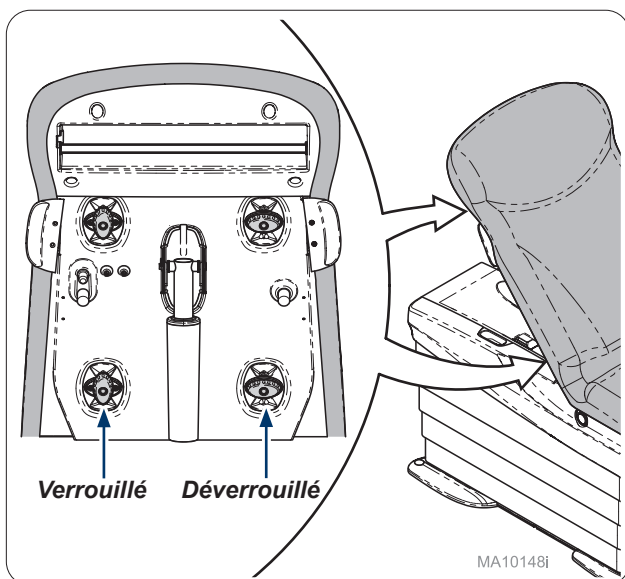

MA10148i

Étape 4 :


Relever le dossier et enclencher les boutons de verrouillage de la garniture (4).

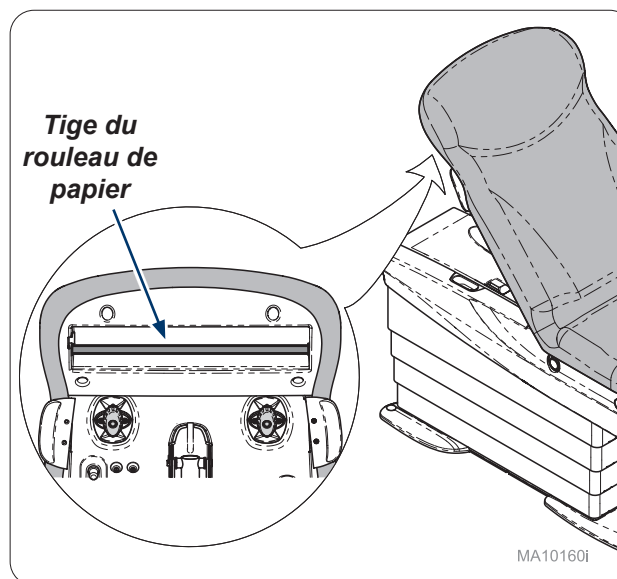

MA10160i

Étape 5 :

S'assurer que la tige du rouleau de papier est en place.

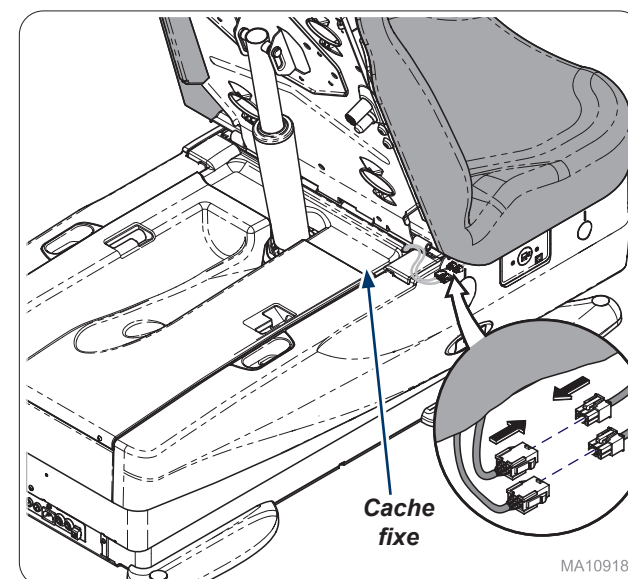


MA10918i

Étape 6 :


Brancher les faisceaux de câbles provenant du couvercle fixe dans les faisceaux de la garniture, comme indiqué.

Instrucciones de instalación de la tapicería climatizada del sillón de exploración Barrier-Free


Se aplica a los modelos:
Midmark 626 (-002 /-004 /-006)

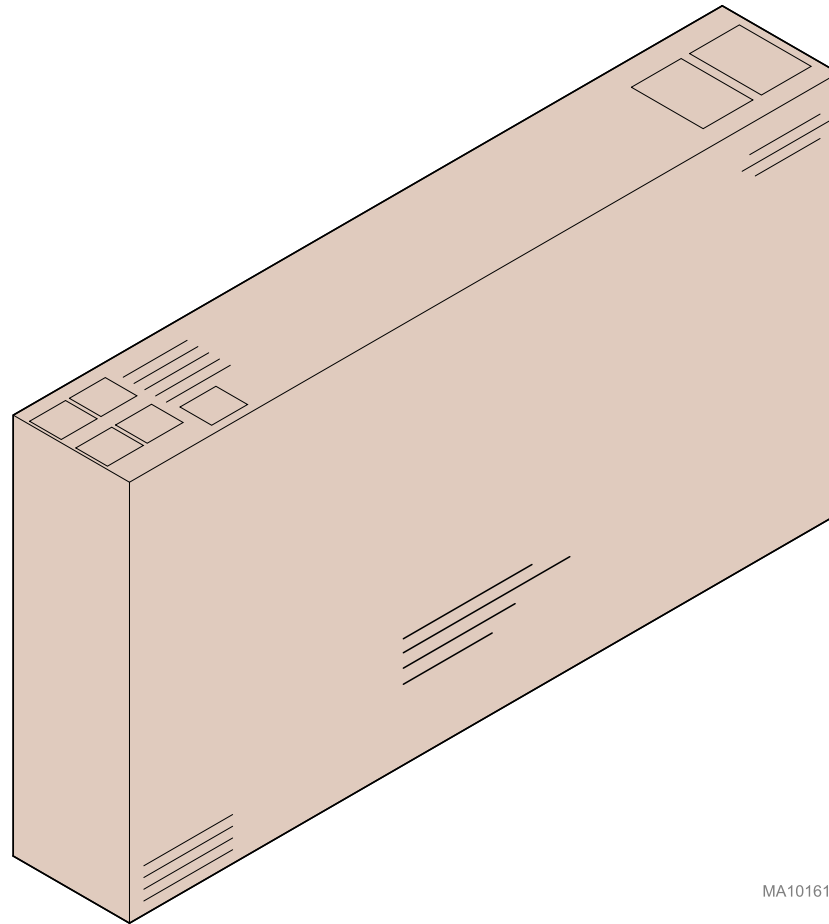


MA10161i

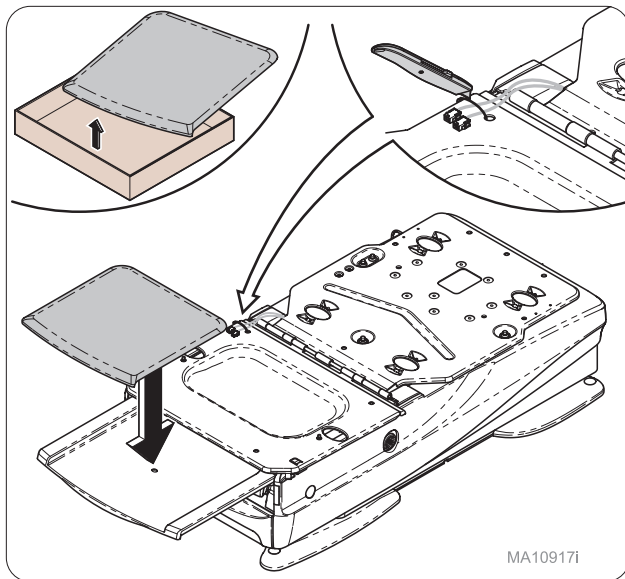


Paso 1:
Corte las brida. Coloque la tapicería del reposapiés insertando la pieza de la parte inferior de la tapicería en el orificio de la estructura del reposapiés.

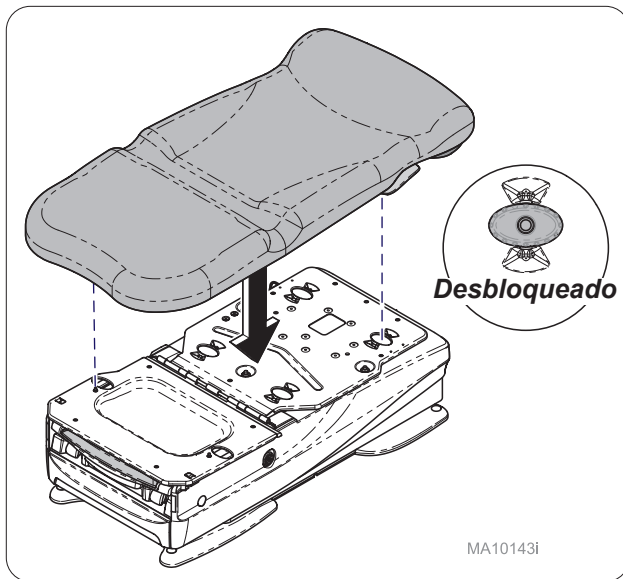


Paso 2:
Con los botones de bloqueo en posición desbloqueada y el sillón plano, coloque la tapicería sobre el sillón alineando los botones de bloqueo con los orificios.

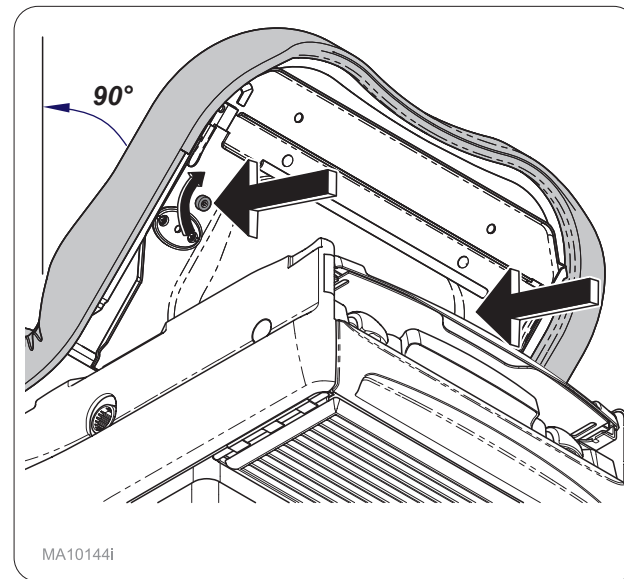


Paso 3:
Levante el asiento 90 grados y asegure la sección del asiento con tornillos de mariposa (2). Baje el asiento.

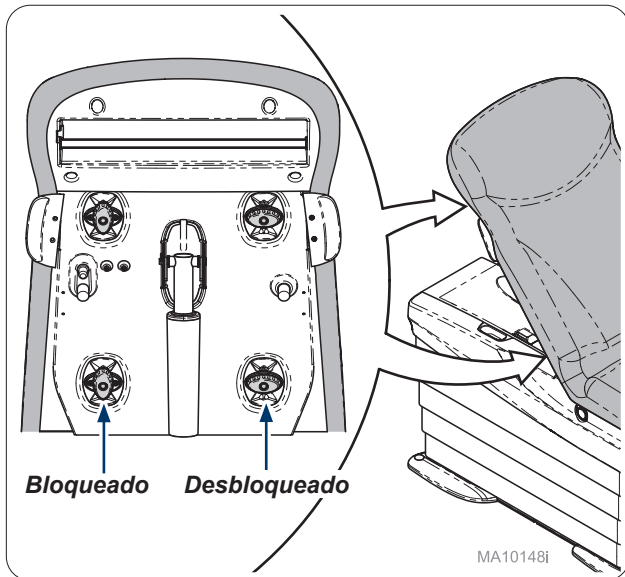

Paso 4:
Levante el respaldo y cierre los botones de bloqueo (4) de la tapicería.

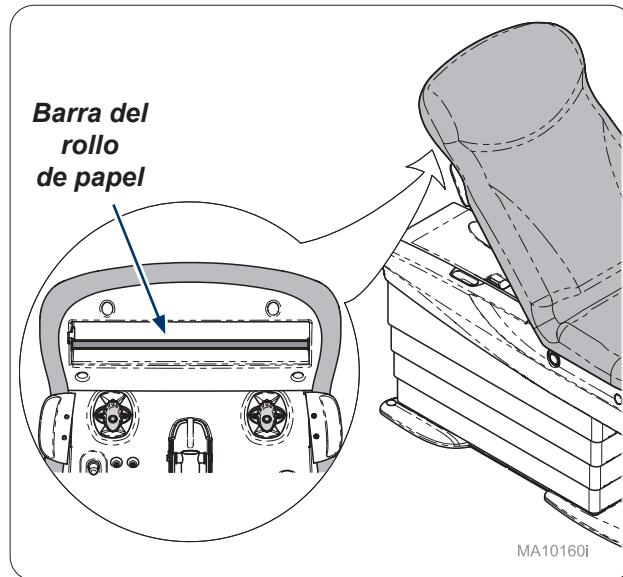

Paso 5:
Asegúrese de que la barra del rollo de papel esté colocada.

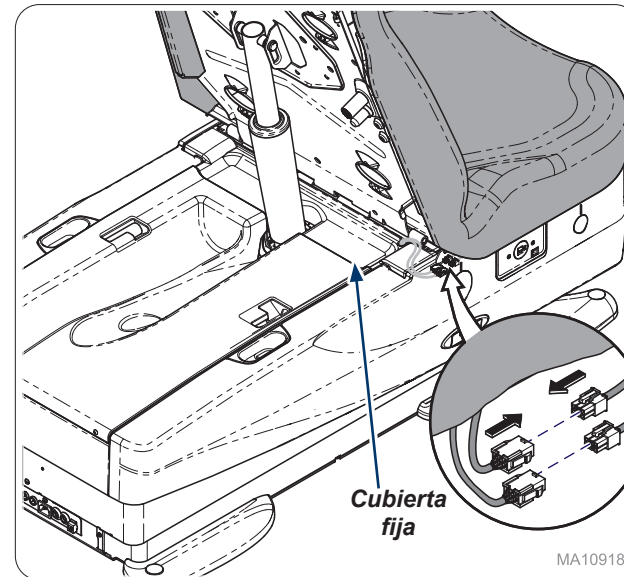

Paso 6:
Conecte los arneses de cables de la cubierta fija a los arneses tapizados como se muestra.