


Utility Shelf - (Rear Mounted ONLY) [9A656001]




Step 1:

Secure utility shelf to workstation base with screws (4).

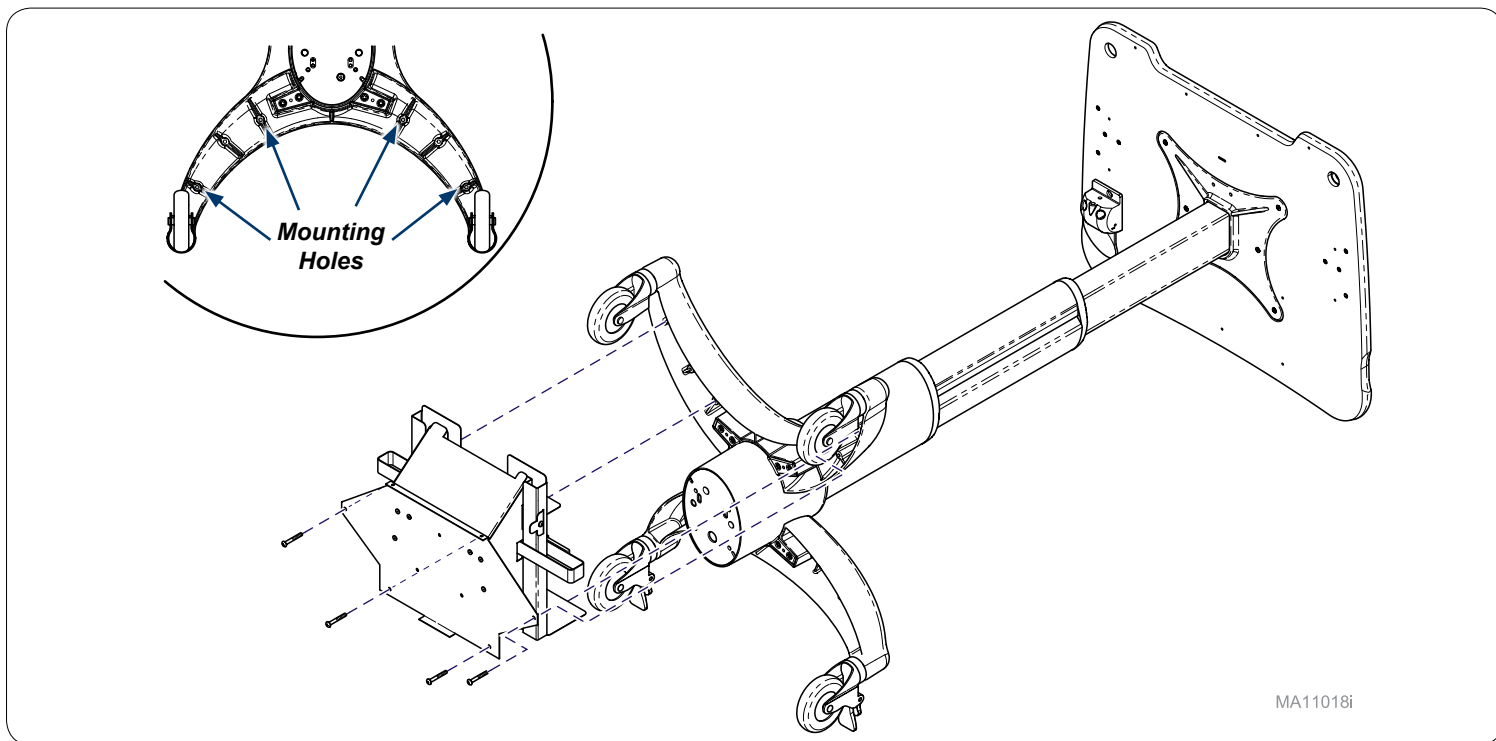


Step 2:

Slide mounting collar into place and secure with screws (2).

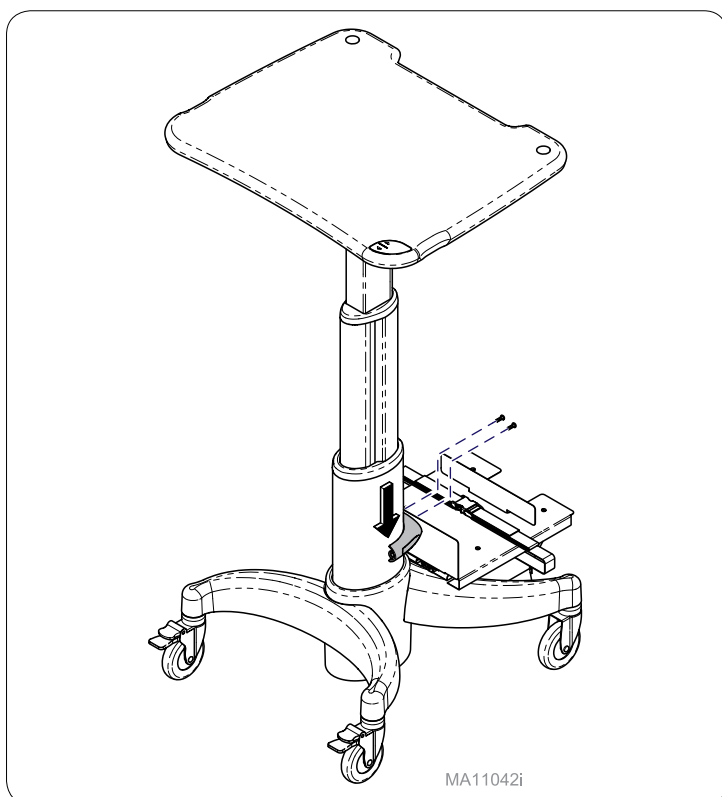

Step 3:

- Secure utility shelf to column with clamp and screws (2).
- Snap cover on to clamp.

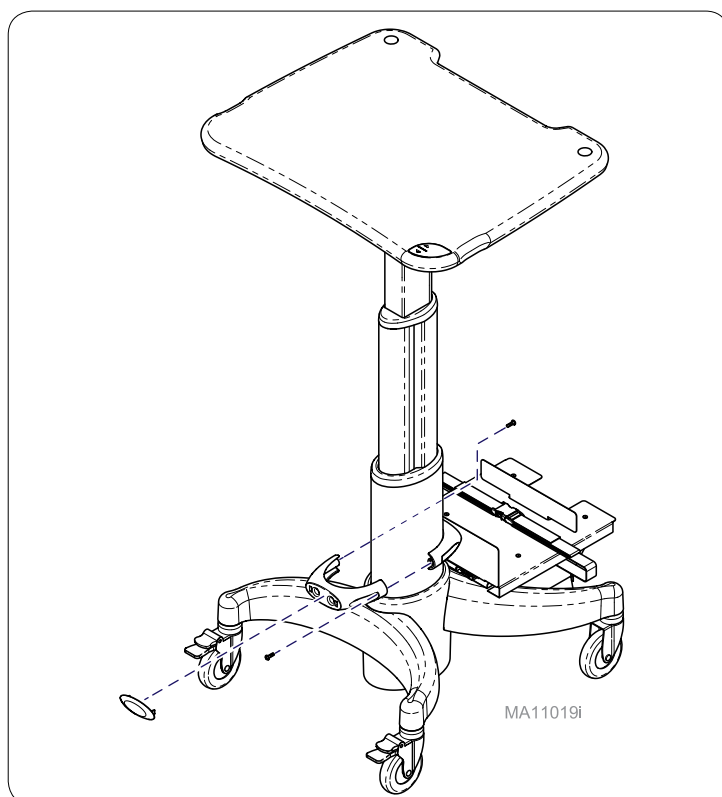


Hilfsablage - (NUR an der Rückseite montiert) [9A656001]




Schritt 1:

Schrauben Sie die Hilfsablage mit den Schrauben (4) am Sockel des Arbeitstischs fest.

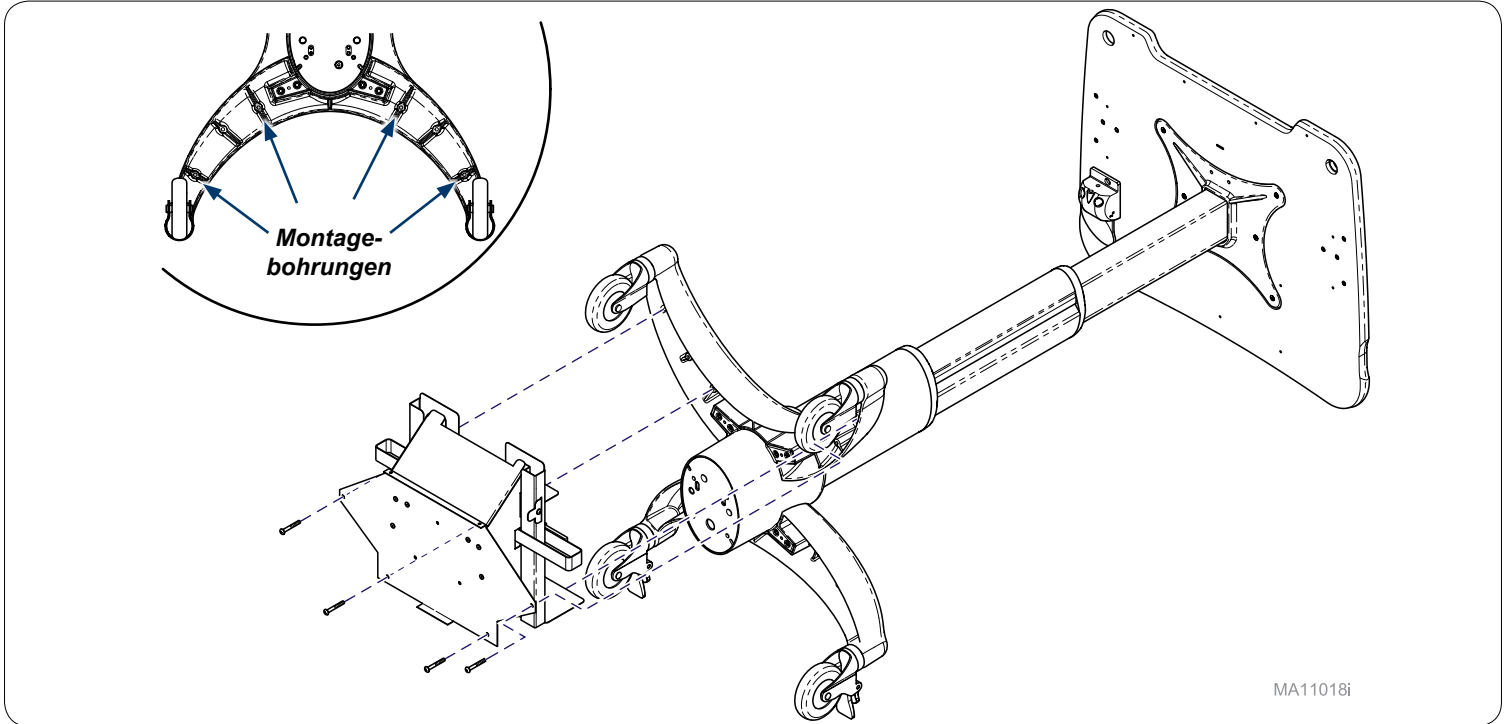


Schritt 2:

Schieben Sie die Montagemanschette an ihre Position und schrauben Sie die Schrauben (2) fest.

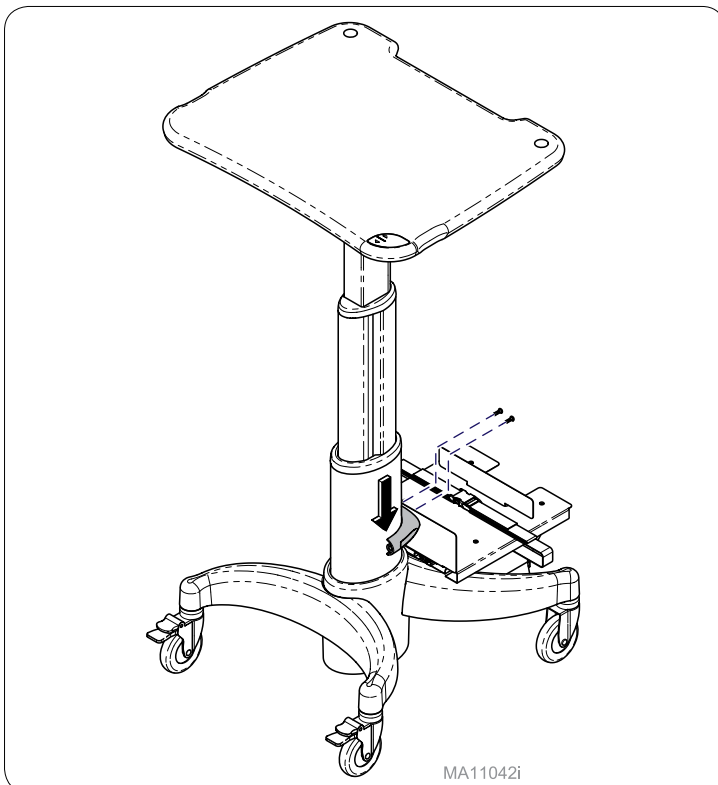

Schritt 3:

- Befestigen Sie die Hilfsablage mit den Klemmen und Schrauben (2) an der Stange.
- Bringen Sie die Abdeckung über der Klemme an und lassen Sie die Abdeckung einrasten.

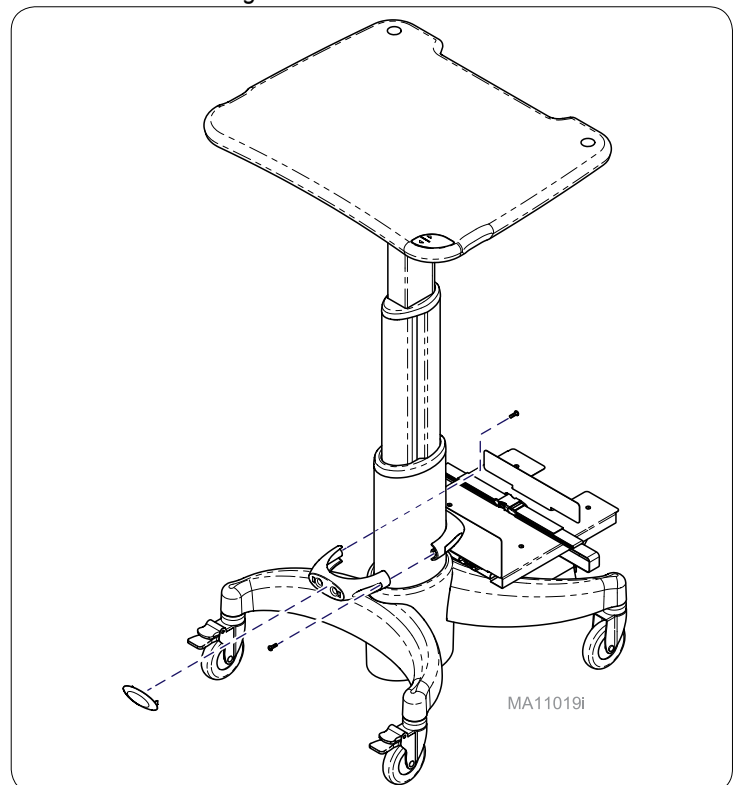


Étagère auxiliaire - (Montage à l'arrière UNIQUEMENT) [9A656001]




Étape 1 :

Fixer l'étagère auxiliaire (2) au poste de travail avec des vis (4).

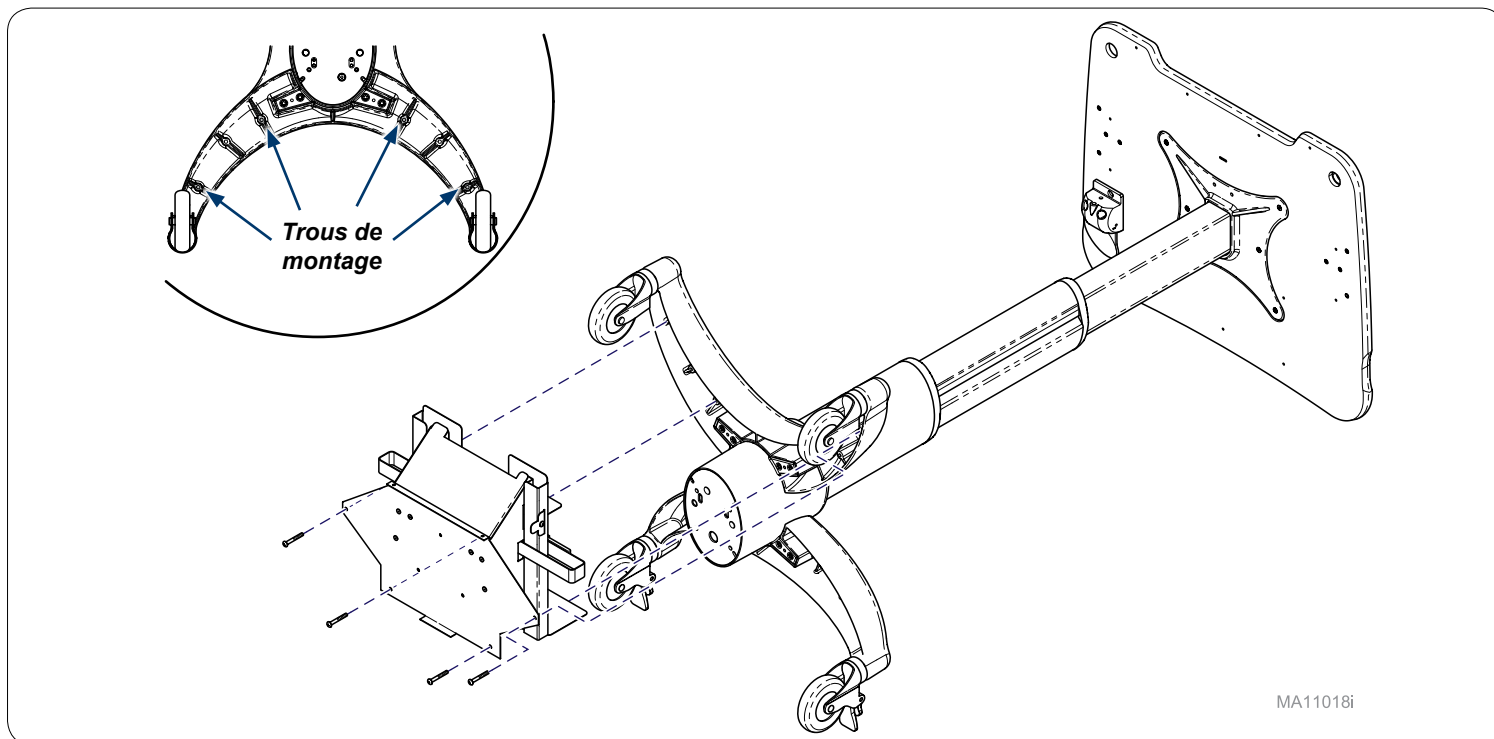


Étape 2 :

Faire glisser le collier de montage à sa place et fixer avec des vis (2).

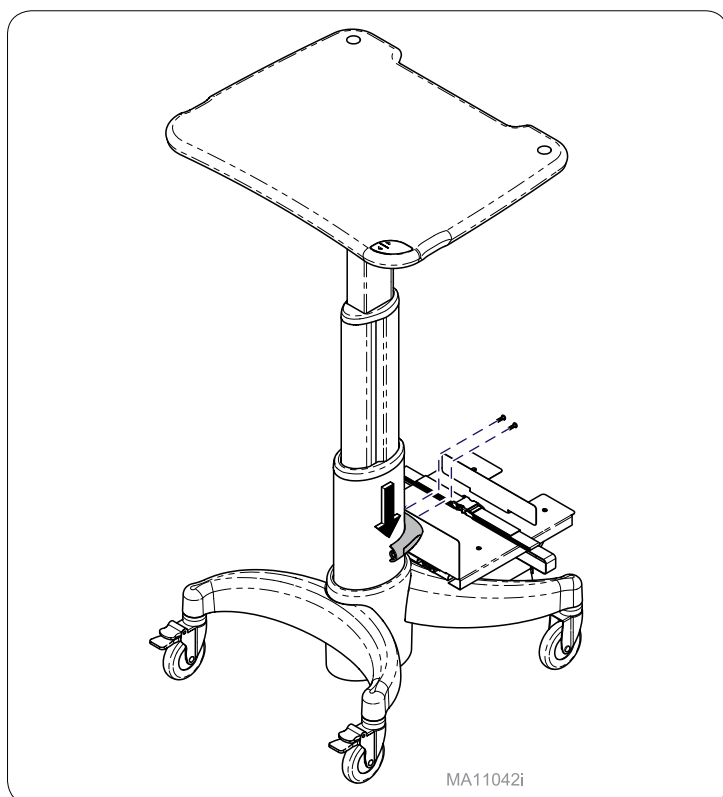

Étape 3 :

- a) Fixer l'étagère auxiliaire à la colonne avec une pince et des vis (2)
- b) Fixer le couvercle sur la pince.

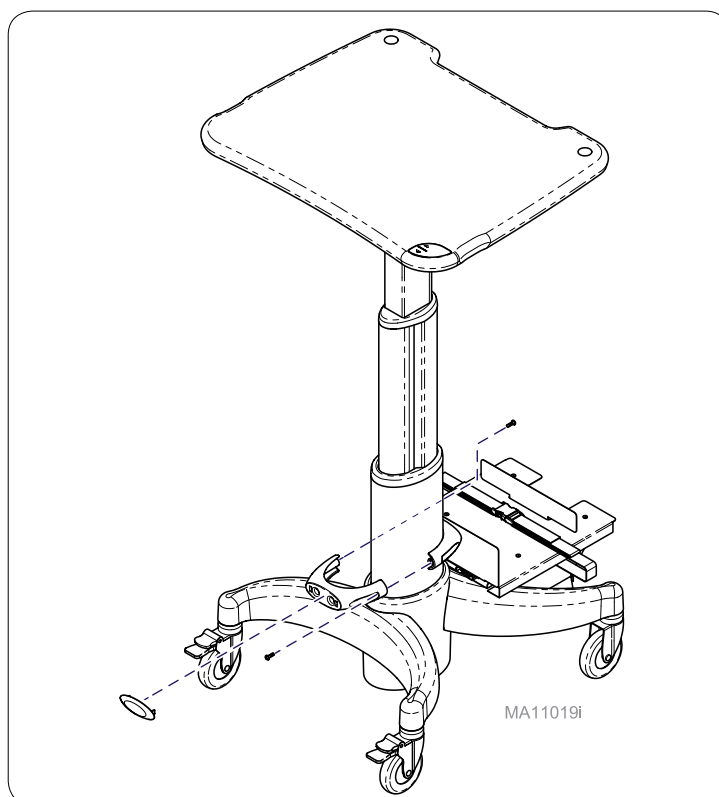


Plataforma para herramientas (SOLO para montaje trasero) [9A656001]



Paso 1:


Sujete la plataforma para herramientas a la base de la estación de trabajo con los tornillos (4).

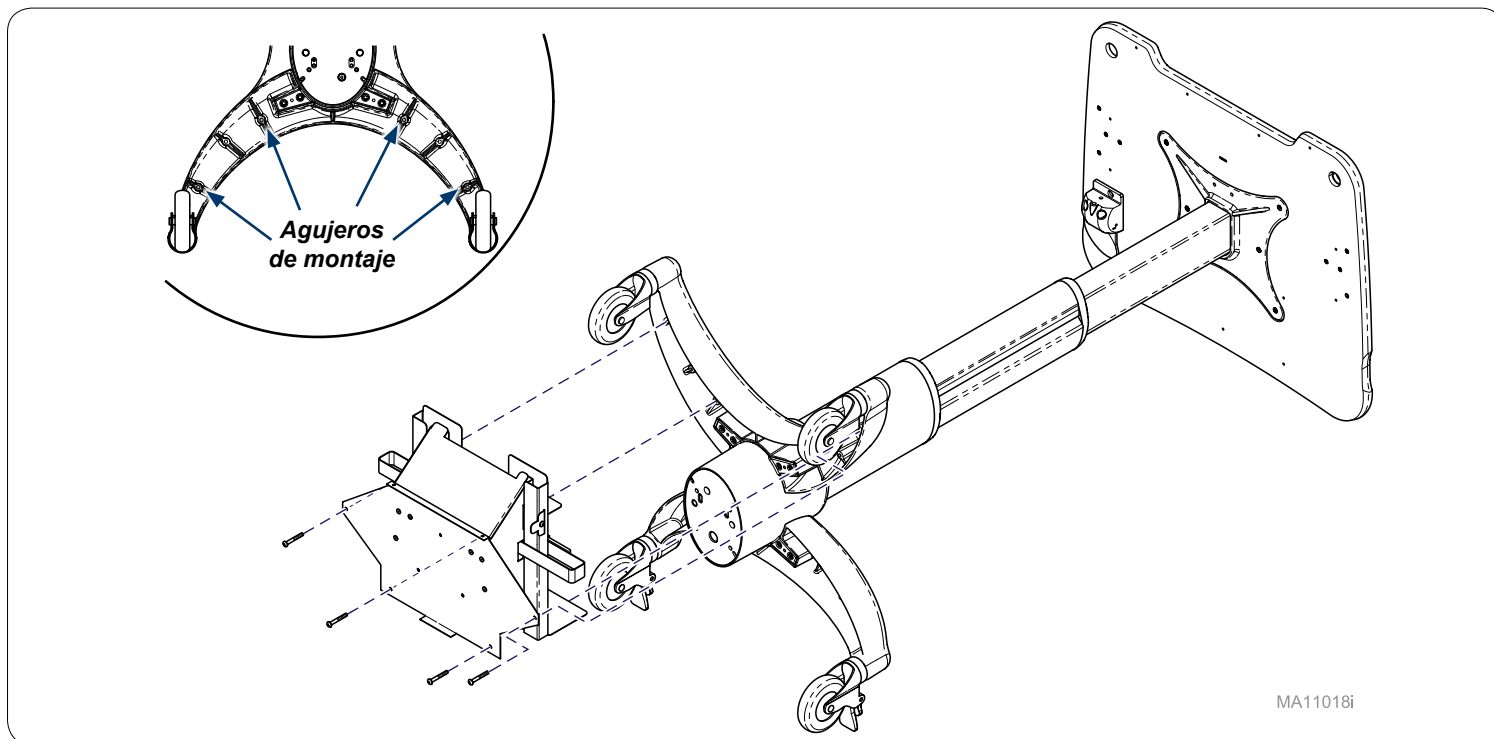

MA11018i

Paso 2:

Deslice el anillo de montaje hasta colocarlo en su sitio y sujételo con los tornillos (2).

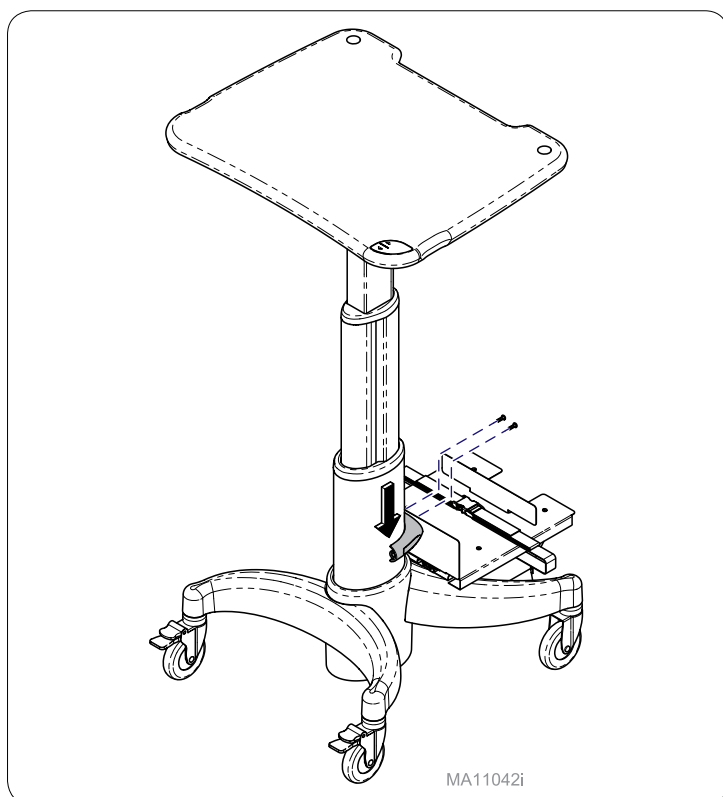

Paso 3:

- a) Sujete la plataforma para herramientas a la columna con la abrazadera y los tornillos (2).
- b) Ajuste las cubiertas a presión sobre las abrazaderas.

