


CPU Holder [9A663001]




Step 1:

Remove knobs and bolts from outer shield of CPU Holder and remove.

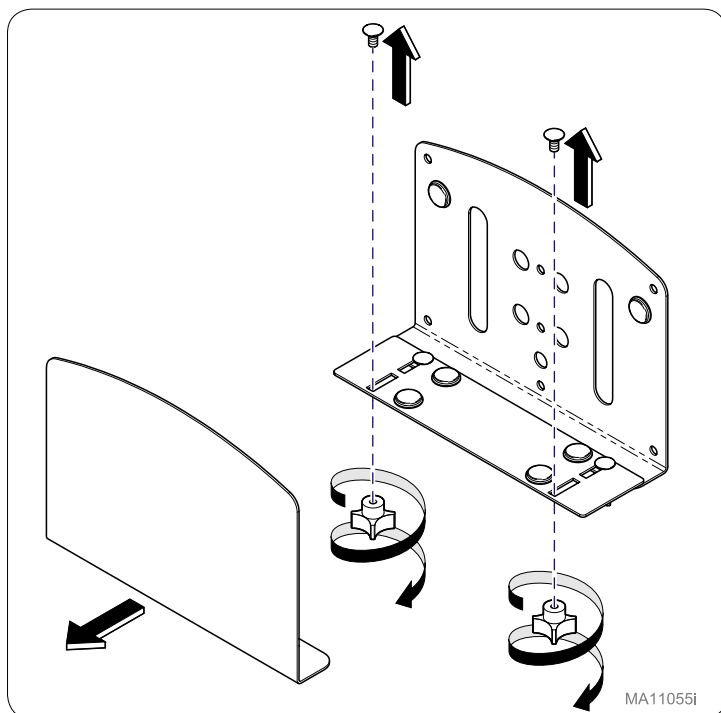


Step 2:

Install collar assembly to CPU Holder inner shield with screws (2).

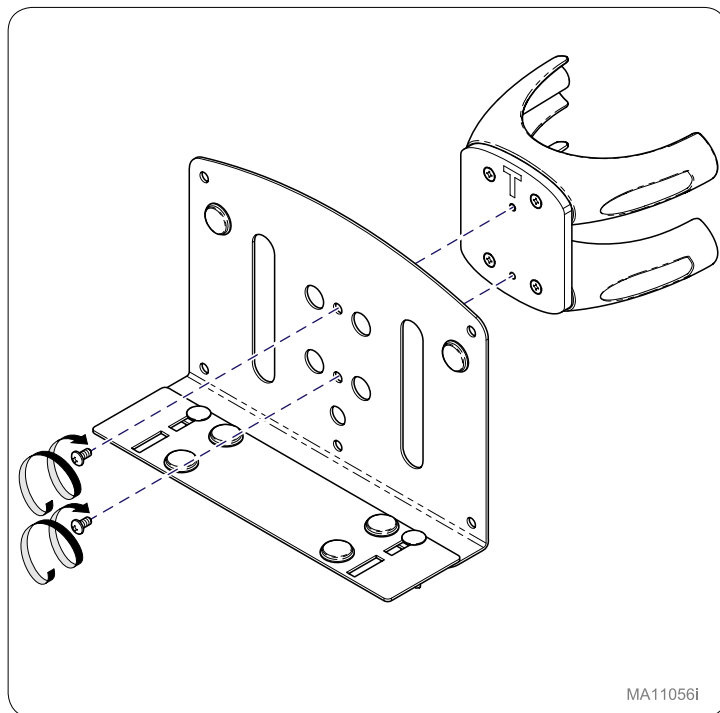


Step 3:

Install collar assembly and CPU Holder inner shield onto column with mounting collar (2) and screws (2) in desired position.

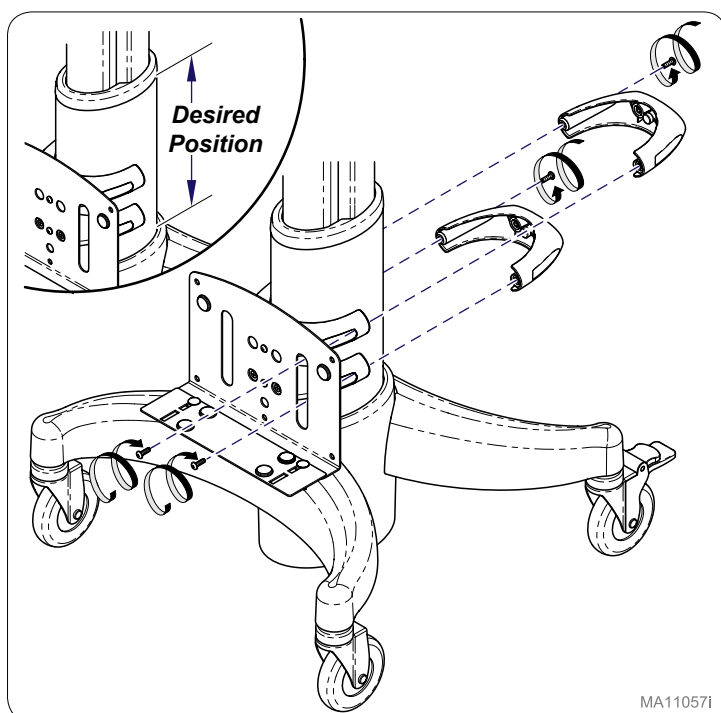


Step 4:

Press in mounting collar cap (2).

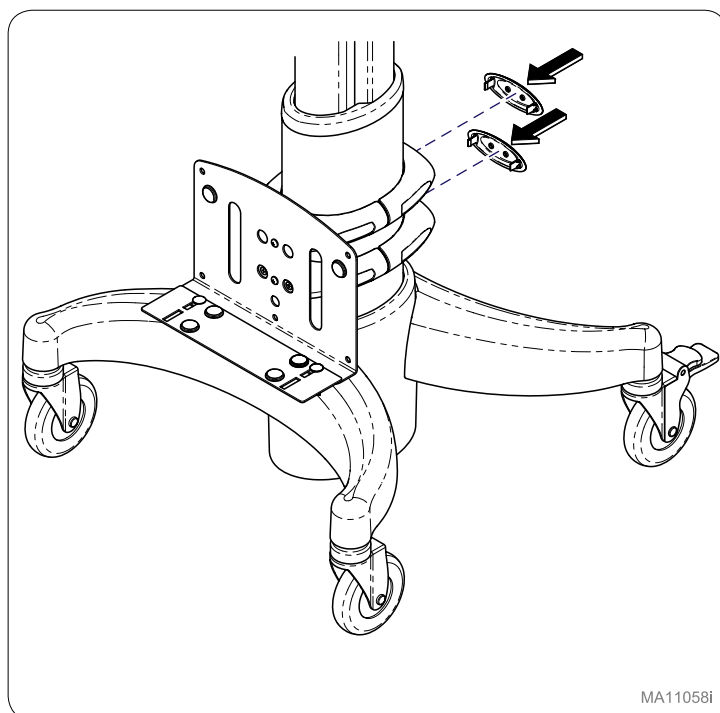


Step 5:


Install outer shield onto inner shield loosely with bolts (2) and knobs (2), adjust knobs (4) for CPU width and tighten knobs (4).

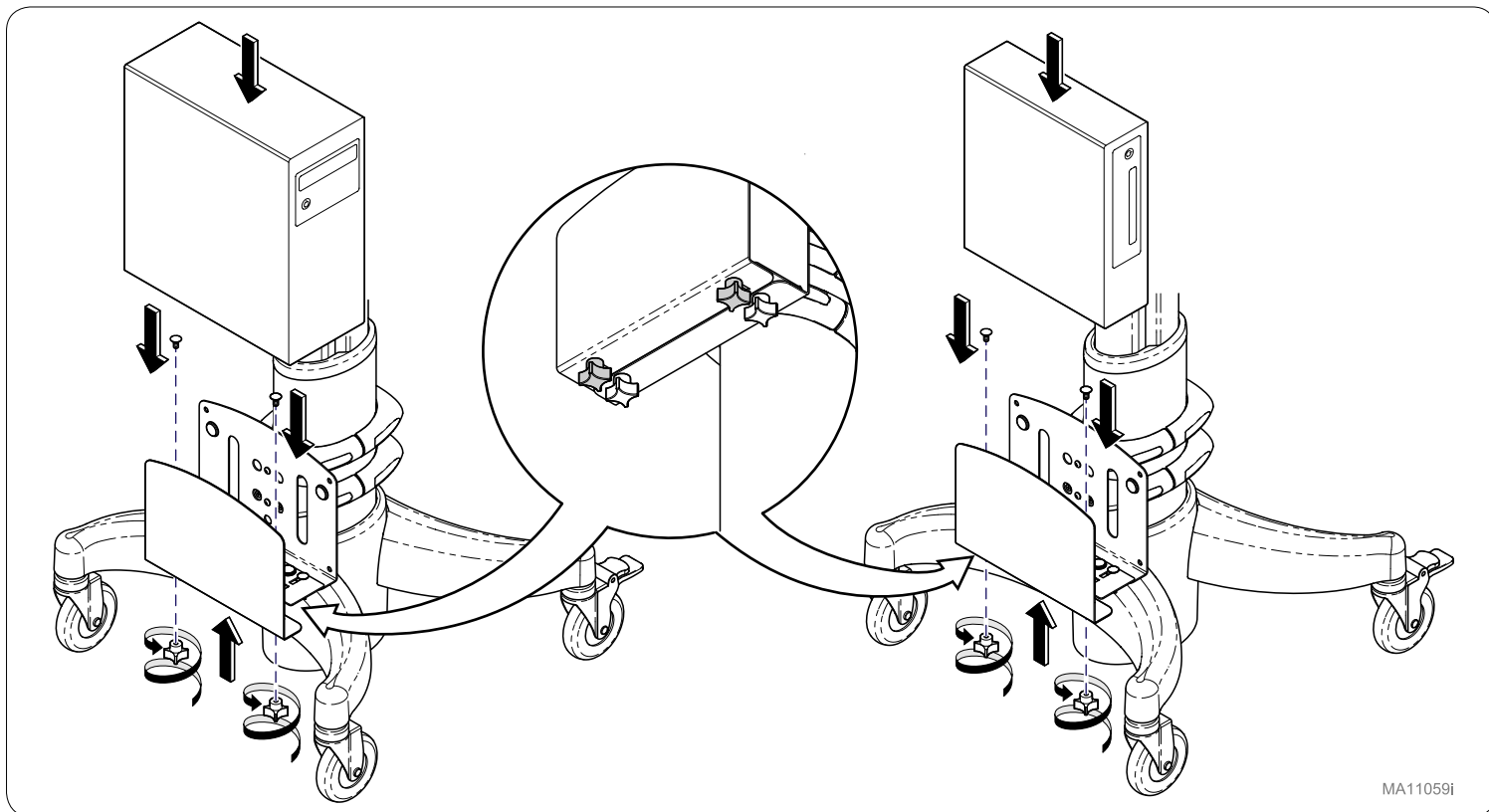**Step 6:**

Remove extender plate for thin CPU (if needed).

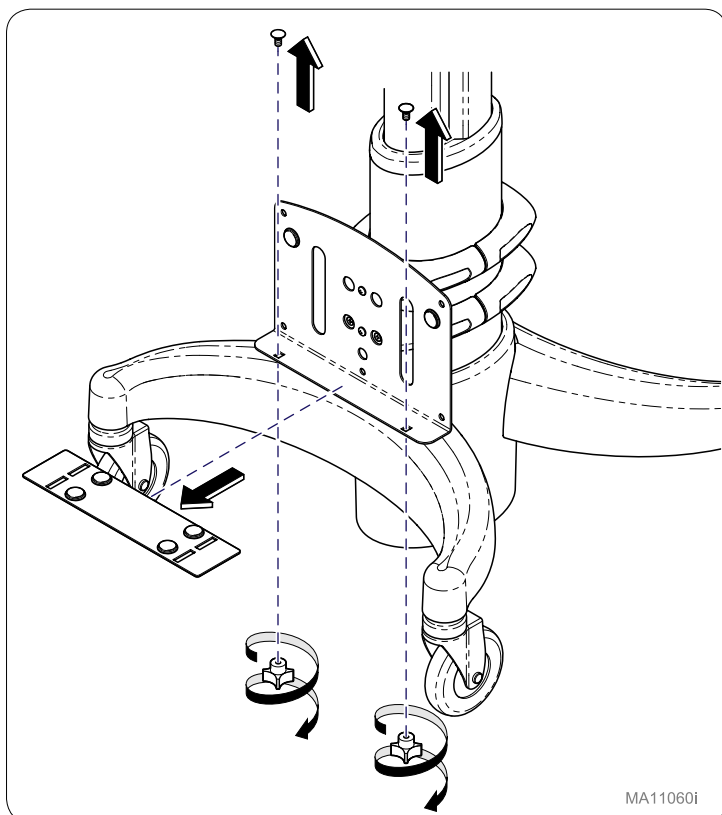
**Step 7:**

Install outer shield onto inner shield loosely with bolts (2) and knobs (2), adjust knobs (2) for CPU width and tighten knobs (2).

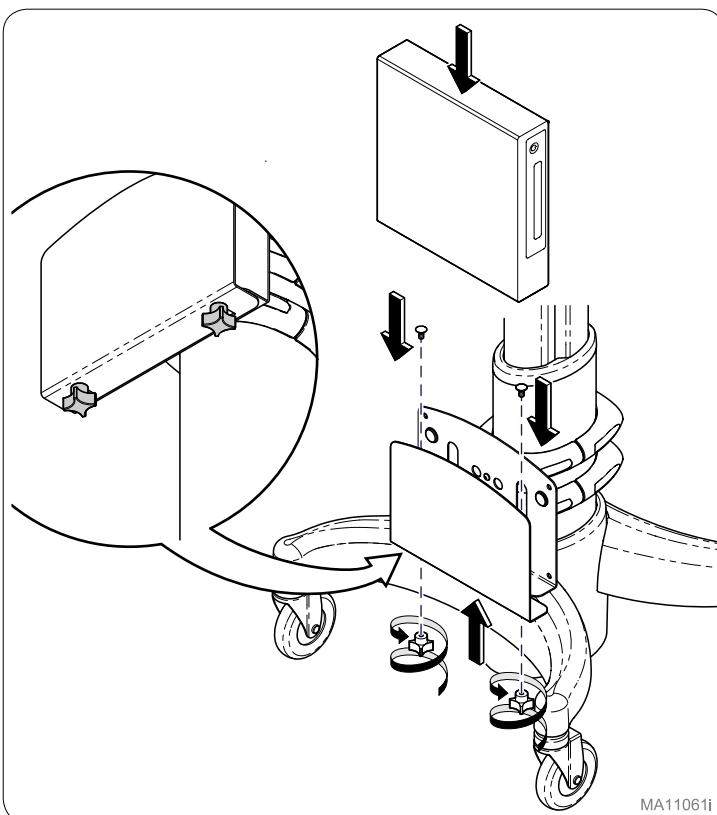


Schritt 1:

Knöpfe und Schrauben von der äußeren Platte des CPU-Halters entfernen und Platte abnehmen.

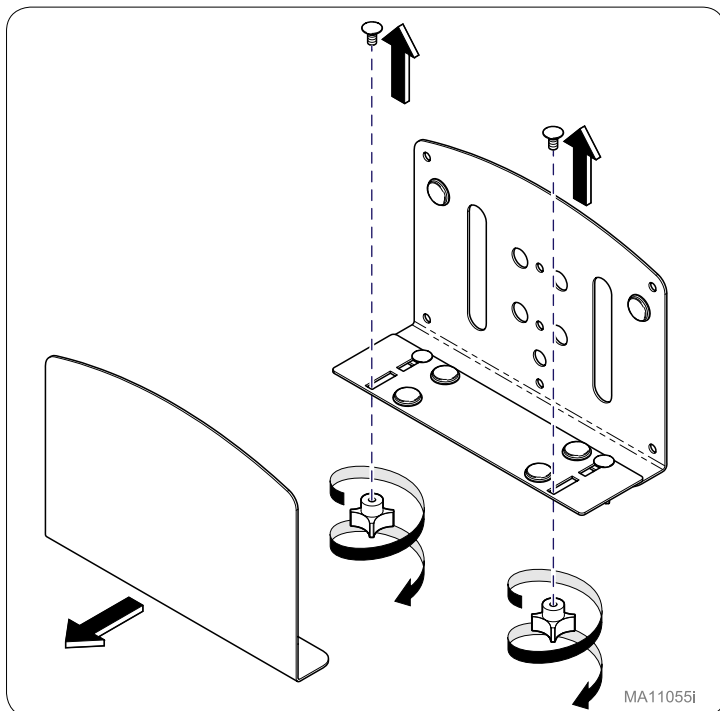


Schritt 2:

Manschettenbaugruppe mit den Schrauben (2) an innenliegender Platte des CPU-Halters anbringen.

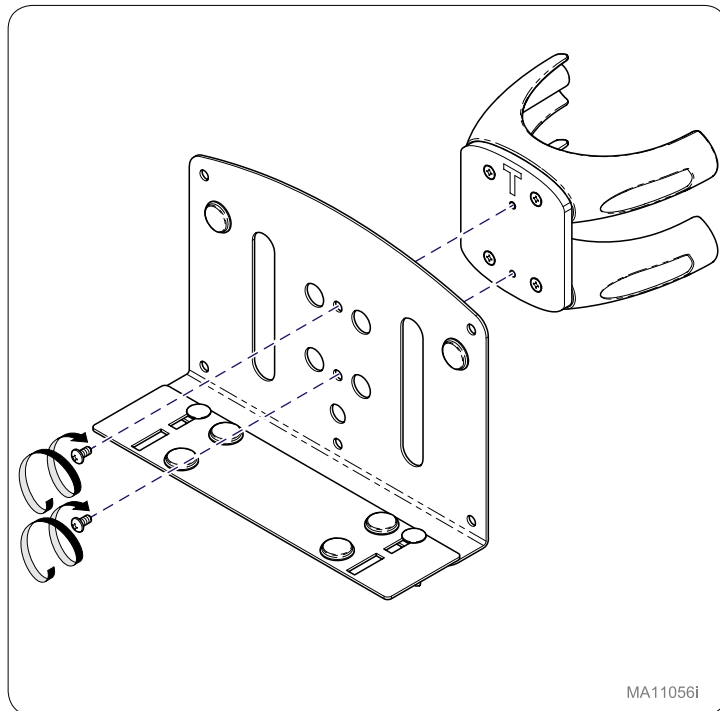


Schritt 3:

Manschettenbaugruppe und innenliegende Platte des CPU-Halters mit Montagmanschette (2) und Schrauben (2) auf der Stange in der gewünschten Position befestigen.

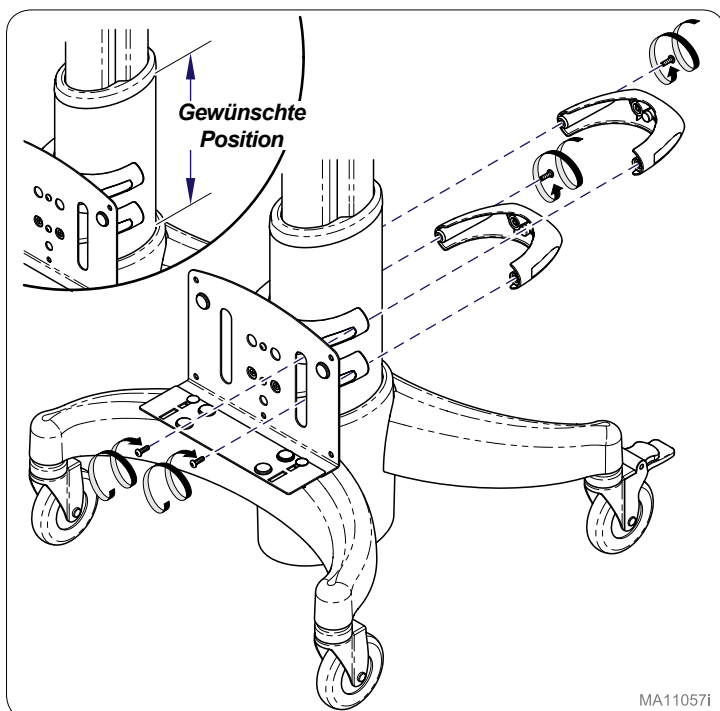


Schritt 4:

Abdeckkappe der Montagmanschette (2) eindrücken.

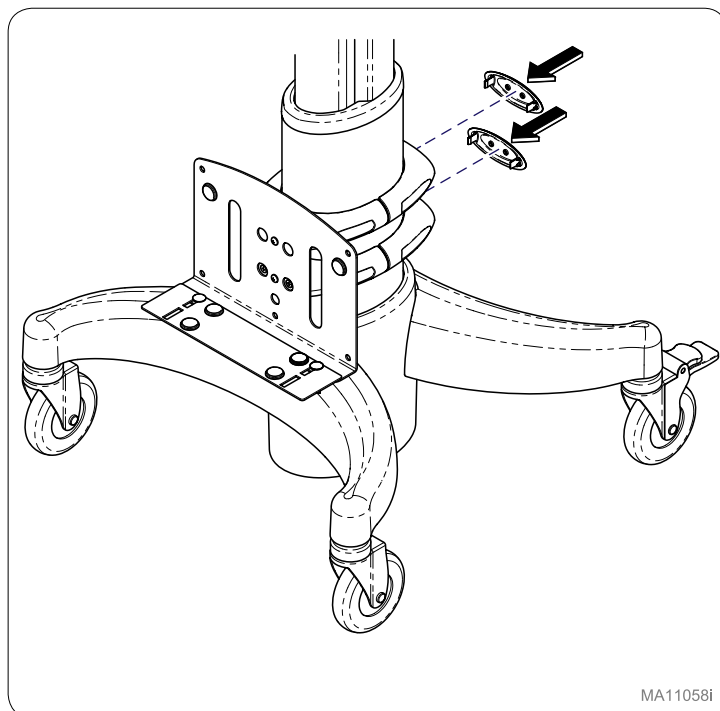


Schritt 5:

Die äußere Platte mit den Schrauben (2) und Knöpfen (2) lose auf der innenliegenden Platte anbringen, die Knöpfe (4) an die Breite der CPU anpassen und die Knöpfe (4) festziehen.

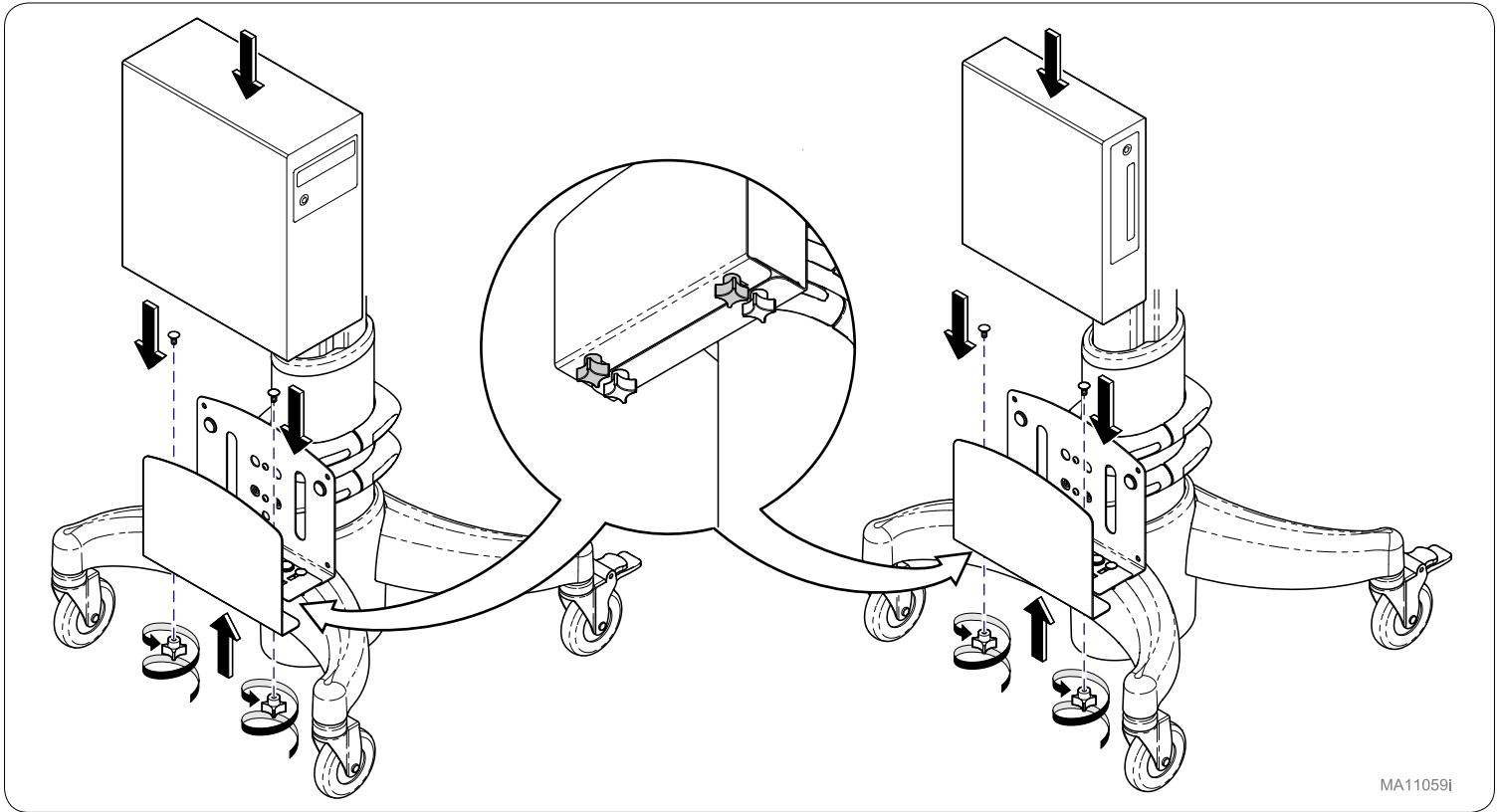


Schritt 6:

(Gegebenenfalls) Verlängerungsplatte für dünne CPU entfernen.

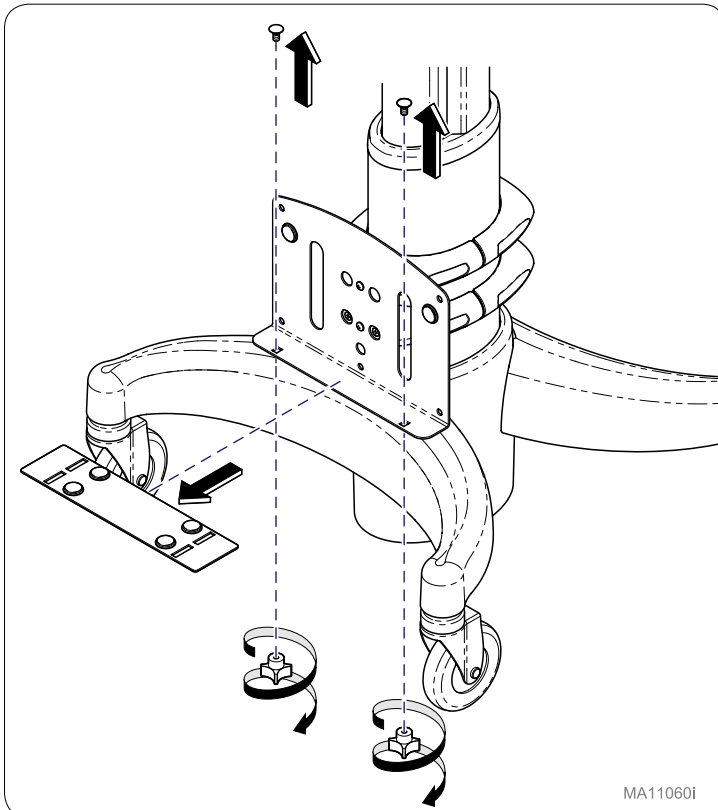

Schritt 7:

Die äußere Platte mit den Schrauben (2) und Knöpfen (2) lose auf der innenliegenden Platte installieren, die Knöpfe (2) an die Breite der CPU anpassen und die Knöpfe (2) festziehen.

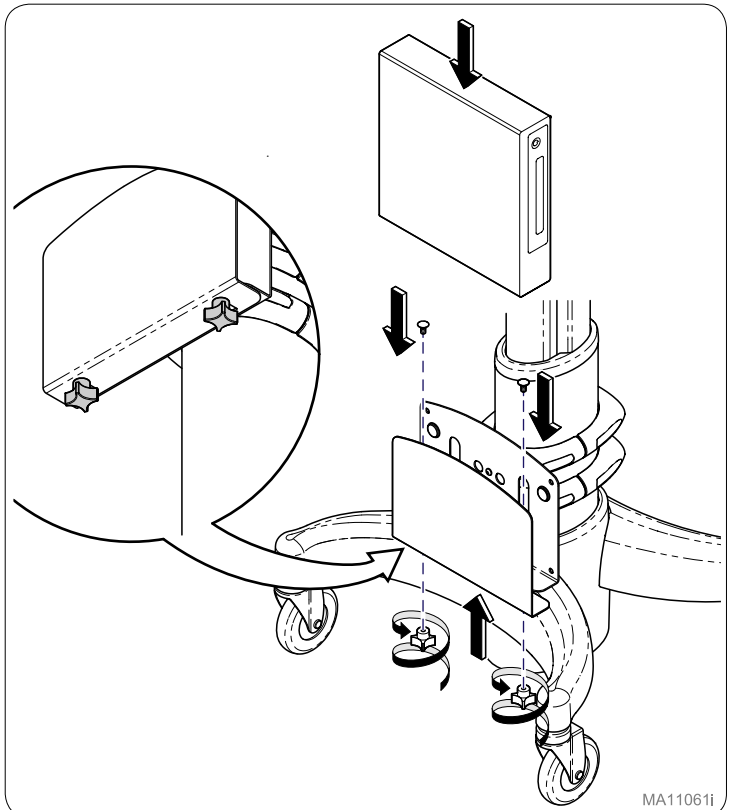


Support pour CPU [9A663001]




Étape 1 :

Retirer les boutons et les boulons de la protection extérieure du support pour CPU et retirer la protection.

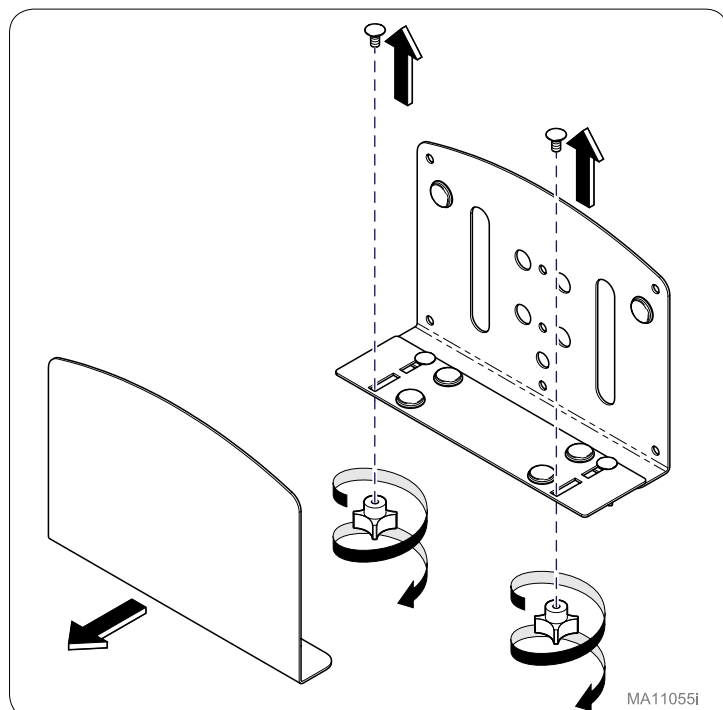


Étape 2 :

Installer l'unité de collier sur la protection intérieure du support pour CPU avec des vis (2).

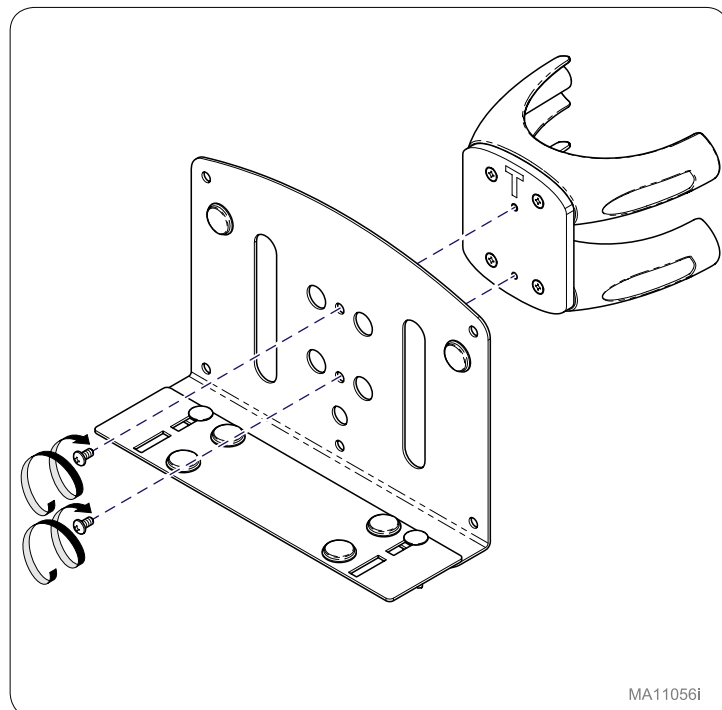


Étape 3 :

Installer l'unité de collier et la protection intérieure du support pour CPU sur la colonne avec le collier de montage (2) et les vis (2) à la position souhaitée.

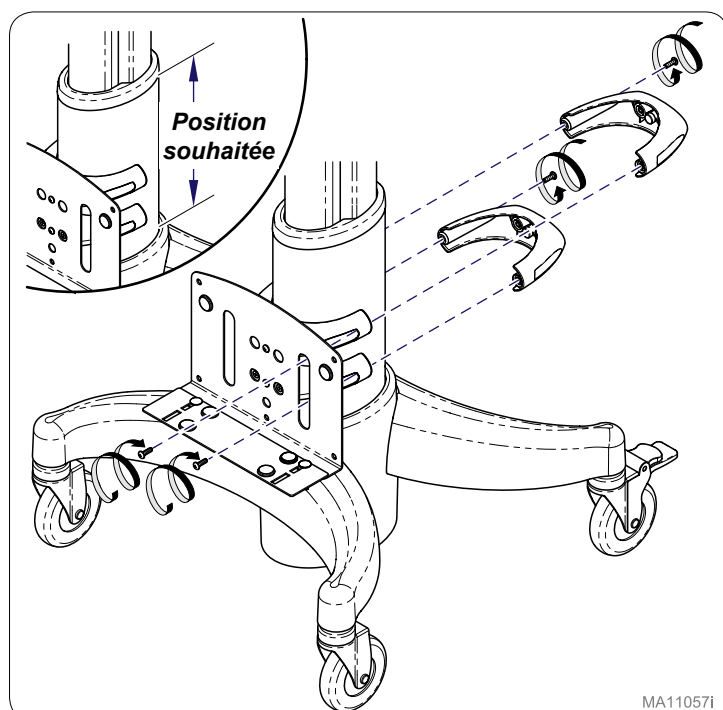


Étape 4 :

Insérer le couvercle du collier de montage (2).

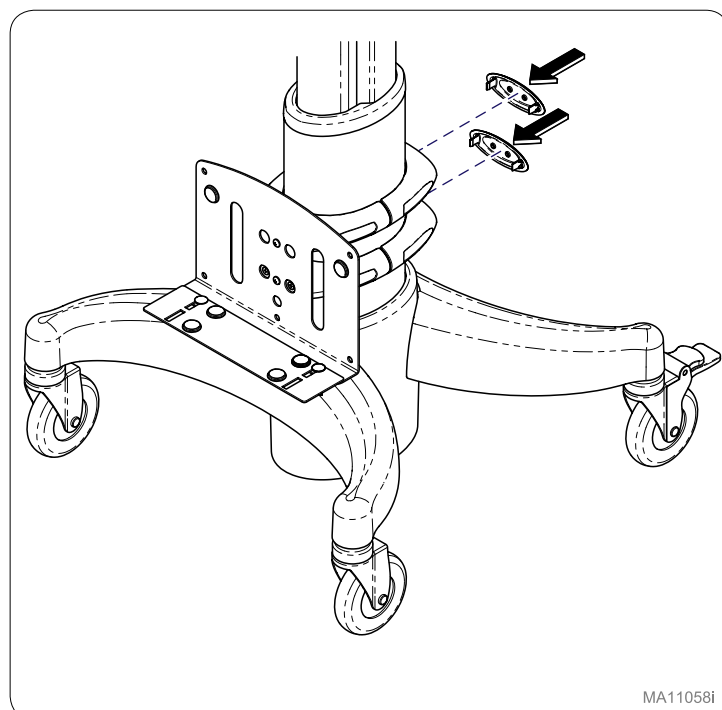

Étape 5 :


Installer la protection extérieure sur la protection intérieure sans serrer les boulons (2) et les boutons (2), ajuster les boutons (4) selon la largeur de la CPU et serrer les boutons (4).

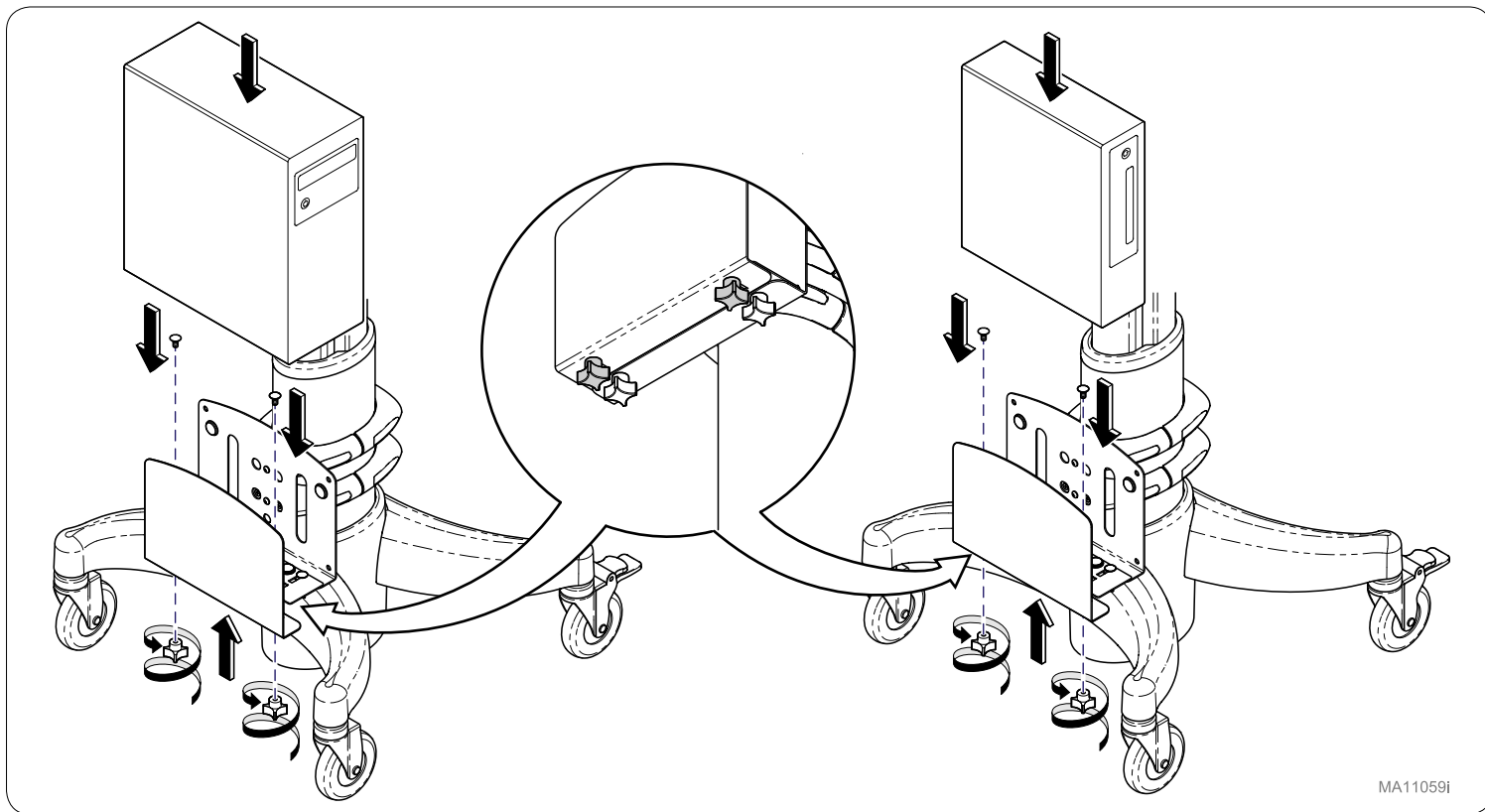

MA11059i

Étape 6 :


Retirer la plaque d'extension pour CPU mince (si nécessaire).

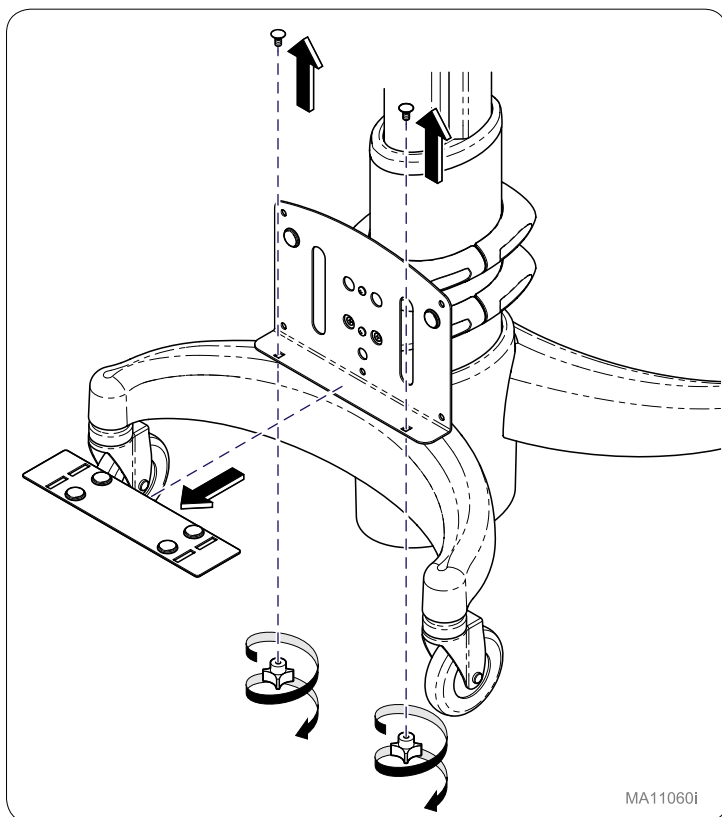

MA11060i

Étape 7 :

Installer la protection extérieure sur la protection intérieure sans serrer les boulons (2) et les boutons (2), ajuster les boutons (2) selon la largeur de la CPU et serrer les boutons (2).

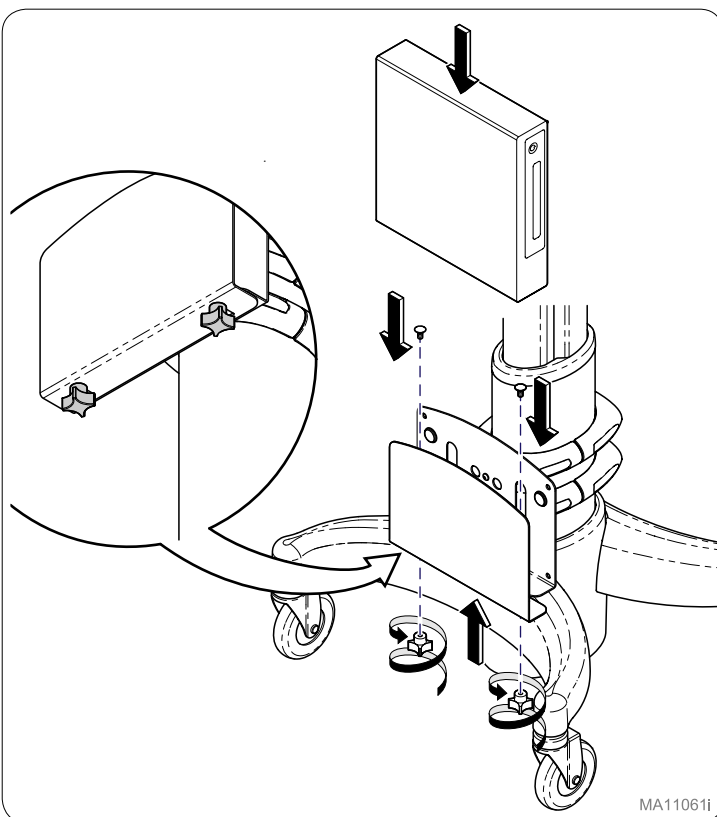


MA11061i

Soporte para CPU [9A663001]




Paso 1:

Retire las perillas y los pernos del protector exterior del soporte para CPU y extráigalo.

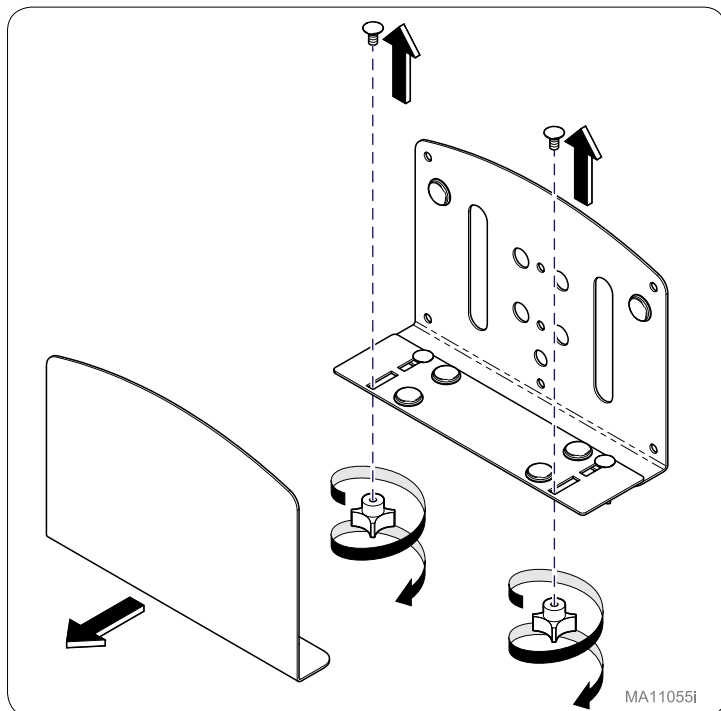


Paso 2:

Instale la abrazadera-soporte en el protector interior del soporte para CPU con los tornillos (2).

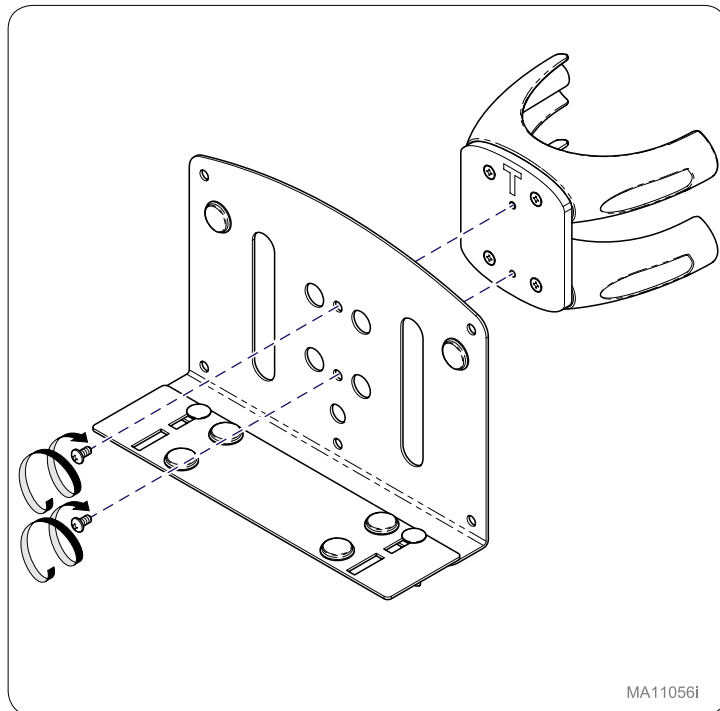


Paso 3:

Instale la abrazadera-soporte y el protector interior del soporte para CPU en la columna con el anillo de montaje (2) y los tornillos (2) en la posición deseada.

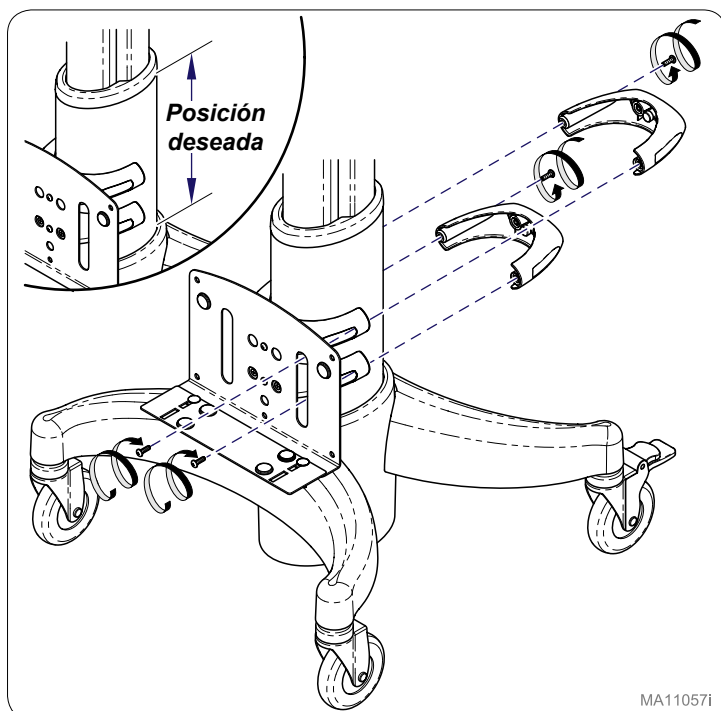


Paso 4:

Presione la cubierta del anillo de montaje (2).

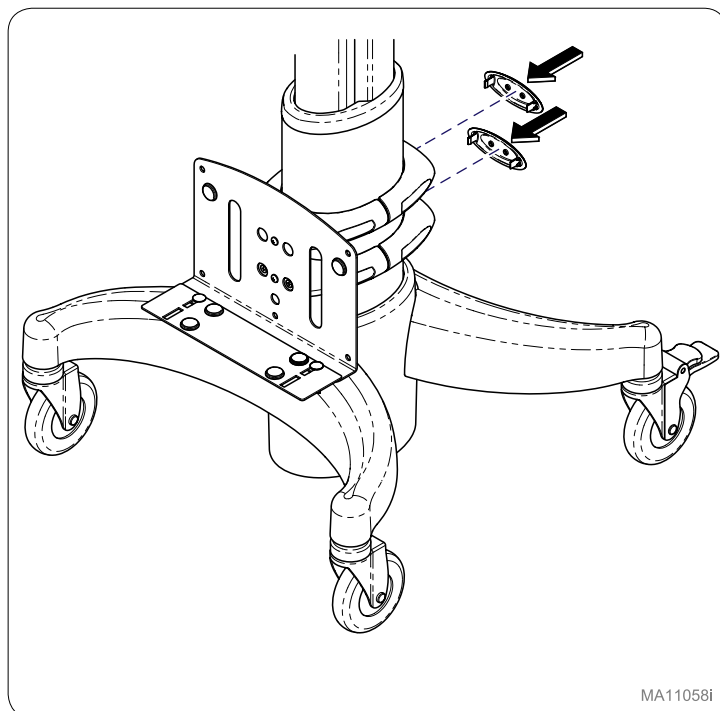


Paso 5:

Instale el protector exterior sobre el protector interior sin apretar con los pernos (2) y las perillas (2); ajuste las perillas (4) en función del ancho de la CPU y apriételas (4).

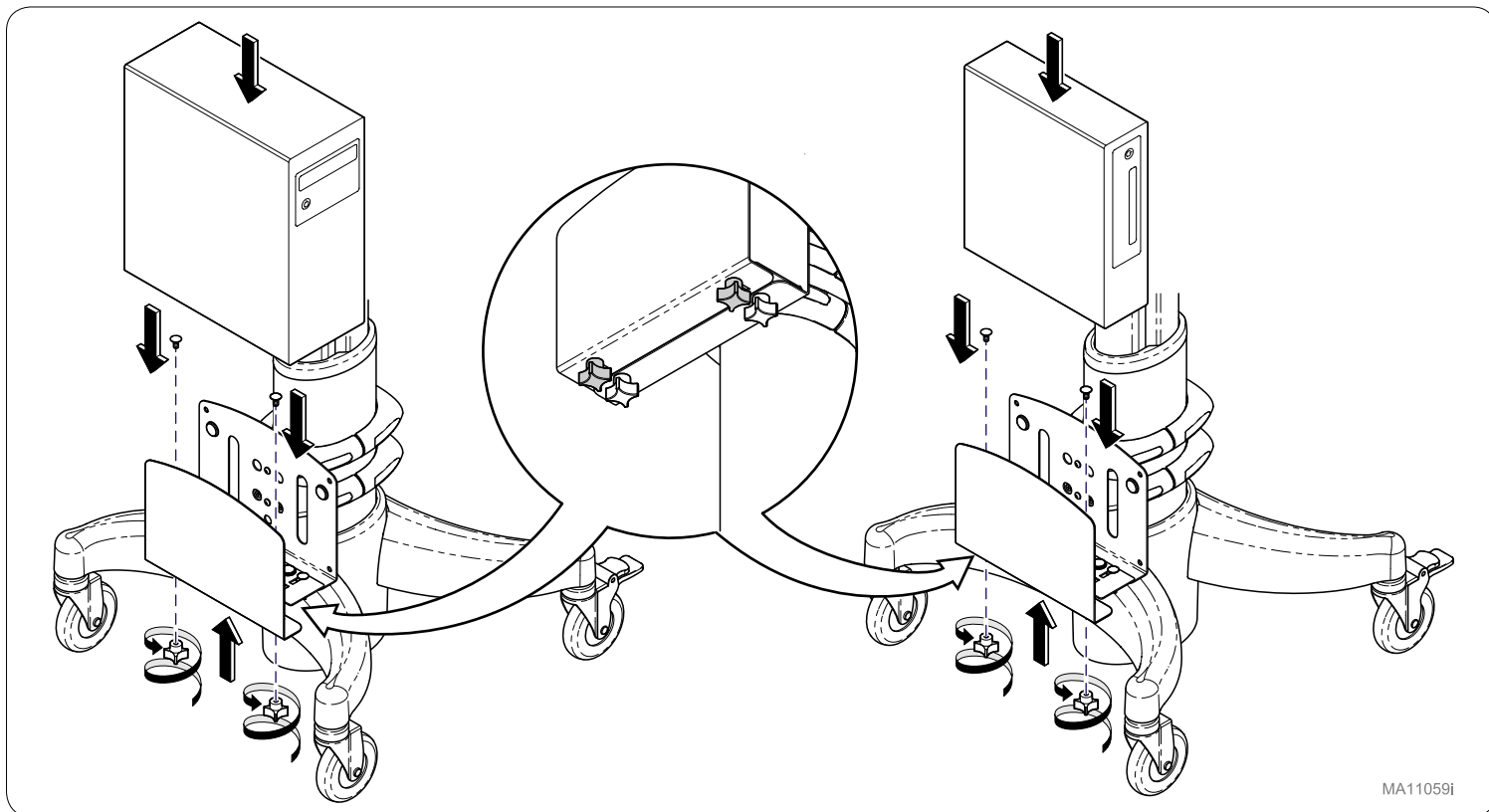**Paso 6:**

Retire la placa de extensión para la CPU estrecha (de ser necesario).

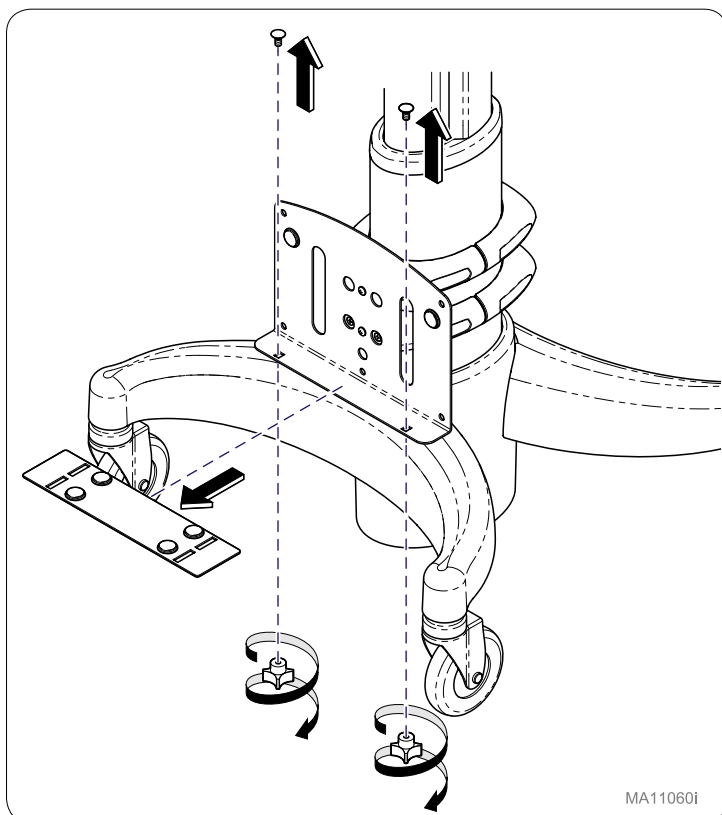**Paso 7:**

Instale el protector externo sobre el protector interno sin apretar con los pernos (2) y las perillas (2); ajuste las perillas (2) en función del ancho de la CPU y apriételas (2).

