



Step 1:

- A) Place the seat section on the chair insuring that the front is up against the seat plate and centered.
- B) Press on seat section firmly to secure.

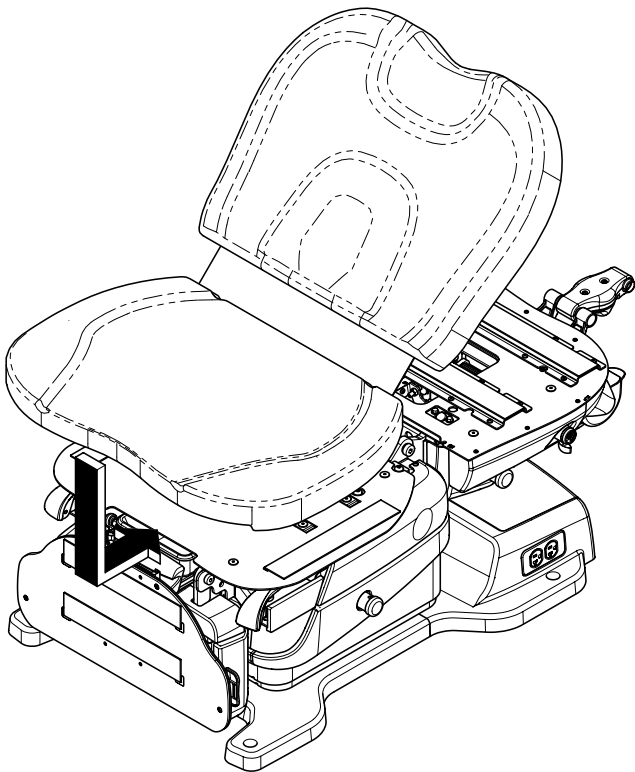


Step 2:

- A) Raise back section fully up to engage the upholstery to the top of the back plate.
- B) Press on back section firmly to secure.

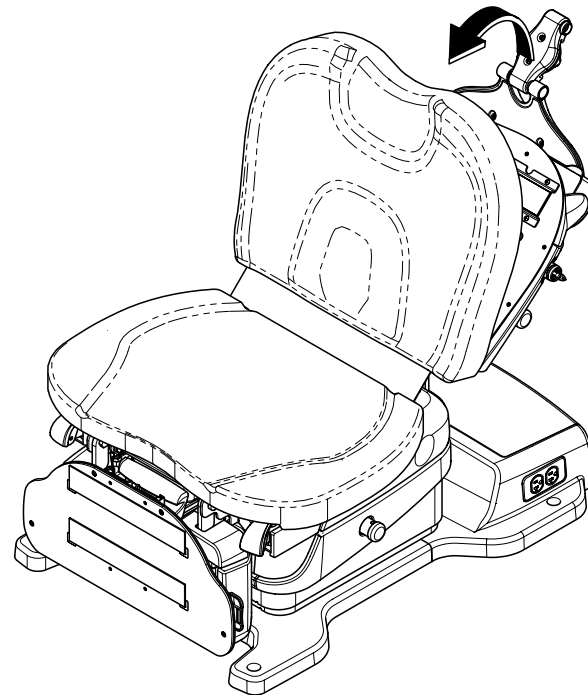


Step 3:

- A) Align hook and loop fasteners.
- B) Press down firmly.

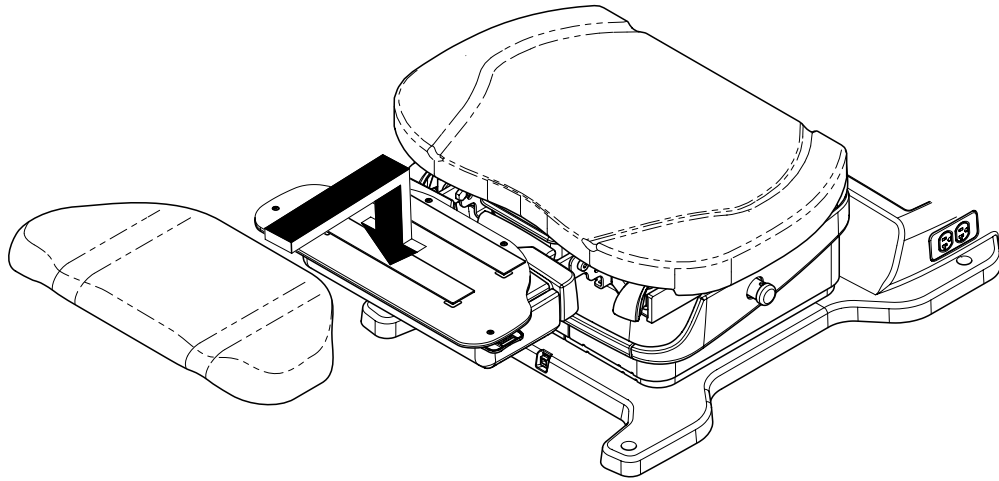


Step 4:

- A) Loosen headrest adjustment knob.
- B) Insert mounting stud into headrest fixture.
- C) Position headrest as desired.
- D) Tighten headrest adjustment knob.

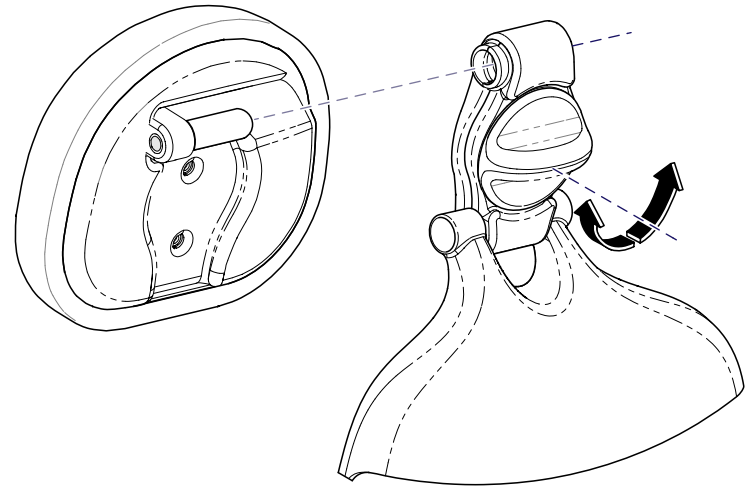


Paso 1:

- A) Coloque la sección del asiento en la silla, asegurándose de que la parte delantera esté hacia arriba contra la placa del asiento y centrada.
- B) Presione firmemente la sección del asiento para asegurarla.

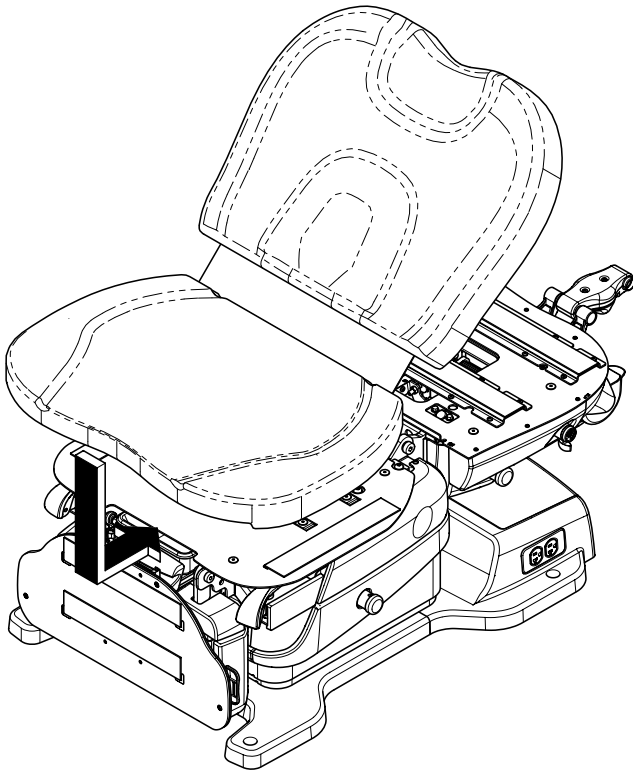
**Paso 2:**

- A) Levante la sección hacia atrás completamente hacia arriba para acoplar la tapicería a la parte superior de la placa posterior.
- B) Presione con firmeza la sección posterior para asegurarla.

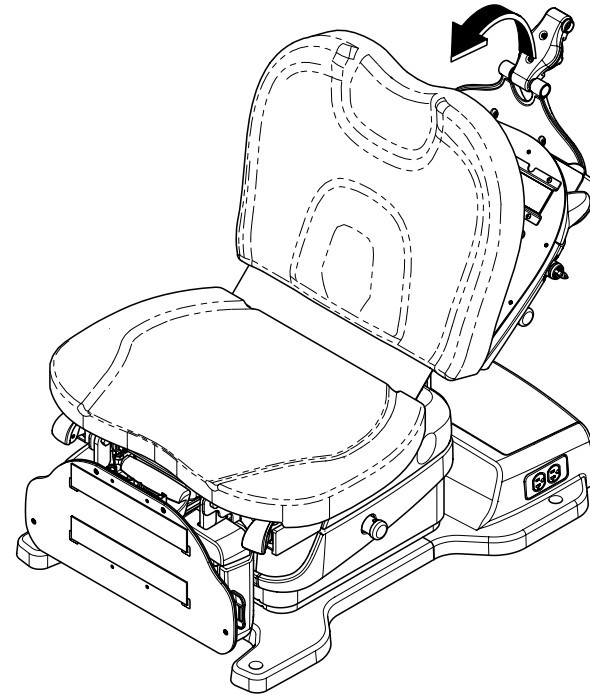


Paso 3:

- A) Alinee las sujeciones de gancho y bucle.
- B) Presione hacia abajo con firmeza.

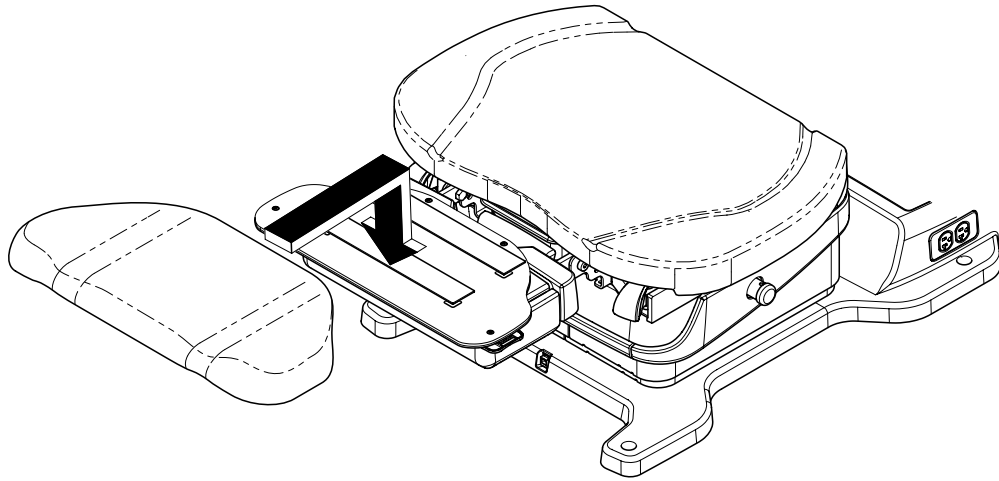


Paso 4:

- A) Afloje la perilla de ajuste del reposacabezas.
- B) Inserte el perno de montaje en la instalación del reposacabezas.
- C) Coloque el reposacabezas en la posición deseada.
- D) Apriete la perilla de ajuste del reposacabezas.

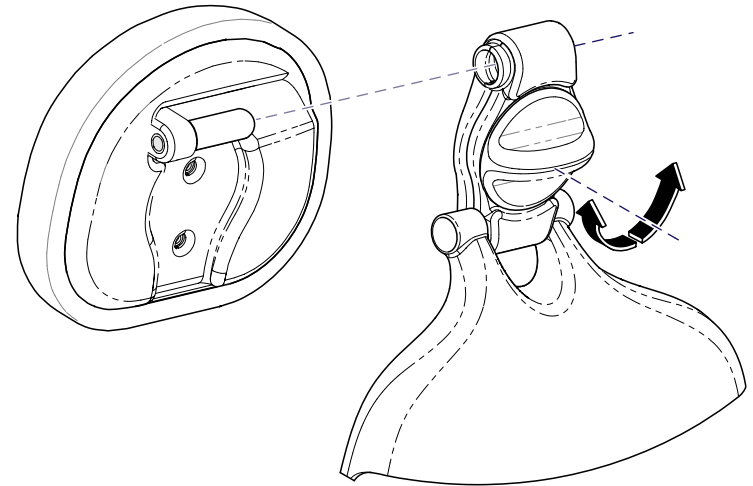


Étape 1 :

- A) Placez la section du siège sur le fauteuil en veillant à ce que l'avant soit centré contre la plaque du siège.
- B) Appuyez fermement sur la section du siège pour la fixer.

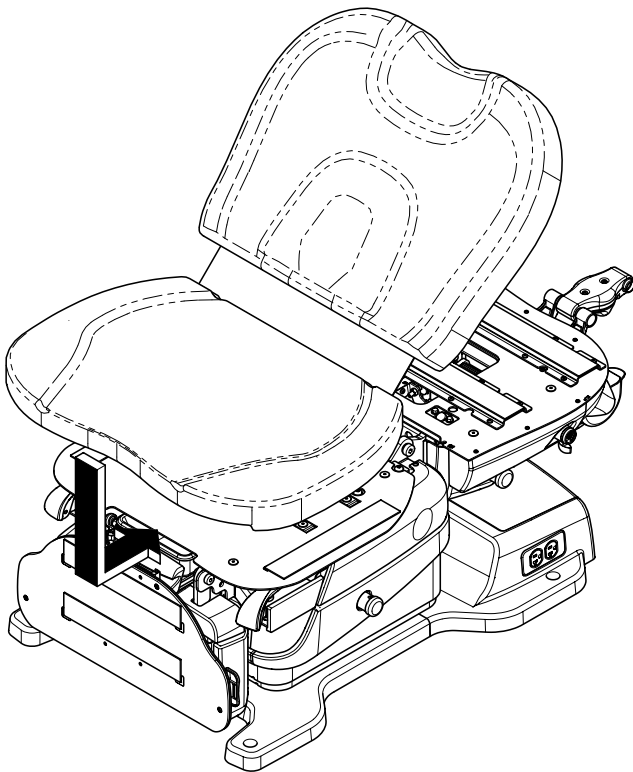


Étape 2 :

- A) Soulevez la section arrière complètement vers le haut pour engager la garniture vers le haut de la plaque arrière.
- B) Appuyez fermement sur la section arrière pour la fixer.

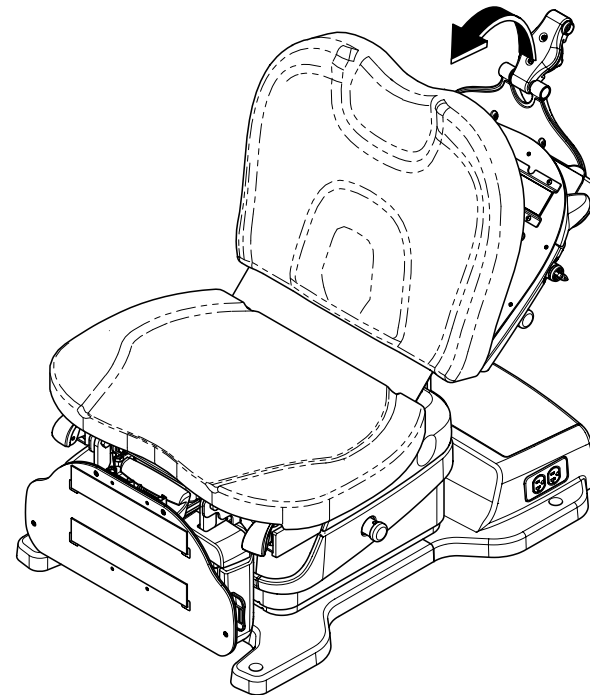

Étape 3 :

- A) Alignez le crochet et les bandes auto-agrippantes.
- B) Appuyez fermement.

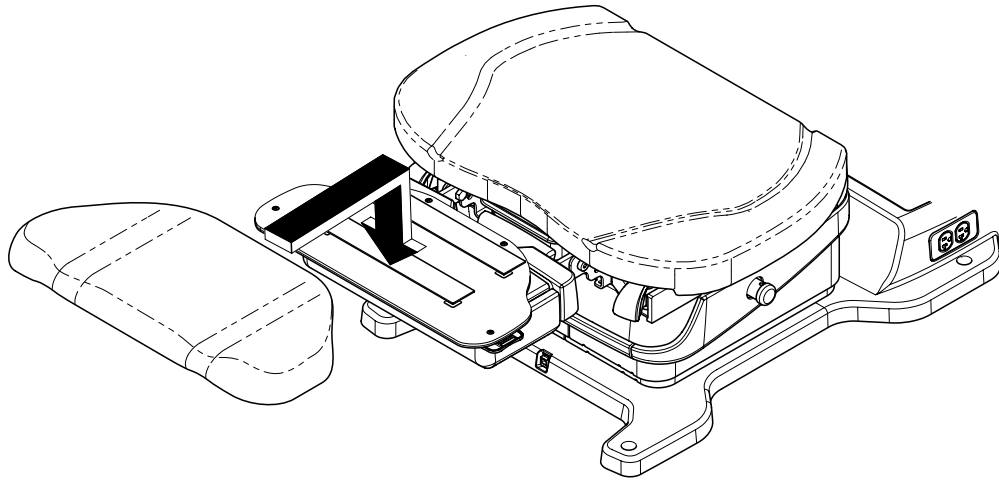

Étape 4 :

- A) Desserrez le bouton de réglage de la tête.
- B) Insérez le goujon de fixation dans l'armature de la tête.
- C) Positionnez la tête comme voulu.
- D) Serrez le bouton de réglage de la tête.

