



WARNING

This chair weighs approximately 229 kg (505 lb).
Use an assistant when lifting chair.




Equipment Alert

The minimum door clearance is 71.12 cm (28 in).
Use care in moving chair through doorways.

Step 1: Remove chair from skid...

- A) Remove four nuts and clamps.
- B) Carefully lift chair off of skid.

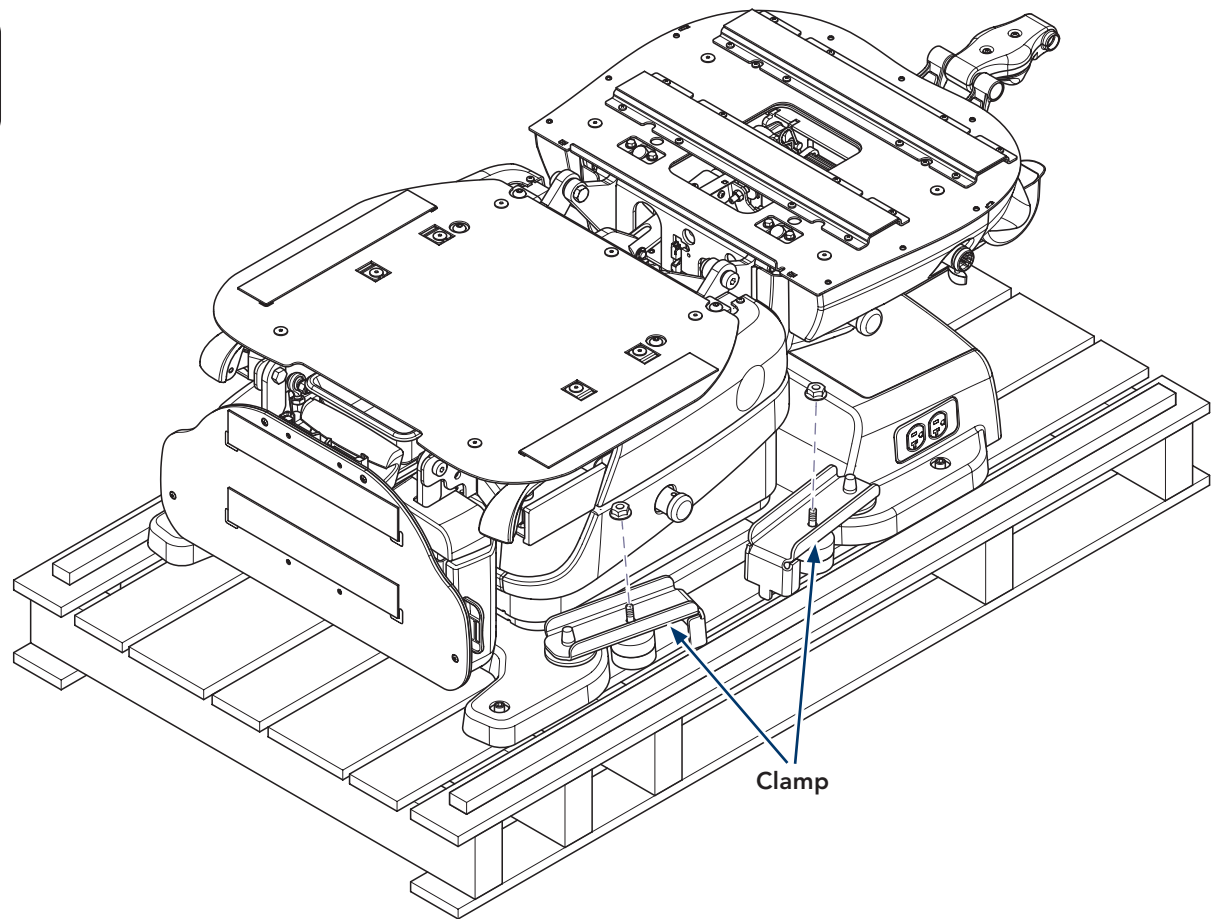



Before connecting the Midmark device power cord into an electrical power source outlet, it is recommended to contact a local licensed electrician or a local authority having jurisdiction over the internal building power distribution to verify that the device when powered up will comply with all local electrical codes. Use the electrical power rating marked on the device when determining the appropriate electrical branch circuit and outlet requirements.

Step 2: Install Hand Control Holster...

- A) Install two mounting pins and secure with thumb screws.
- B) Install holsters onto mounting pins.

Step 3: Connect Foot Control...

- A) Plug connector into modular jack at front of chair.

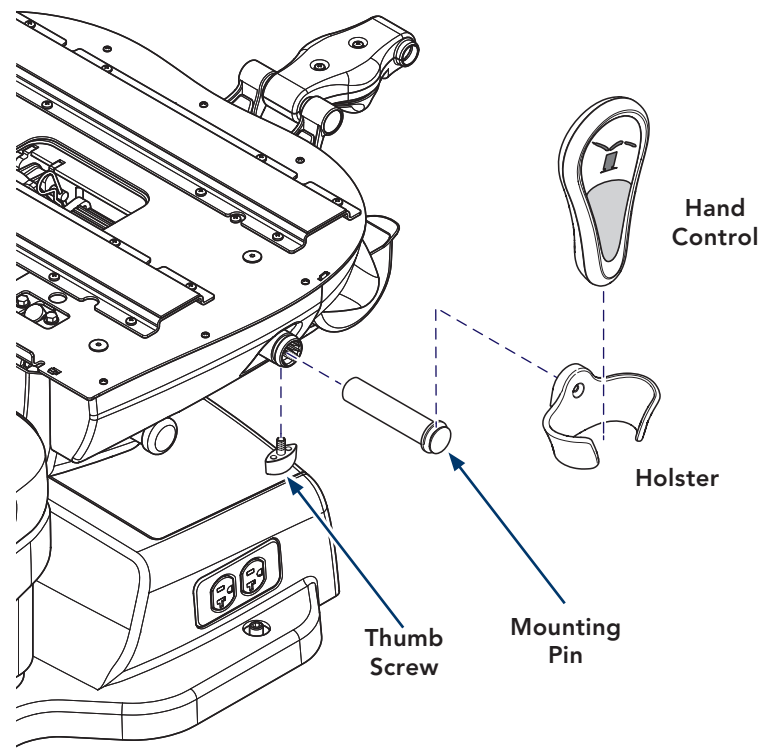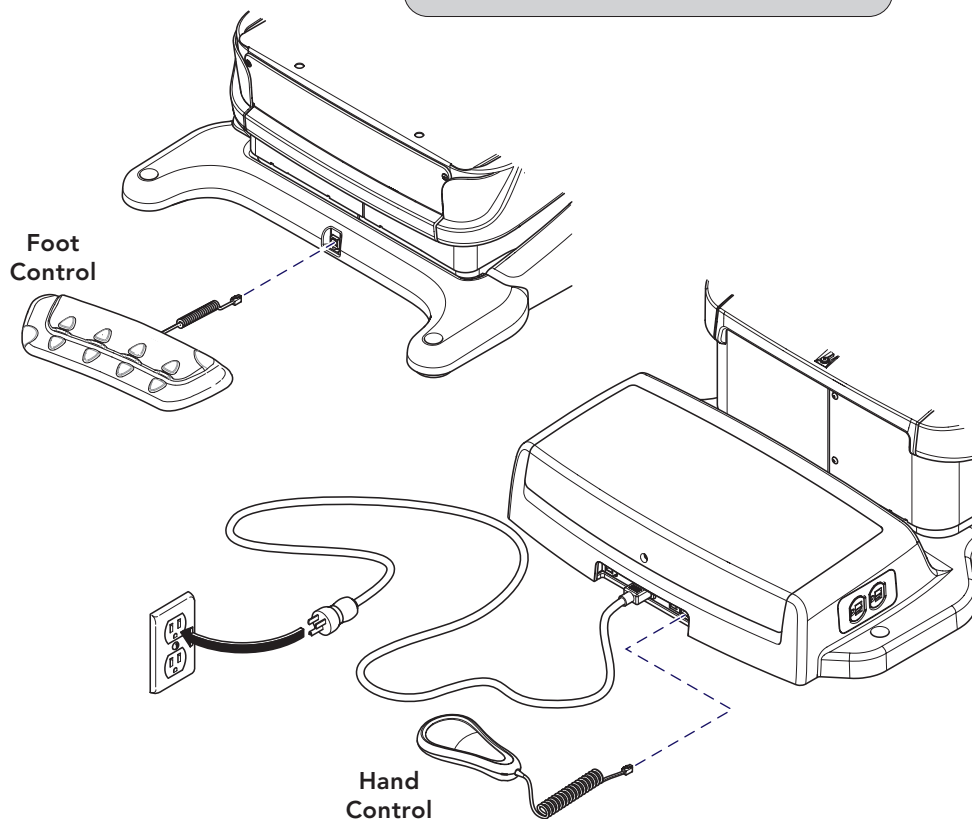

Step 4: Connect Hand Control...

- A) Plug connector into modular jack on either side of AC inlet.

Note

Chair must be positioned in normal use such that the power cords can be easily accessed to unplug.

Step 5: Connect Power Cord...

- A) Plug square end into AC inlet.
- B) Plug three pronged plug into wall outlet.



Equipment Alert



The chair must be leveled to ensure proper operation.

Step 6: Level the chair...

- A) Using a level and Allen wrench, adjust leveling screws as necessary.
- B) Install four hole plugs.

Step 7: Remove foam supports...

- A) Remove two foam blocks from behind the footrest handles.
- B) Remove four base shroud supports.

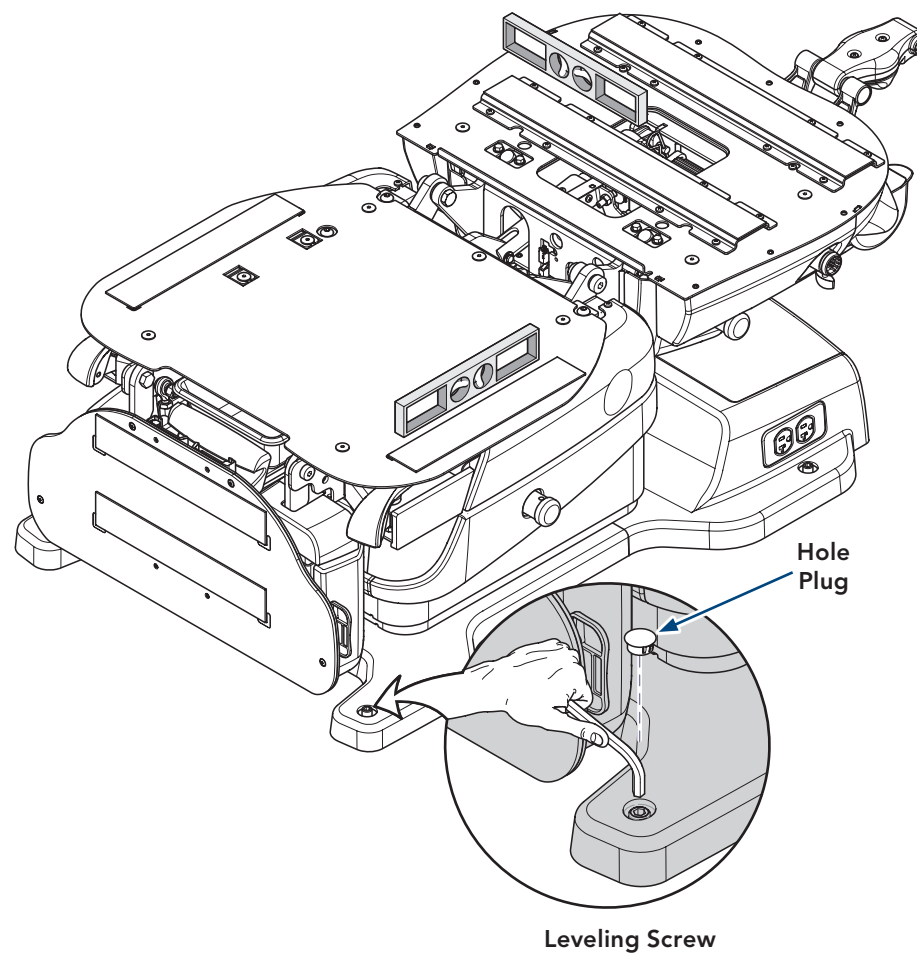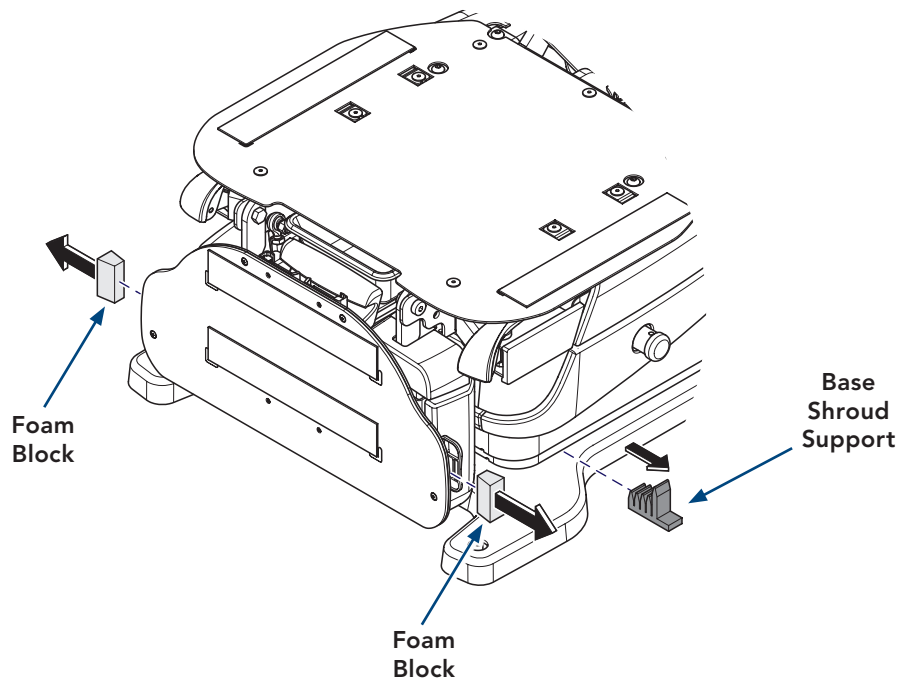

Step 8: Verify proper operation...

A) Use the foot control to activate the following functions:

Base UP / DOWN
Back UP / DOWN
Tilt UP / DOWN
Foot UP / DOWN
Quick Chair™
Home


B) Activate the HOME function again. While the chair is moving, press the STOP button. (All movement should stop).

C) Repeat A and B using the hand control.

Note: The Quick Chair™ feature is on the foot control only.

Note

If a malfunction is detected, contact Midmark Technical Service by calling: 1.800.MIDMARK

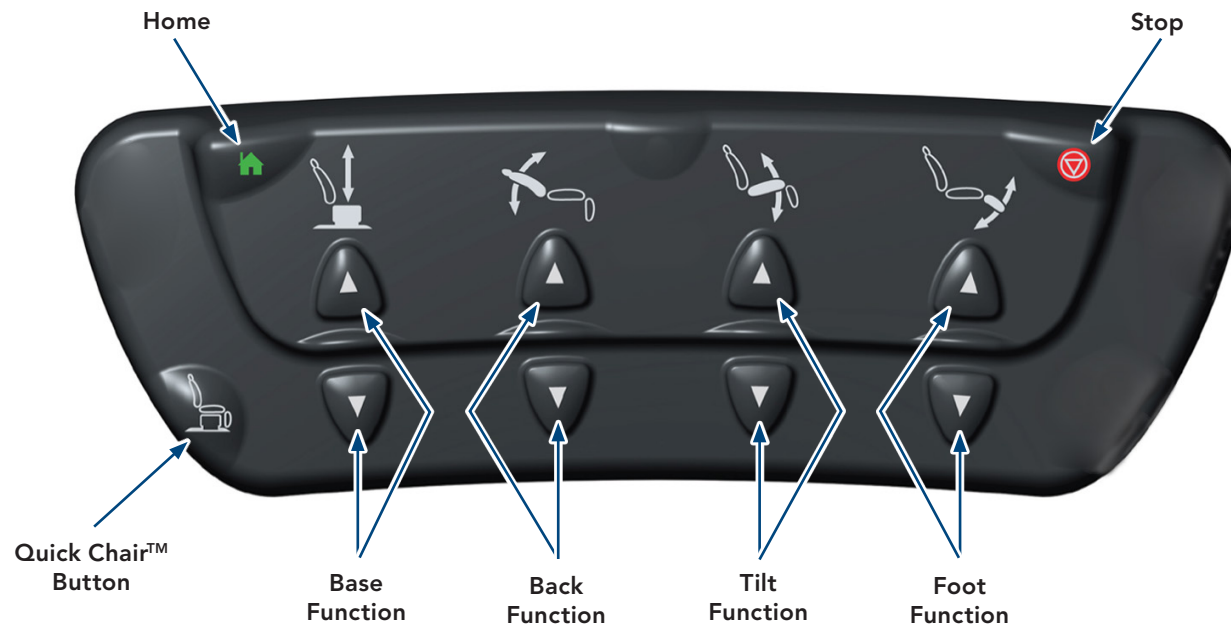

Step 9: Install upholstered top (not shown)

Note: Set Up instructions are packaged with the upholstery.



ADVERTENCIA

Esta silla pesa aproximadamente 229 kg (505 lb). Pida ayuda a otra persona para levantar la silla.




Advertencia sobre el equipo

El espacio mínimo de la puerta es de 71,12 cm (28 in.). Tenga cuidado al mover la silla a través de las puertas.

Paso 1: Saque la silla de la plataforma...

A) Retire cuatro tuercas y abrazaderas.

B) Con cuidado, eleve la silla de la plataforma.

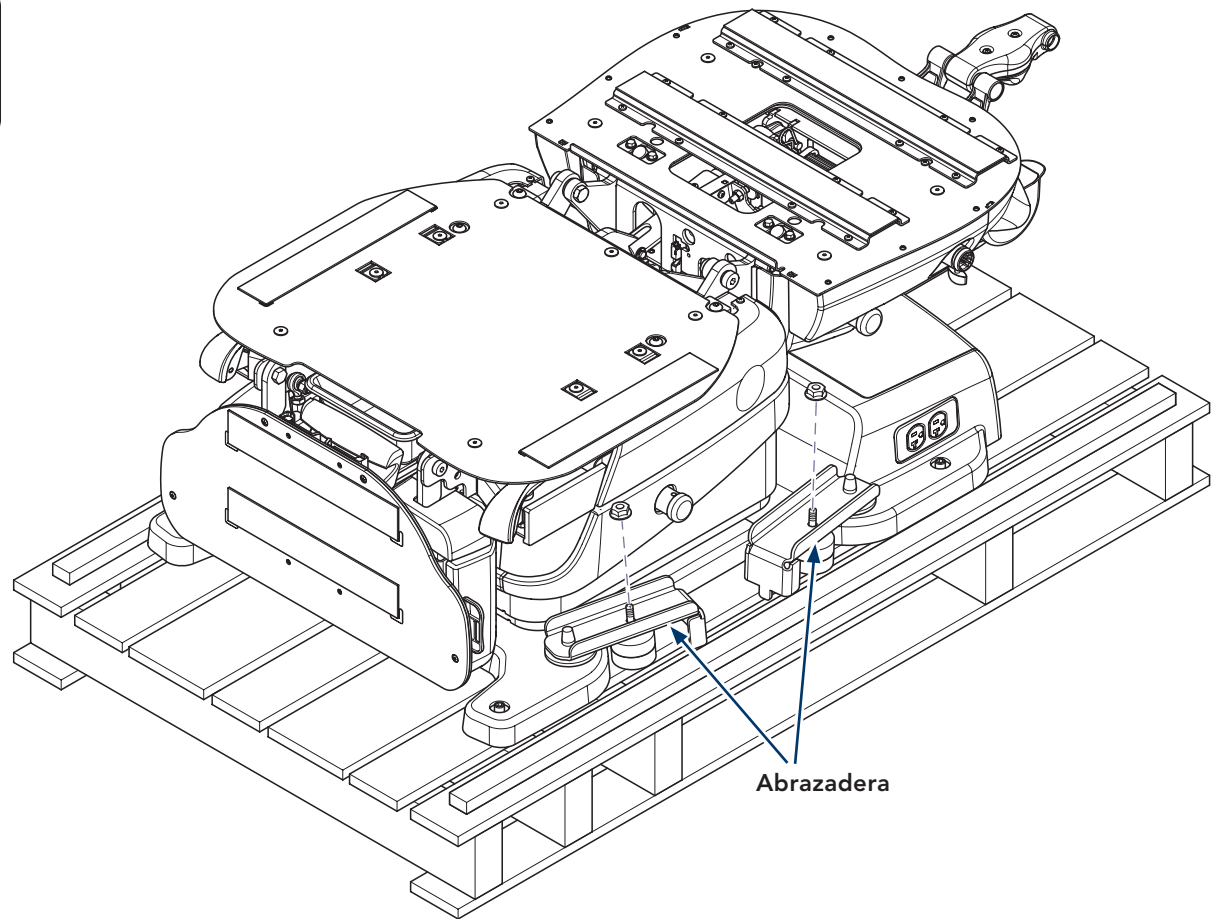

Abrazadera



Antes de conectar el cable de alimentación del dispositivo Midmark a una fuente de alimentación eléctrica, se recomienda contactar con un electricista local autorizado o una autoridad local que tenga jurisdicción sobre la distribución de energía interna del edificio para verificar que, al conectar el dispositivo, este cumple con todos los códigos eléctricos locales. Utilice la potencia eléctrica marcada en el dispositivo para determinar cuáles son los circuitos eléctricos derivados apropiados y los requisitos de salida.

Paso 2: Instale el soporte del control manual...

- A) Instale dos pasadores de montaje y asegúrelos con tornillos de mariposa.
- B) Instale los soportes en los pasadores de montaje.

Paso 3: Conecte el pedal de control...

- A) Enchufe el conector en la clavija modular de la parte frontal de la silla.

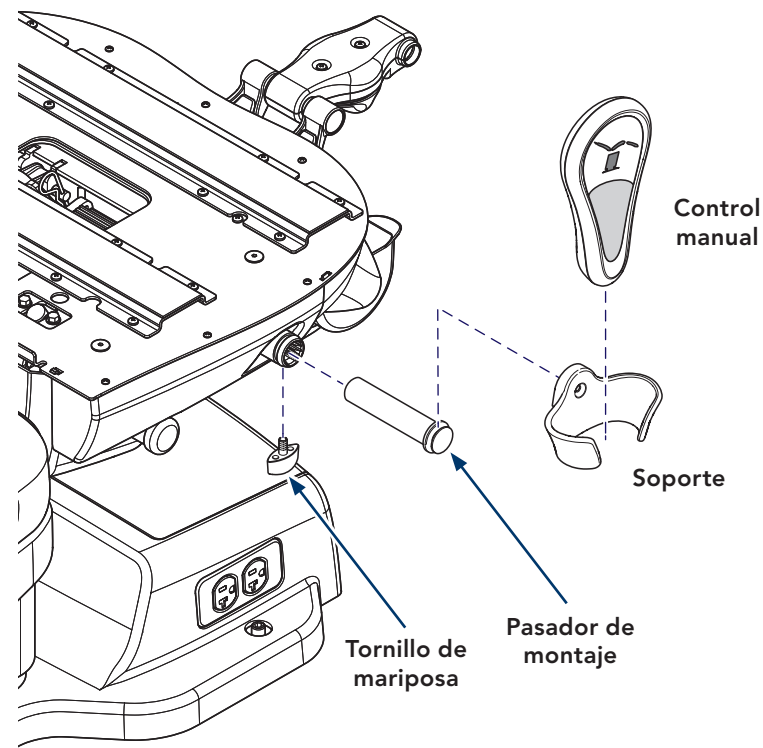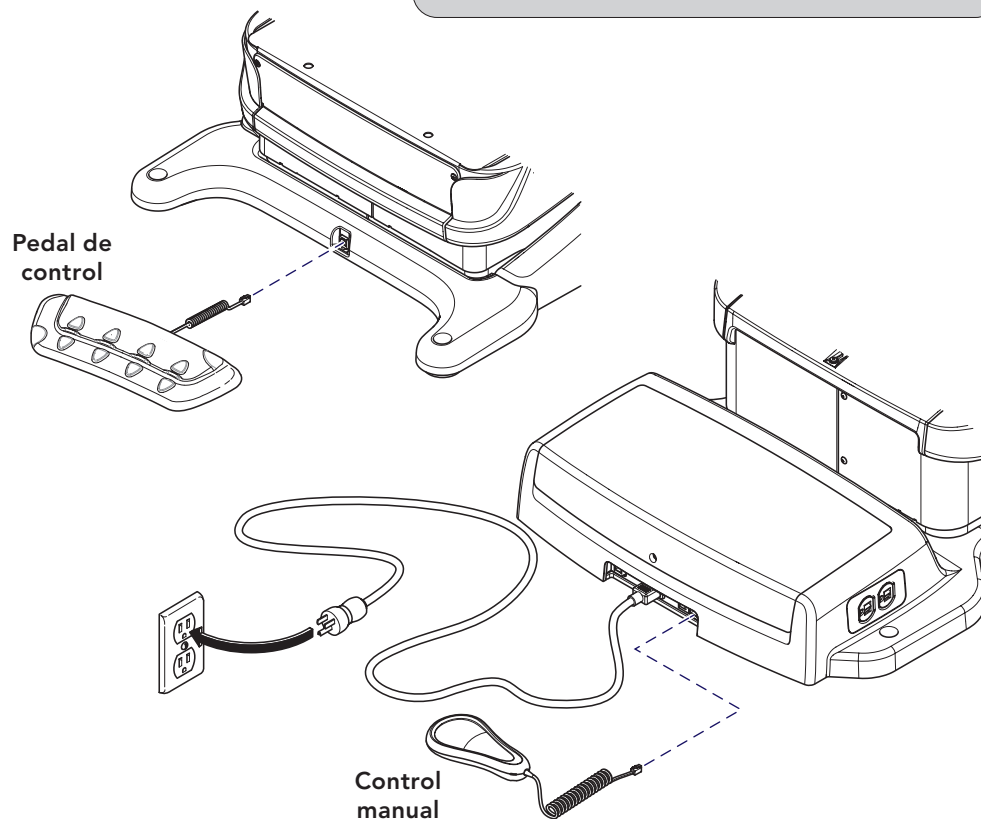

Paso 4: Conecte el control manual...

- A) Enchufe el conector en la clavija modular a cada lado de la entrada de CA.

Nota

La silla, en uso normal, se debe ubicar de tal forma que se pueda acceder con facilidad a los cables de alimentación para desenchufarlos.

Paso 5: Conecte el cable de alimentación...

- A) Enchufe el extremo cuadrado en la entrada de CA.
- B) Conecte el enchufe con tres clavijas en una toma de la pared.



Advertencia sobre el equipo

La silla debe estar nivelada o fija para garantizar su correcto funcionamiento.

Paso 6: Nivele la silla...



A) Con un nivel y la llave allen, ajuste los tornillos de nivelación según sea preciso.

B) Instale cuatro tapones de agujeros.

Paso 7: Retire los soportes de espuma...

A) Retire los dos bloques de espuma ubicados detrás de las manijas del reposapiés.

B) Retire los cuatro soportes de la cubierta de la base.

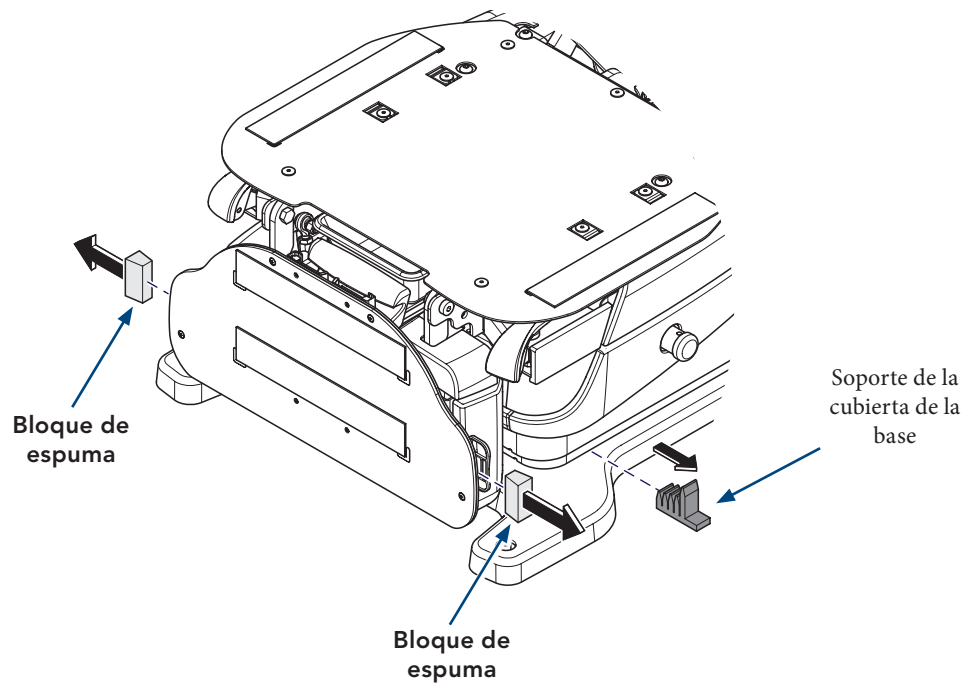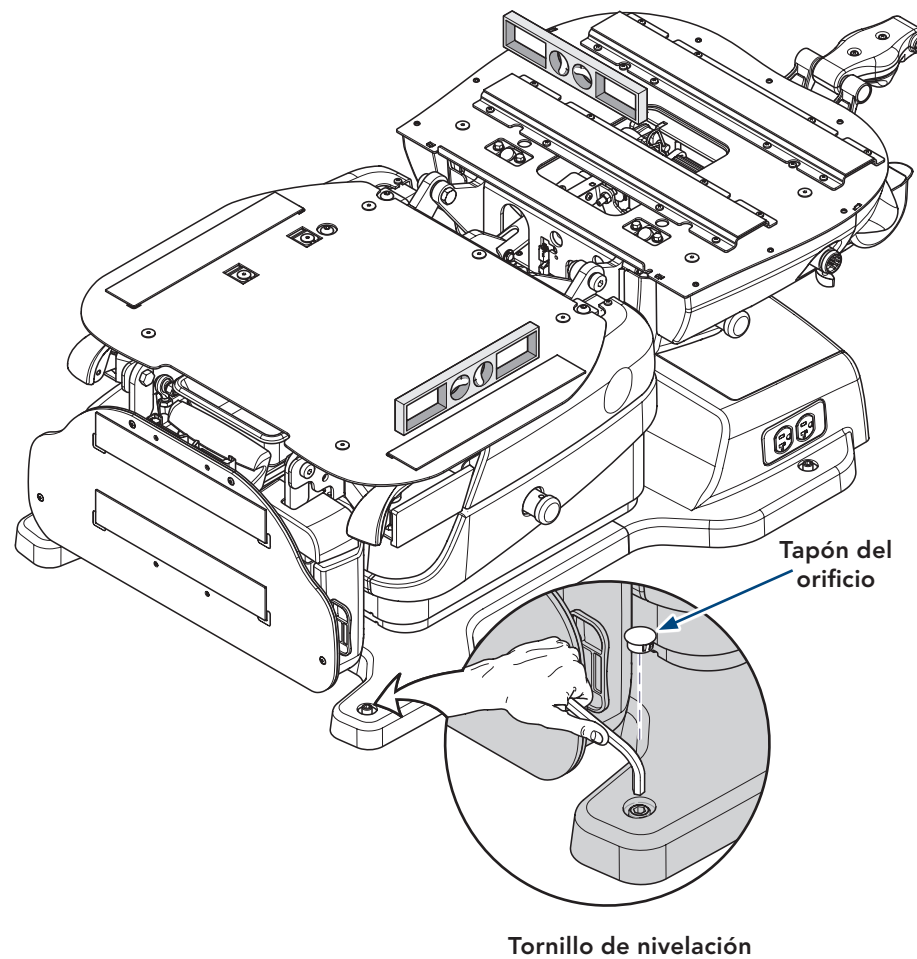

Paso 8: Compruebe que el funcionamiento sea correcto...

A) Utilice el pedal de control para activar las siguientes funciones:

- Subir/bajar la base
- Subir/bajar el respaldo
- Subir/bajar la inclinación
- Subir/bajar el reposapiés
- Quick Chair™
- Inicio


B) Active otra vez la función de inicio. Mientras se esté moviendo el sillón pulse el botón de detener. (Debe detenerse por completo el movimiento).

C) Repita los pasos A y B utilizando el control manual.

Nota: La función Quick Chair™ está solo en el pedal de control.

Nota

Si detecta algún fallo de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico de Midmark llamando al número: 1.800.MIDMARK

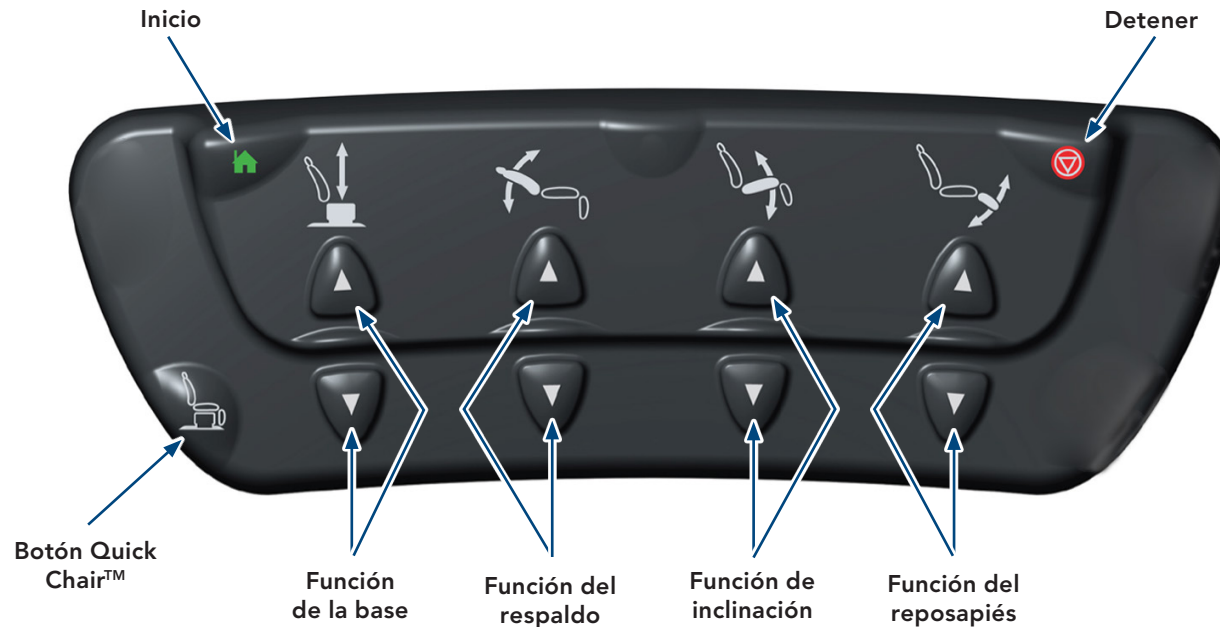

Paso 9: Instale la parte superior tapizada (no se muestra)

Nota: Las instrucciones de instalación vienen en el embalaje de la tapicería.



AVERTISSEMENT

Ce fauteuil pèse environ 229 kg (505 lb). Utilisez un assistant pour soulever le fauteuil.




Avertissement concernant l'équipement

Le dégagement minimum de la porte est de 71,12 cm (28 po). Il faut agir avec précaution au moment de franchir une porte avec le fauteuil.

Étape 1 : Retirez le fauteuil de la palette...

- A) Retirez quatre écrous et pattes de serrage.
- B) Soulevez délicatement le fauteuil de la palette.

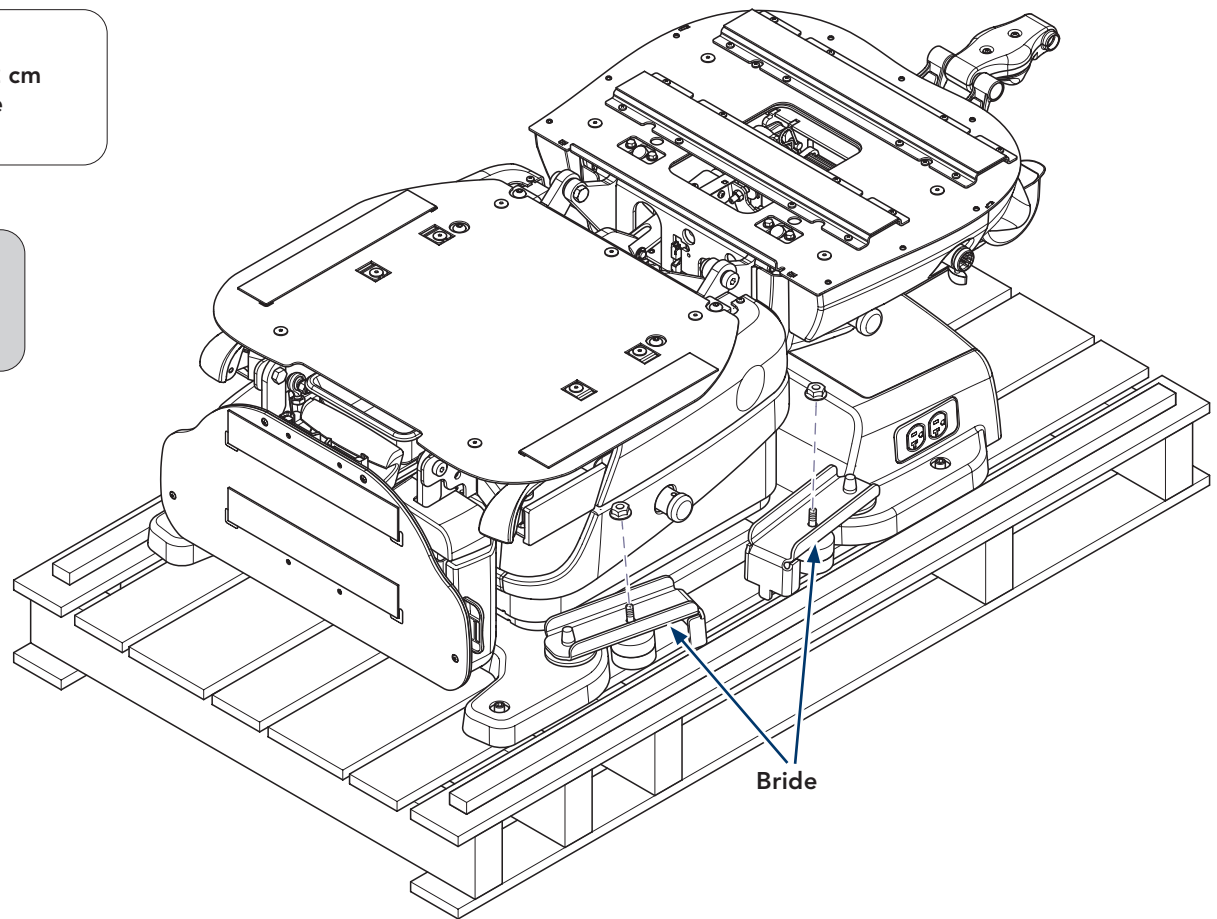



Avant de brancher le cordon d'alimentation de l'appareil Midmark à une prise électrique, il est recommandé de contacter un électricien agréé de votre localité ou une autorité locale compétente en matière de distribution électrique interne dans les bâtiments pour vérifier que l'appareil, une fois sous tension, sera conforme à tous les codes électriques locaux. Utilisez la puissance nominale indiquée sur l'appareil lors de la détermination de l'alimentation électrique appropriée pour le circuit de dérivation et la prise.

Étape 2 : Installez l'étui de la commande manuelle...

- A) Installez deux broches de montage et fixez-les à l'aide de vis de serrage.
- B) Placez les étuis sur les broches de montage.

Étape 3 : Connectez la pédale de commande...

- A) Branchez le connecteur dans la prise modulaire située à l'avant du fauteuil.

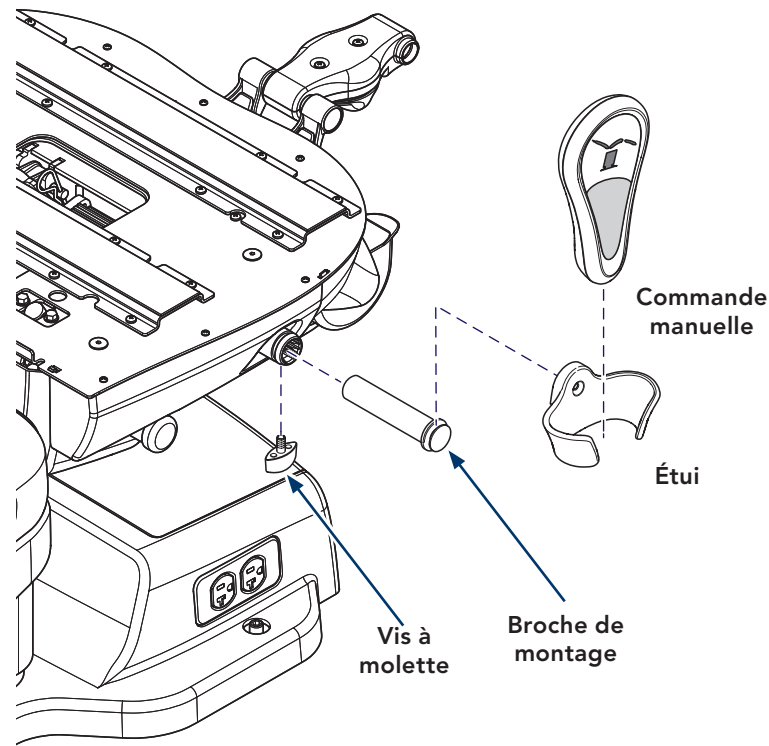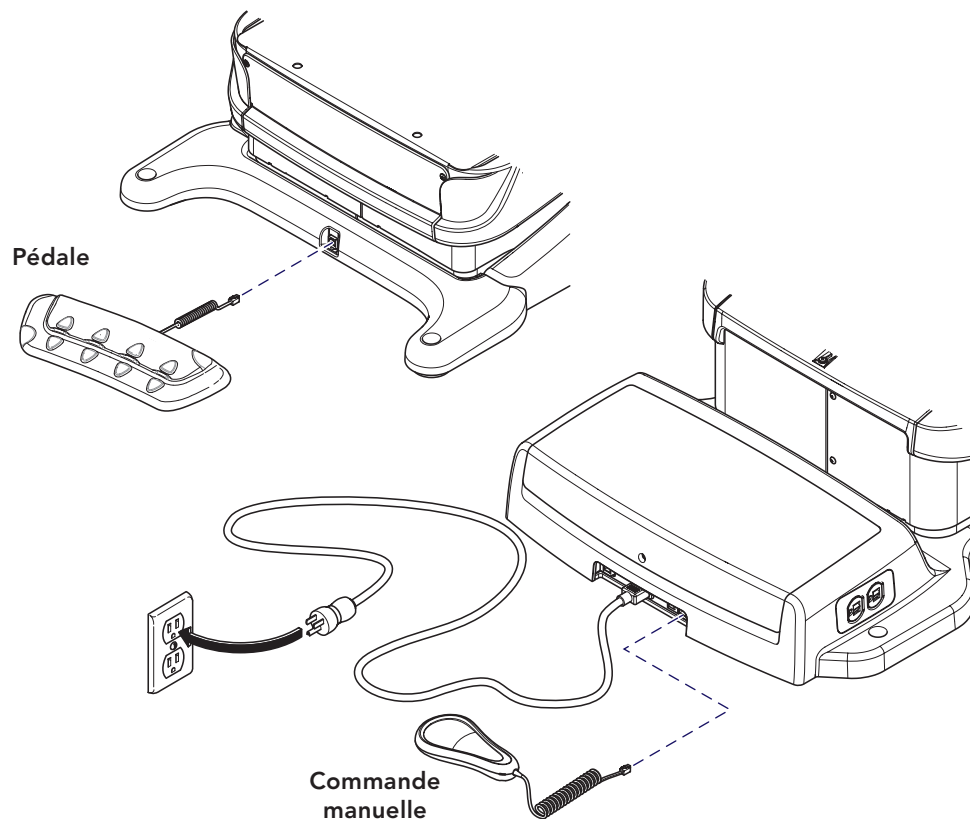

Étape 4 : Connectez la pédale de commande...

- A) Branchez le connecteur dans la prise modulaire située sur l'un des côtés de l'entrée AC.

Remarque

Dans le cadre d'une utilisation normale, le fauteuil doit être installé de façon à permettre un accès aisé aux cordons d'alimentation afin de les débrancher.

Étape 5 : Branchez le cordon d'alimentation...

- A) Branchez l'extrémité carrée dans l'entrée AC.
- B) Branchez la fiche à trois broches dans la prise murale.



Avertissement concernant l'équipement



Pour garantir le bon fonctionnement du fauteuil, il doit être mis à niveau.

Étape 6 : Mettez le fauteuil à niveau...

- A) À l'aide d'un niveau et d'une clé Allen, ajustez les vis de mise à niveau si besoin.
- B) Installez quatre caches de prise.

Étape 7 : Retirez les supports en mousse...

- A) Retirez les deux blocs de mousse derrière les poignées des repose-pieds.
- B) Déposez les quatre supports des revêtements de l'assise

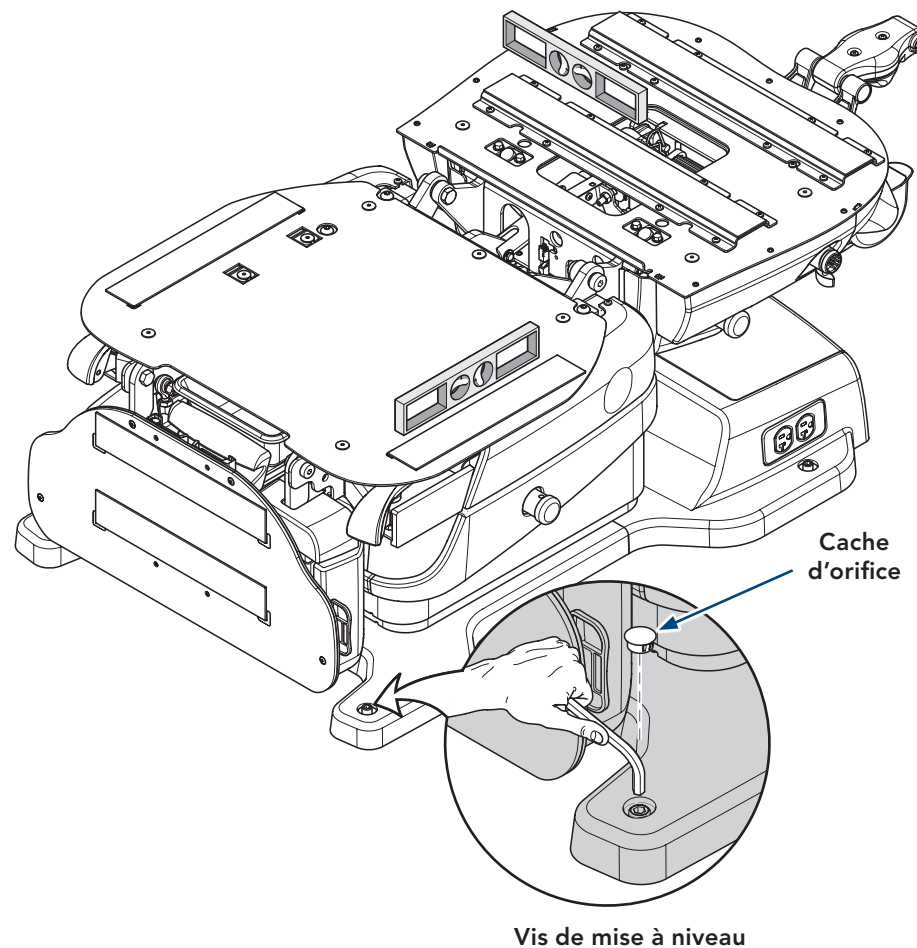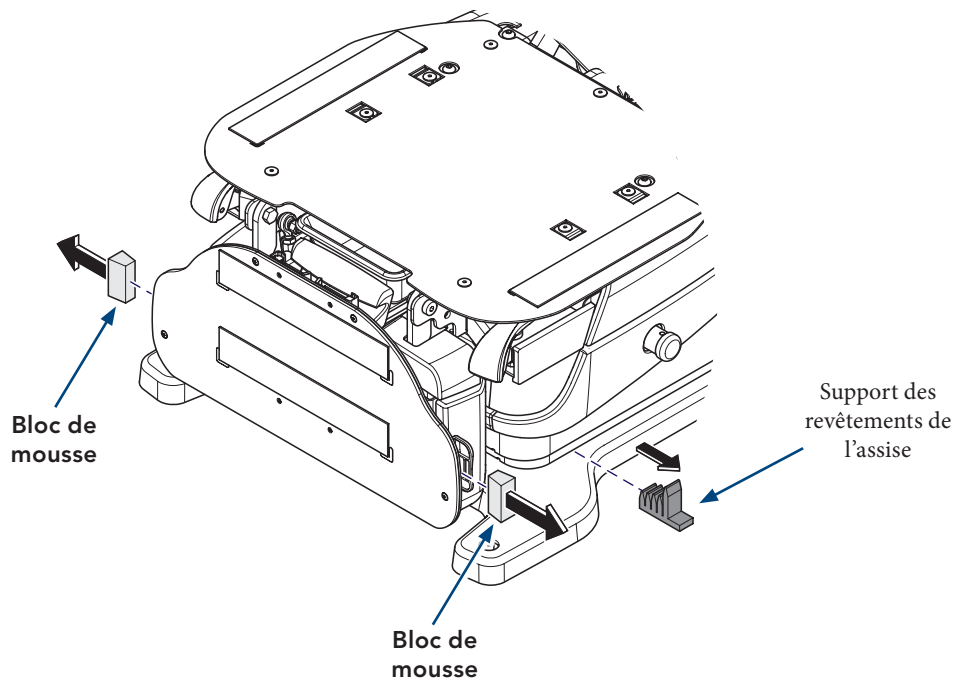

Étape 8 : Vérifiez le bon fonctionnement...

A) Utilisez la pédale de commande pour activer les fonctions suivantes :

- Relevage/Abaissement de l'assise
- Relevage/Abaissement du dossier
- Inclinaison vers le haut/vers le bas
- Relevage / Abaissement du repose-pieds
- Quick Chair™
- Accueil


B) Activez à nouveau la fonction ORIGINE. Pendant que la chaise est en mouvement, appuyez sur le bouton STOP. (tout mouvement doit cesser).

C) Répétez A et B à l'aide de la commande manuelle.

Remarque : La fonction Quick Chair™ se trouve sur la commande au pied uniquement.

Remarque

En cas de dysfonctionnement, contacter le service technique de Midmark en composant le 1.800.MIDMARK

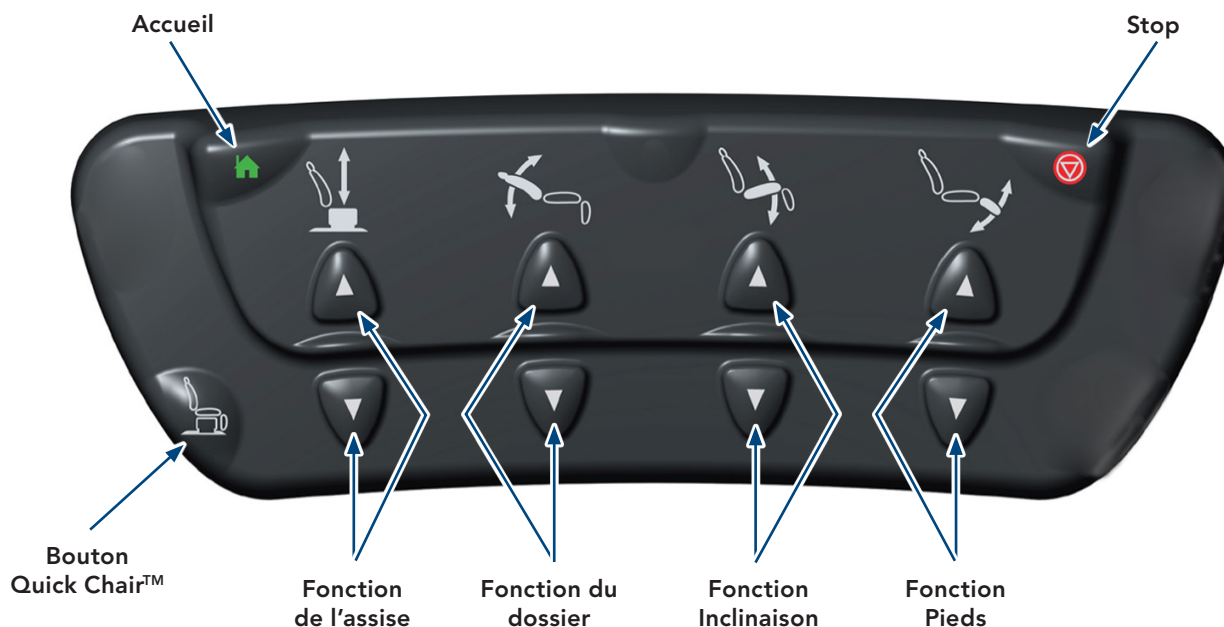

Étape 9 : Installez la partie supérieure de la garniture (non représentée)

Remarque : Les instructions d'installation accompagnent la garniture.