

Base à roulettes [9A33000]

Contenu:

Installation1

Outils spéciaux:

support 4" x 4" x 24"

Utilisation:

Permet de rendre la table d'examen mobile.

Restrictions:

Ne pas utiliser en conjonction avec:

230 (-003)

630 (-005 / -006)

9A144 / 9A208 / 9A410 / 9A411


9A337 / 9A341 / 9A344 / 9A345 / 9A421



Attention


Pour éviter les blessures, verrouillez toujours les roulettes avant d'effectuer toute procédure.

Sériennummer

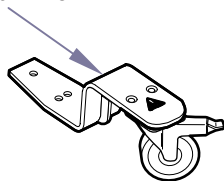


MA646700i


Étape 2: Débranchez le cordon d'alimentation.

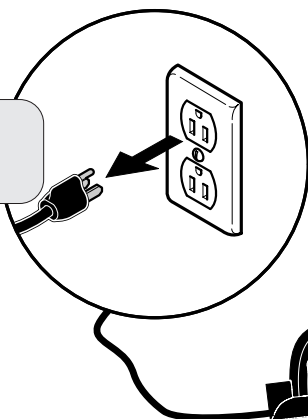

Étape 1: Soulevez le repose-pieds.

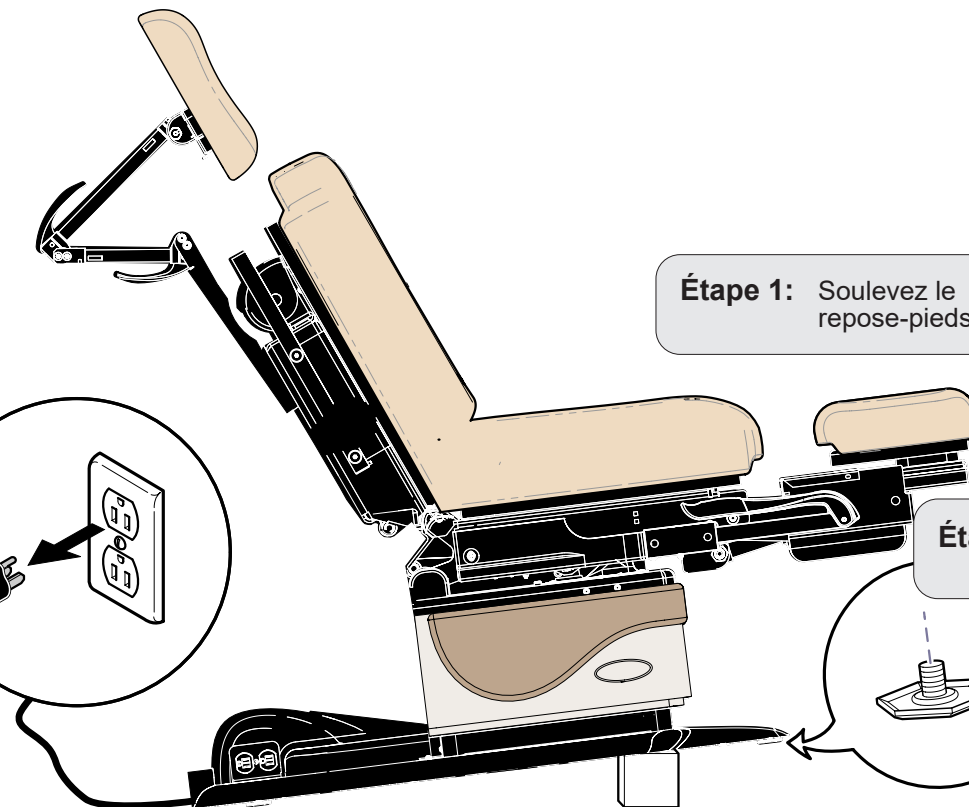

Étape 4: Retirez les vis de mise à niveau.

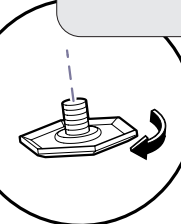

MA645600revB



Attention

Pour éviter les blessures, faites-vous aider dans cette étape..



Étape 3: Soulevez l'extrémité « pieds » de la table et placez le support sous la base.

Étape 5:

Placez les roulettes de l'extrémité « pieds » et fixez-les avec deux vis par roulette.

Remarque:


Les roulettes doivent être tournées vers l'extérieur, comme indiqué.

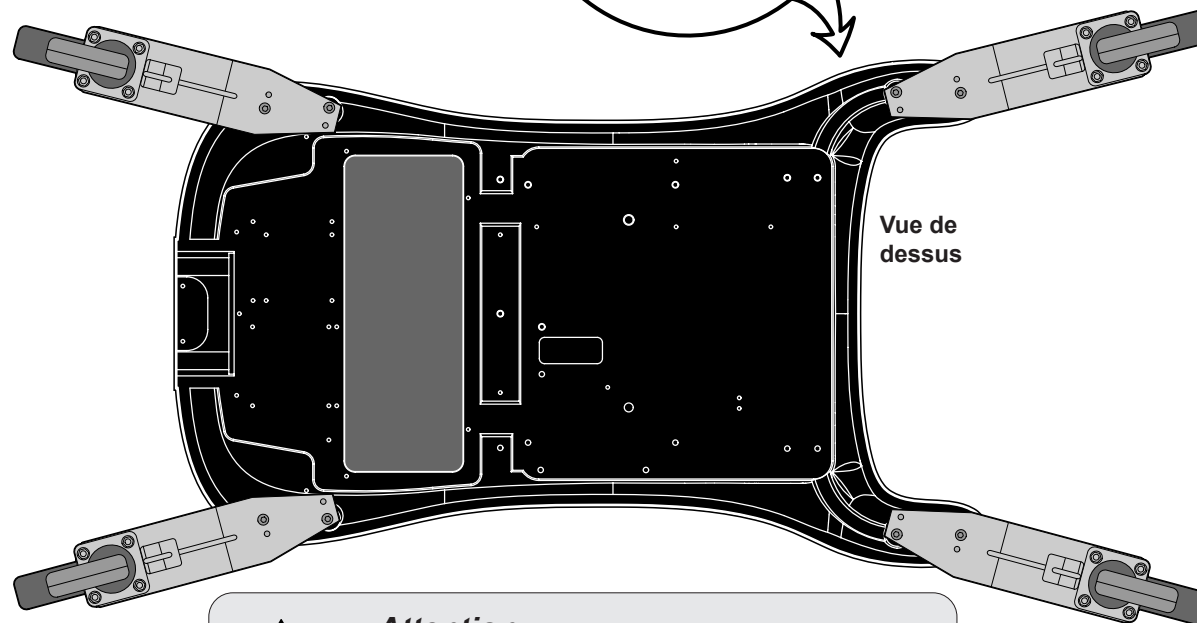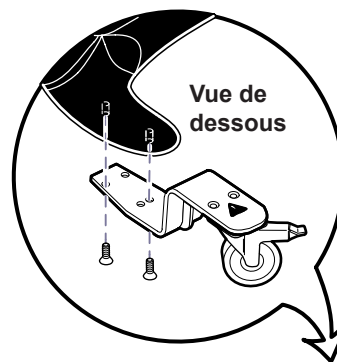**Attention**

Pour éviter les blessures, bloquez les roulettes de l'extrémité « pieds » avant d'exécuter l'étape 6.

Étape 6:

Placez le support sous l'extrémité « tête » de la base. Installez les roulettes de l'extrémité « tête » (même procédure).

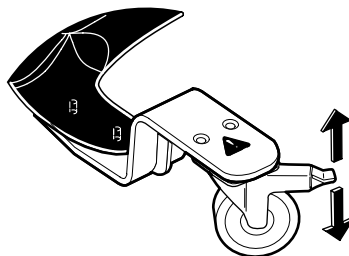

Pour DÉBLOQUER les roulettes...
Soulevez la pédale de frein.

Pour BLOQUER les roulettes...
Appuyez sur la pédale de frein.