

Instalación de la camilla de exploración manual

Para los modelos:

204 (todos)

604 (todos)

Idioma de origen: inglés



Alerta del equipo

Cuando mueva la camilla, debe seguir las siguientes instrucciones.

- NUNCA:**
- a) use los estribos para levantar la camilla
 - b) levante la camilla agarrándola de la parte superior tapizada




¡ATENCIÓN!

Cada camilla se envía con una barra de rollo de papel.

Las instrucciones de instalación vienen en el embalaje de la cubierta superior tapizada.

¡NO SE DESHAGA DE LA BARRA!

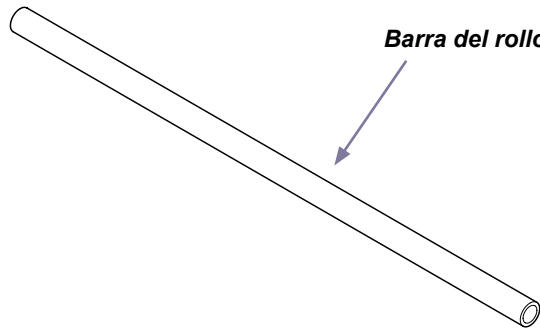

Barra del rollo de papel




Precaución

Objeto pesado. Puede ocasionar distensión muscular o lesiones de espalda. Utilice accesorios de elevación y emplee las técnicas correctas para elevarlo durante su traslado.

Paso 1: Quite la camilla de la plataforma.

- A) Quite los pernos y los dos sistemas de soporte de envío.
- B) Saque la camilla de la plataforma.*
- C) Mueva la camilla al lugar deseado.

*Nota: Para no dañar el suelo, coloque cartones o una manta debajo de la camilla.

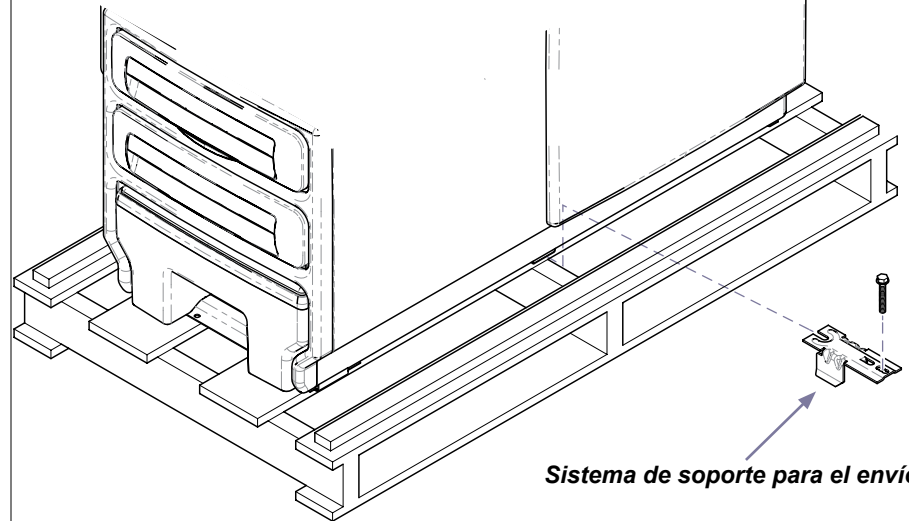


Sistema de soporte para el envío

MA8093i


Solo 604

Paso 2: Instale el revestimiento lateral magnético.

- A) Coloque el revestimiento lateral de manera que el borde superior descanse sobre el borde superior del reborde superior.
- B) Repita el proceso para el otro lado.

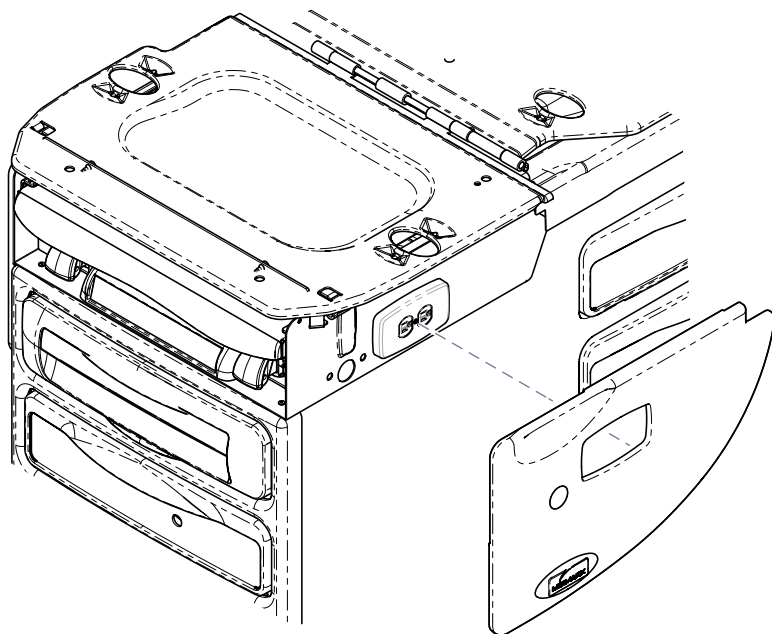

Antes de conectar el cable de alimentación del dispositivo Midmark a una fuente de alimentación eléctrica, se recomienda contactar con un electricista local autorizado o una autoridad local que tenga jurisdicción sobre la distribución de energía interna del edificio para verificar que, al conectar el dispositivo, este cumple con todos los códigos eléctricos locales. Utilice la potencia eléctrica marcada en el dispositivo para determinar cuales son los circuitos eléctricos derivados apropiados y los requisitos de salida. Para modelos de 115 V con una calificación de corriente de 12 amperios o más, puede requerirse un circuito dedicado en caso de que la protección de dicho circuito provenga de un disyuntor de 15 amperios.

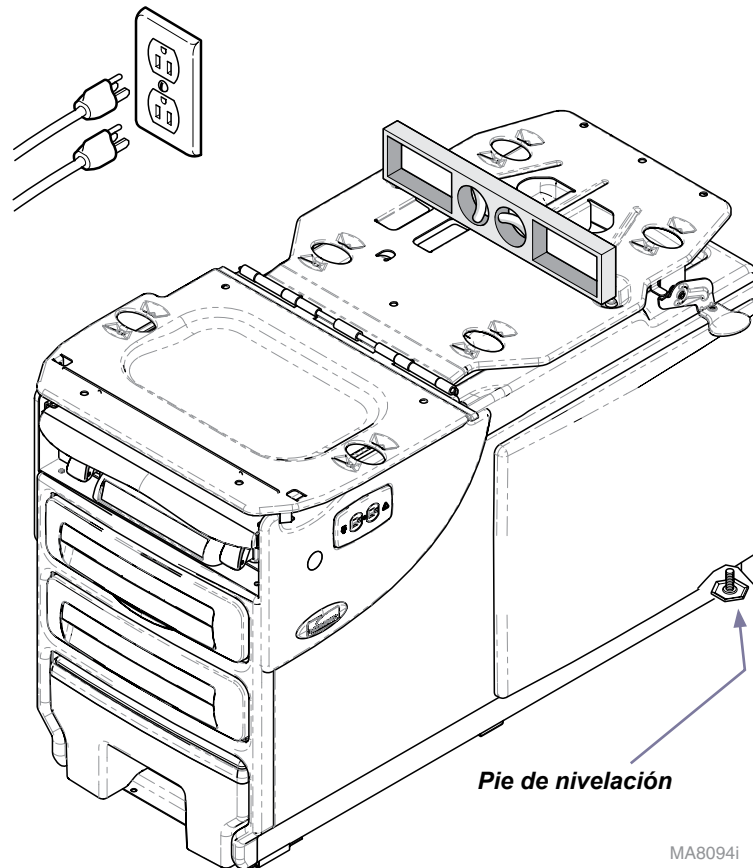

Paso 3: Enchufe el cable de alimentación / Nivele la camilla.

- A) Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la red.*
- B) Ajuste los dos pies de nivelación que están debajo del extremo de la cabecera de la camilla.

**Nota: Algunos modelos tienen dos cables de alimentación. Se deben conectar ambos cables para un funcionamiento correcto.*

(Opcional)


Inversión de los cajones laterales - solo 604

Los cajones laterales se pueden invertir para poderlos abrir desde el lado opuesto de la camilla.

Para invertir los cajones laterales...

- A) Quite el panel lateral.
- B) Quite los frentes de los cajones.
- C) Instale los frentes de los cajones en el lado opuesto.
- D) Instale el panel lateral en el lado opuesto.

*Nota: Para quitar el **panel lateral**, tire de él hacia afuera desde la parte inferior. Para quitar los **frentes de los cajones**, tire de las lengüetas hacia abajo para soltarlos.*

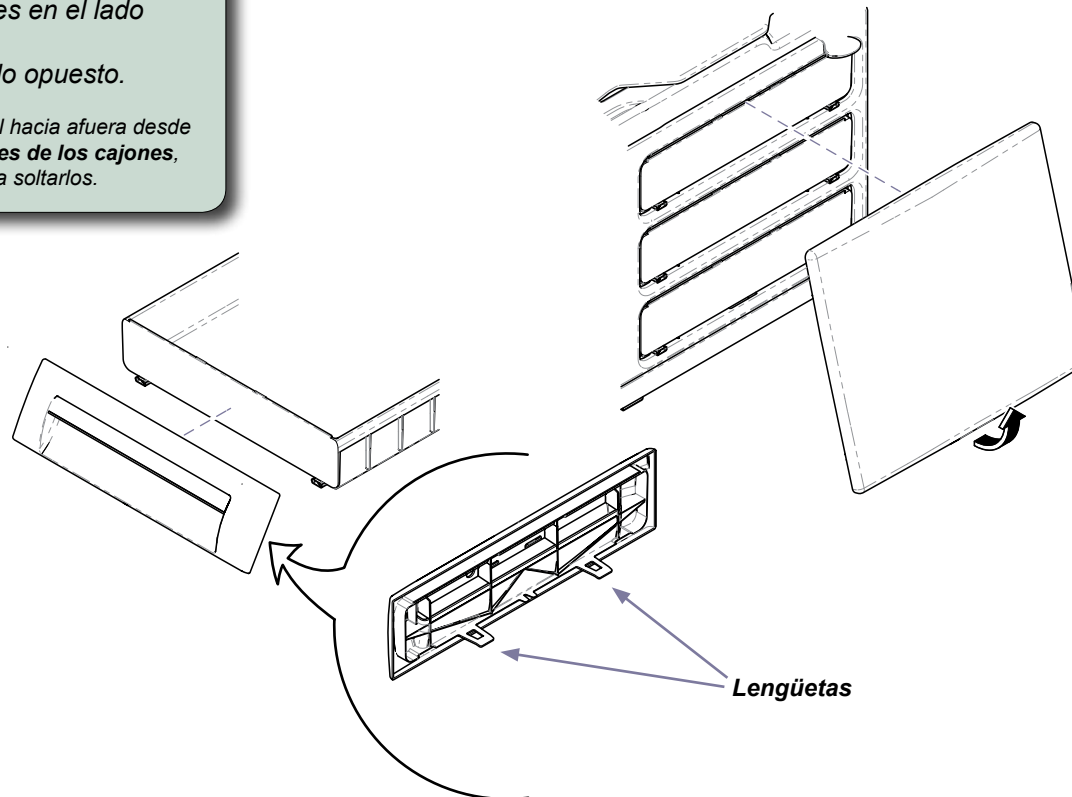

MA8095i