

Installation de la garniture (Midmark)


Modèles concernés :

604 (tous les modèles)
622 (-007 et -008)
623 (-007 à -011)
625 (tous les modèles)

Langue d'origine : Anglais

Restrictions :

les ensembles de garnitures de 81 cm (32 pouces) de large peuvent être installés uniquement sur les modèles 625.

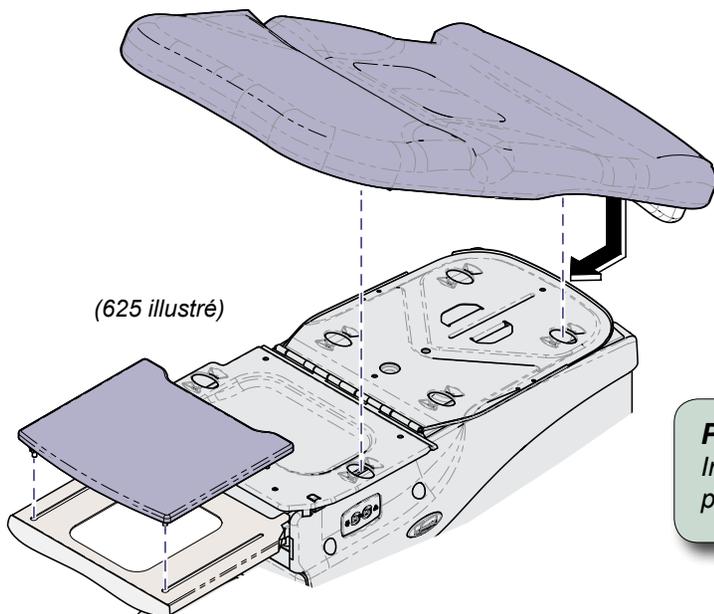

Avertissement relatif à l'équipement

Veillez à ce que la tige du rouleau de papier soit retirée de la charnière de l'assise/du dossier avant l'installation de la garniture.

Pour installer la garniture de l'assise/du dossier...

- Faites coulisser la plaque de support du dossier sous le logement du rouleau de papier.
- Positionnez la garniture de sorte que les boutons de verrouillage s'alignent sur les orifices des plaques de montage.
- Mettez tous les boutons de verrouillage en position **VERROUILLÉ**.

Pour installer la tige du rouleau de papier...

Insérez les extrémités de la tige du rouleau de papier dans les orifices du logement.

Tige du rouleau de papier

Verrouillé

Déverrouillé

Pour installer le coussinet du repose-pied...

- Étendez la tablette du repose-pied.
- Placez les glissières du repose-pied dans les fentes de la tablette.




Avertissement relatif à l'équipement

Lors de l'installation d'une garniture de 81 cm (32 pouces) de large, il est nécessaire de déplacer le support de la commande manuelle.

Pour déplacer le support de la commande manuelle...

Enlevez deux vis et déplacez le support de la commande manuelle de l'ensemble soudé du dossier jusqu'au dossier de la garniture, puis fixez-le en place à l'aide de deux vis.


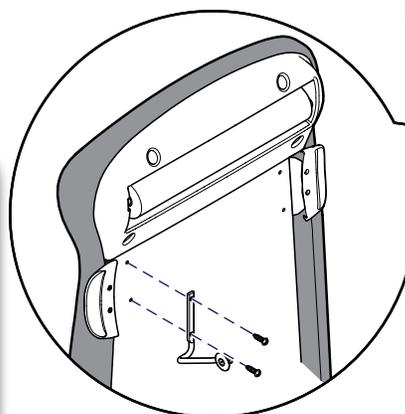


Remarque

Le support de la commande manuelle peut être monté sur le côté droit ou sur le côté gauche.

MA9178i

Modèles avec tiroirs uniquement :

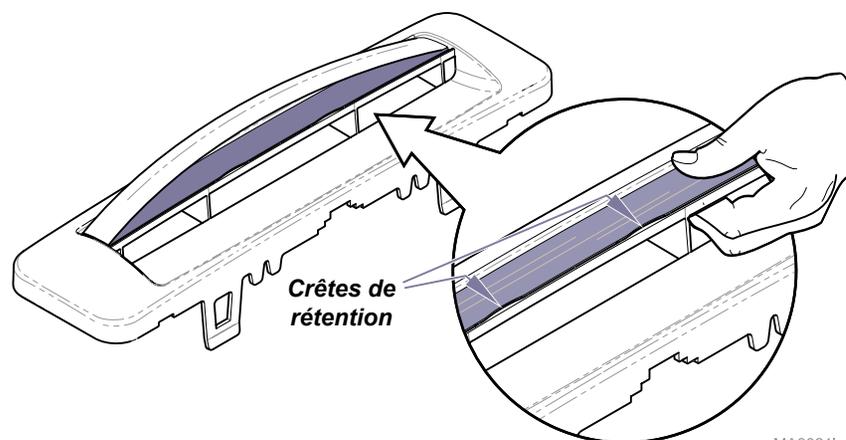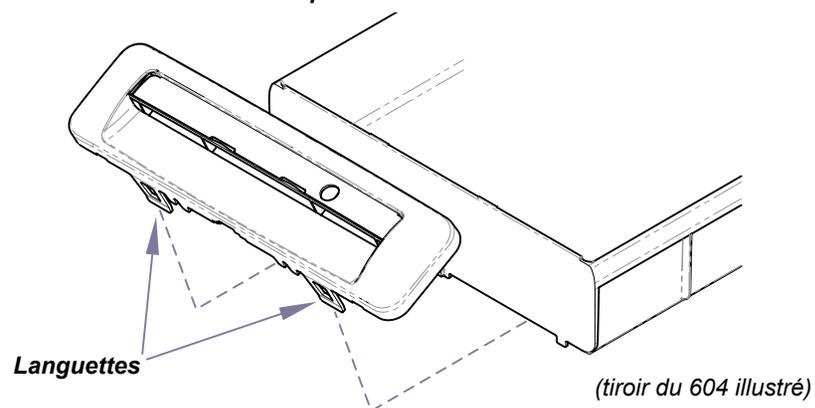


Pour installer des inserts de couleur sur les poignées de tiroir...

- A) Retirez le panneau avant du tiroir. (Abaissez les languettes pour le libérer)
- B) Retirez le couvercle transparent de l'insert.
- C) Positionnez l'insert de couleur.
- D) Remplacez le couvercle transparent de l'insert.
(Insérez une à une les extrémités dans les fentes.)

Remarque : pour verrouiller en place le couvercle transparent de l'insert, appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'encliquette sous les deux crêtes de rétention.

Modèles avec garniture chauffée uniquement :

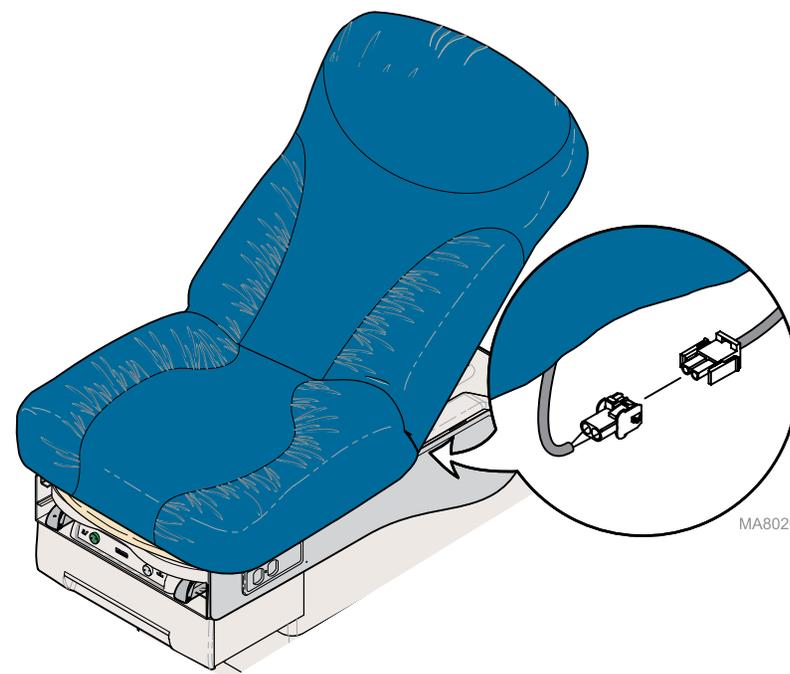

Avertissement relatif à l'équipement

Veillez à ce que le faisceau ne soit pas coincé entre la garniture et sa housse.

Pour raccorder l'élément chauffant de garniture à une source d'alimentation :

- A) Connectez le faisceau de l'élément chauffant de garniture.