


Cleaning:

- Clean upholstery with diluted bleach solution. Ratio - 10:1 (water:bleach)
Refer to Page 3 for more information.
- Wipe painted metal and plastic surfaces with a clean, soft cloth, and a mild cleaner.

Weight Capacity:
350 lbs (158 kg).

To install backrest...

- Position backrest on seat mount weldment as shown.
- Secure backrest with three star washers & screws.

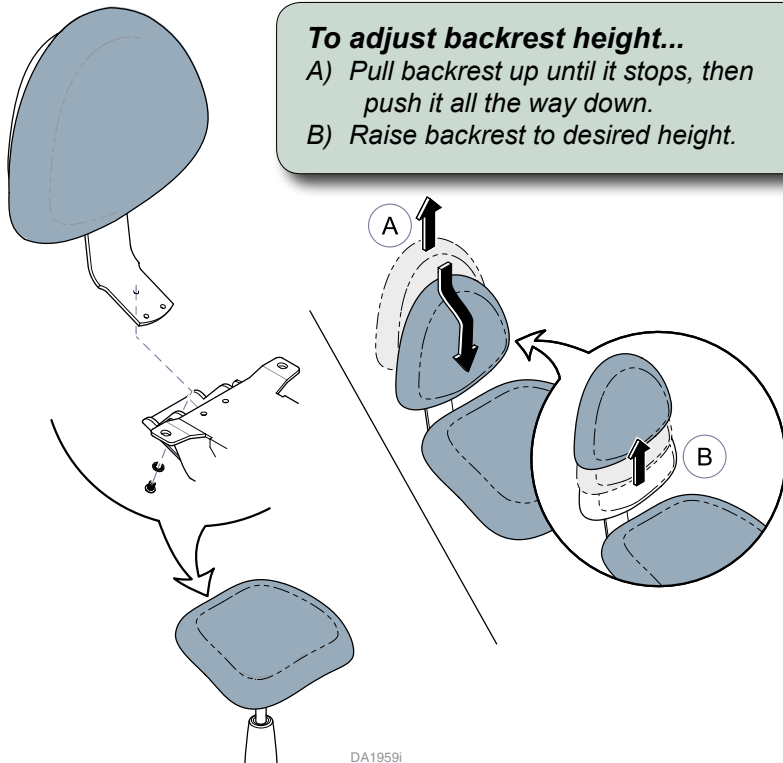



To adjust backrest height...

- Pull backrest up until it stops, then push it all the way down.
- Raise backrest to desired height.


To install (optional) armrests...

- Align slots in armrest with holes in mounting plate.
- Secure armrest with three star washers & screws.
- Repeat for other armrest.

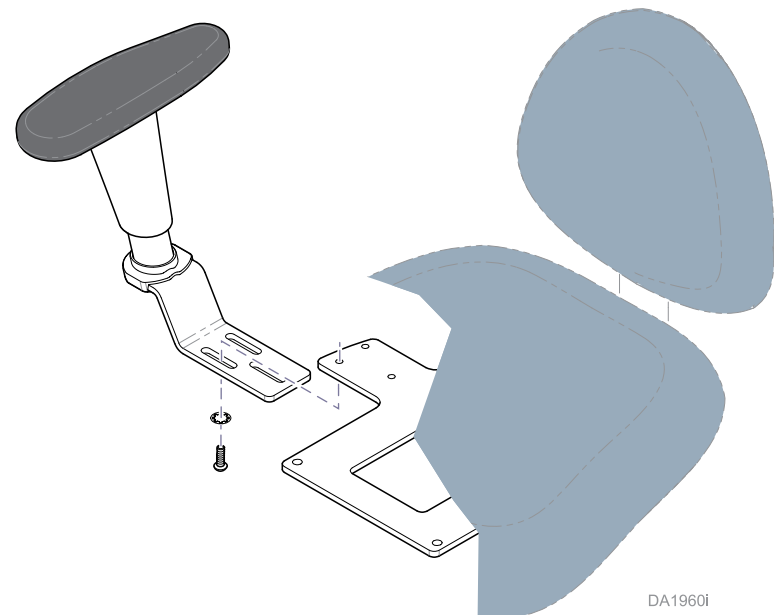


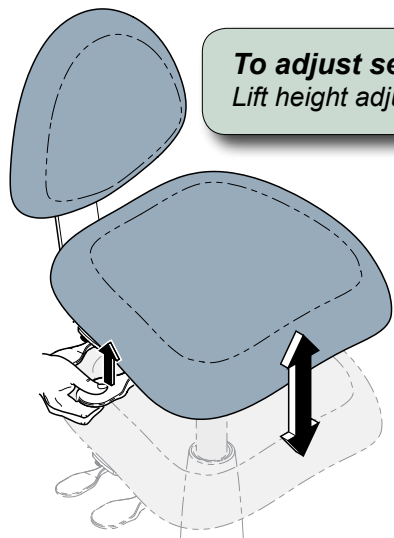


To adjust seat height...
Lift height adjustment lever. (front lever)

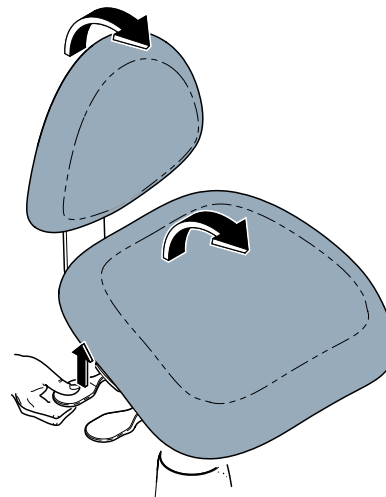


To adjust pivot angle of seat / back...
A) Lift pivot adjustment lever. (rear lever)
B) Lean forward / back to desired angle.

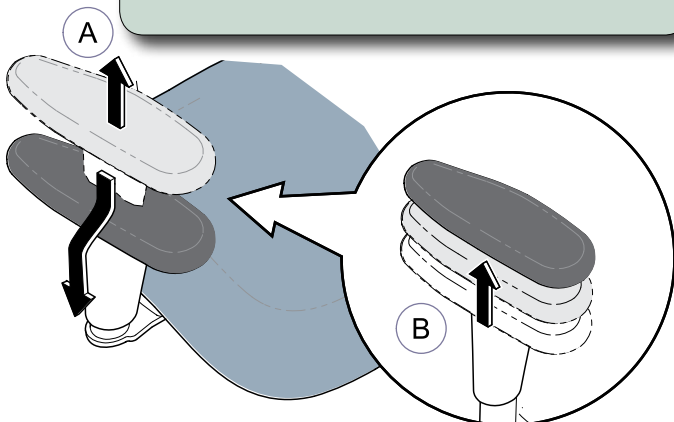

To adjust armrest height...
A) Pull armrest up until it stops, then push it all the way down.
B) Raise armrest to desired height.

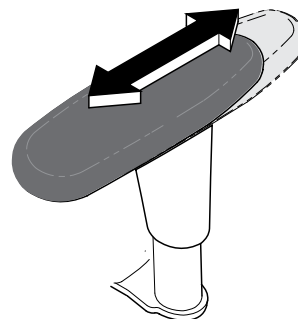

To adjust armrest pad position...
Move armrest pad forward / back as desired.

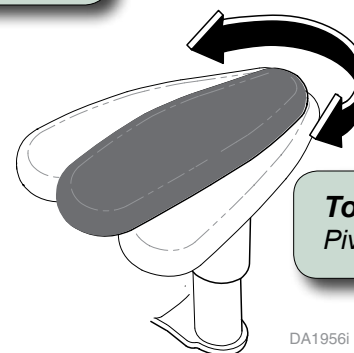

To adjust armrest angle...
Pivot armrest pad in / out.

DA1956i

Specifications

Doctor's Stool (153811)	
Weight Rating	350 lbs (159 kg)
Seat Height: <i>Tall models (default)</i>	Min: 21 in. (53 cm) Max: 29 in. (74 cm)
<i>Medium models</i>	Min: 16.5 in. (42 cm) Max: 22 in. (56 cm)
<i>Short models</i>	Min: 15.25 in. (39 cm) Max: 18.25 in. (46 cm)
Seat Dimensions: <i>Standard Seat</i>	Width: 17.5 in (44.5 cm) Depth: 16.5 in. (42 cm)
<i>Small Seat</i>	Width: 16.25 in (41 cm) Depth: 16 in. (40.6 cm)
Base Dimension	24 x 24 in. (61 x 61 cm)

Cleaning

Every dental practice is different, and no single disinfectant is the best choice for every facility. Listed below are some organizations to assist you in choosing the best disinfectant for your practice

Organization for Safety & Asepsis Procedures:

<http://www.osap.org>


American Dental Association:

<http://www.ada.org>

Dept. of Health & Human Resources

Centers for Disease Control & Prevention (CDC):

<http://www.cdc.gov>

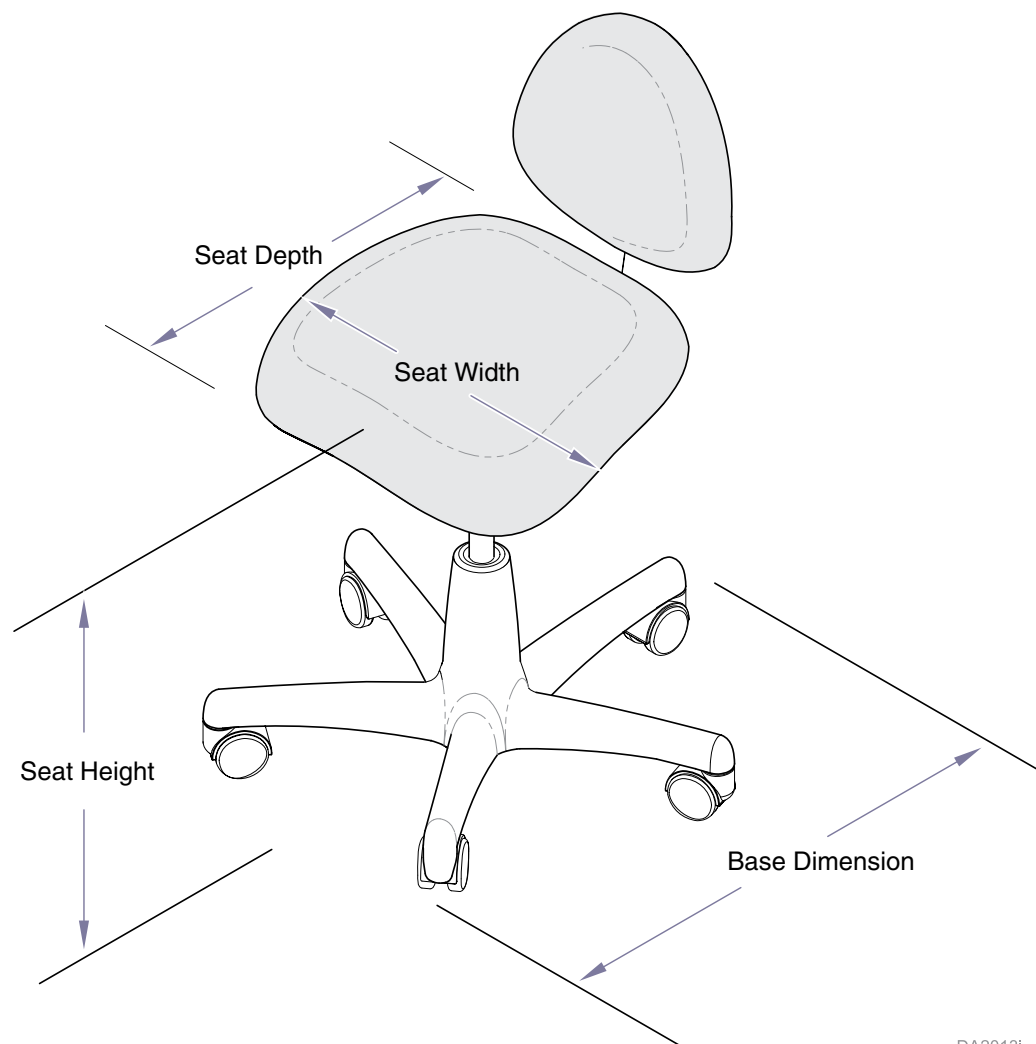

DA2013i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380-0286
Phone: 937-526-3662
Fax: 937-526-5542
midmark.com

© Midmark Corporation 2008 Style A

English - 3



Because we care.


Reinigung:

- Polster mit einer Bleichmittellösung reinigen. Verhältnis - 10:1 (Wasser:Bleichmittel)
Weitere Informationen auf Seite 3.
- Lackierte Metall- und Kunststoffoberflächen mit einem sauberen, weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel abwischen.

Tragkraft:
158 kg (350 lbs.)

Rückenlehne befestigen:

- Die Rückenlehne der Abbildung entsprechend am Sockel-Schweißteil positionieren.
- Die Rückenlehne mit den drei Klemmscheiben und Schrauben befestigen.

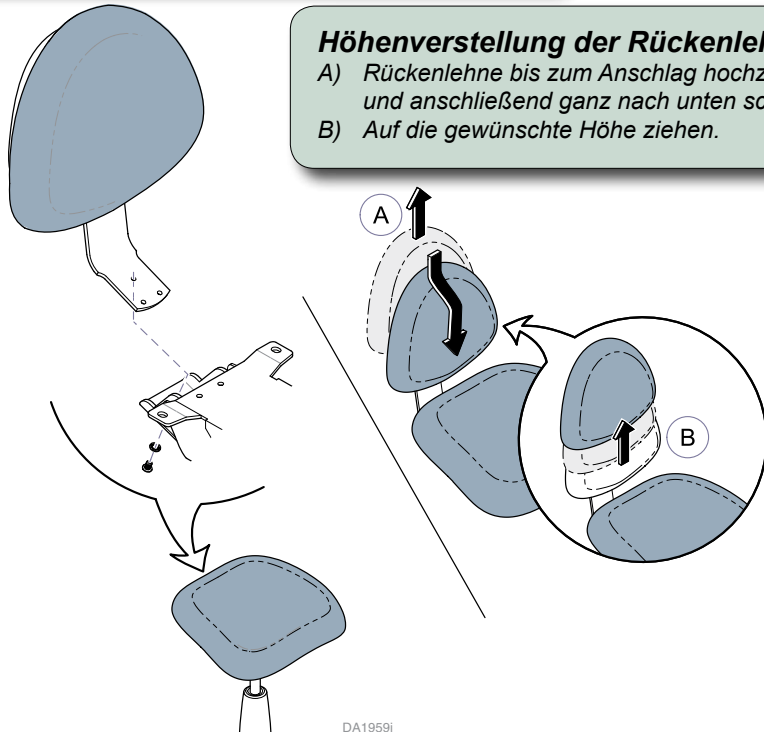


Höhenverstellung der Rückenlehne:


- Rückenlehne bis zum Anschlag hochziehen und anschließend ganz nach unten schieben.
- Auf die gewünschte Höhe ziehen.

Befestigung der (optionalen) Armlehnen:


- Die Schlitz in der Armlehne an den Löchern der Montageplatte ausrichten.
- Die Armlehne mit den drei Klemmscheiben und Schrauben befestigen.
- Die zweite Armlehne mit der gleichen Methode befestigen.

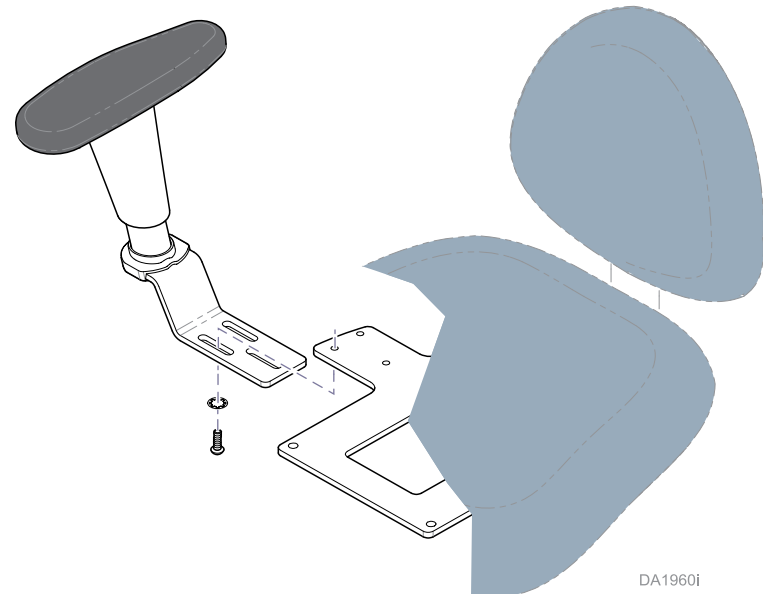

DA1960i

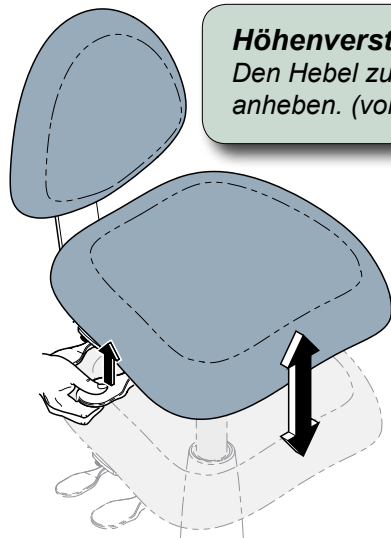


Höhenverstellung der Sitzfläche:
Den Hebel zur Höhenverstellung
anheben. (vorderer Hebel)

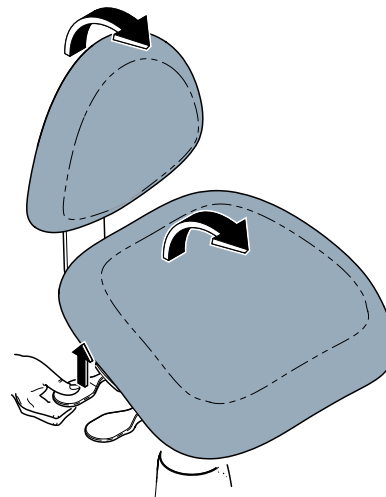



**Neigungswinkel der Sitzfläche /
Rückenlehne einstellen:**
A) Den Hebel zur Neigungseinstellung
anheben. (hinterer Hebel)
B) Durch Vorwärts-/Rückwärtslehnen den
gewünschten Winkel erzielen.

Höhenverstellung der Armlehne:

- A) Armlehne bis zum Anschlag hochziehen und
anschließend ganz nach unten schieben.
- B) Auf die gewünschte Höhe ziehen.

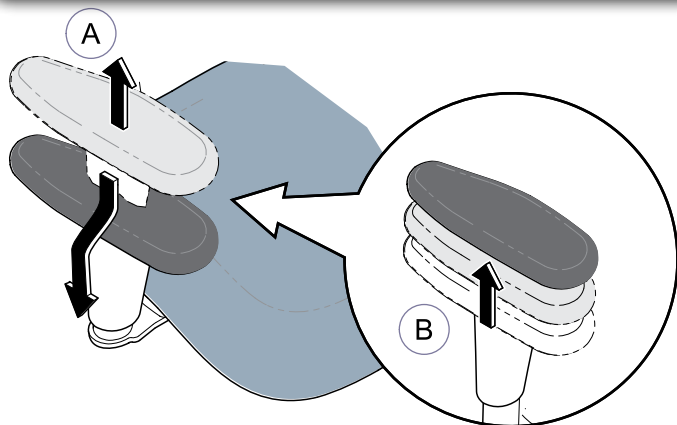

**Horizontale Armlehnen-
positionierung einstellen:**
Die Armlehne wie gewünscht
vor oder zurückschieben.

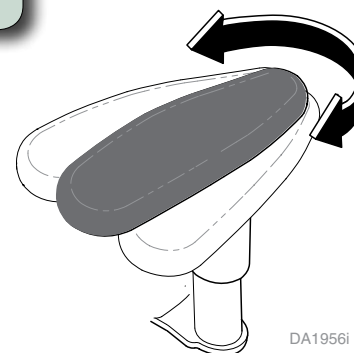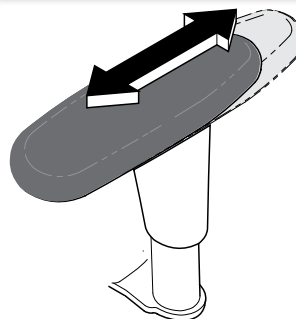

DA1956i

Winkelverstellung der Armlehne:
Armlehne zur Sitzfläche hin bzw. von
der Sitzfläche weg drehen.

Technische Daten

Zahnarztstuhl (153811)	
Zulässige Belastung	159 kg (350 lbs)
Sitzhöhe: <i>Hohe Ausführung (standard)</i>	Min: 53 cm (21 Zoll) Max: 74 cm (29 Zoll)
<i>Mittleres Modell</i>	Min: 42 cm (16,5 Zoll) Max: 56 cm (22 Zoll)
<i>Niedrige Ausführung</i>	Min: 39 cm (15,25 Zoll) Max: 46 cm (18,25 Zoll)
Sitzabmessungen: <i>Standardsitz</i>	Breite: 44,5 cm (17,5 Zoll) Tiefe: 42 cm (16,5 Zoll)
<i>Kleine Sitzfläche</i>	Breite: 41 cm (16,25 Zoll) Tiefe: 40,6 cm (16 Zoll)
Sockelabmessungen	61 x 61 cm (24 x 24 Zoll)

Reinigung

Jede Praxis hat ihre Besonderheiten. Deshalb gibt es kein optimales Desinfektionsmittel für alle Einrichtungen. Die unten aufgeführten Unternehmen können Ihnen bei der Wahl des optimalen Desinfektionsmittels für Ihre Praxis behilflich sein.

Organisation für Sicherheits- und Asepsisverfahren:

<http://www.osap.org>


Amerikanische Zahnärztekammer:

<http://www.ada.org>

Amerikanisches Gesundheitsministerium

Amerikanische Gesundheitsbehörde:

<http://www.cdc.gov>

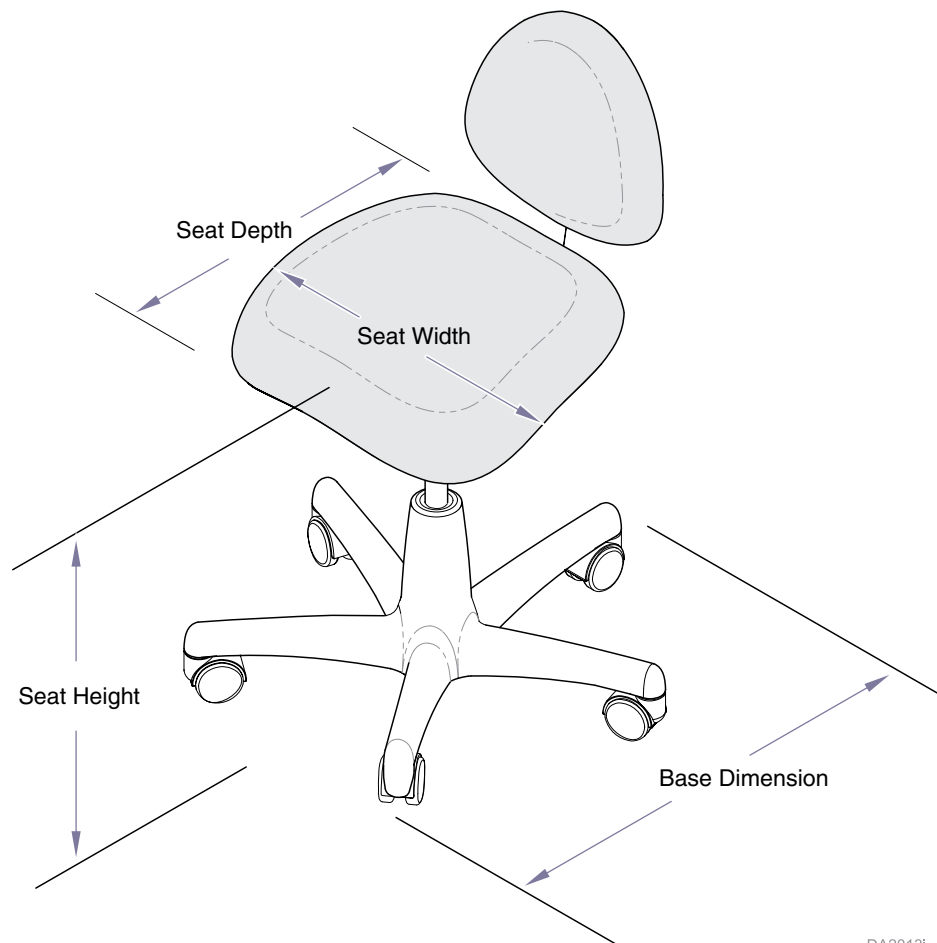

DA2013i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380-0286
Telefon: 937-526-3662
Fax: 937-526-5542
midmark.com

Nettoyage :

- Nettoyez la sellerie avec une solution à base d'eau de Javel diluée. Dilution à : 10:1 (eau:eau de Javel)
Voir Page 3 pour davantage d'informations.
- Essuyez les surfaces en plastique et en métal peintes à l'aide d'un chiffon doux et propre et d'un nettoyant doux.


Capacité de poids :
158 kg (350 lbs)

Pour installer le dossier...

- Positionnez le dossier sur l'ensemble soudé du siège, comme indiqué.
- Fixez le dossier avec trois vis et rondelles en étoile.


Pour régler la hauteur du dossier...


- Tirez le dossier vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis faites-le descendre jusqu'en bas.
- Relevez le dossier à la hauteur souhaitée.

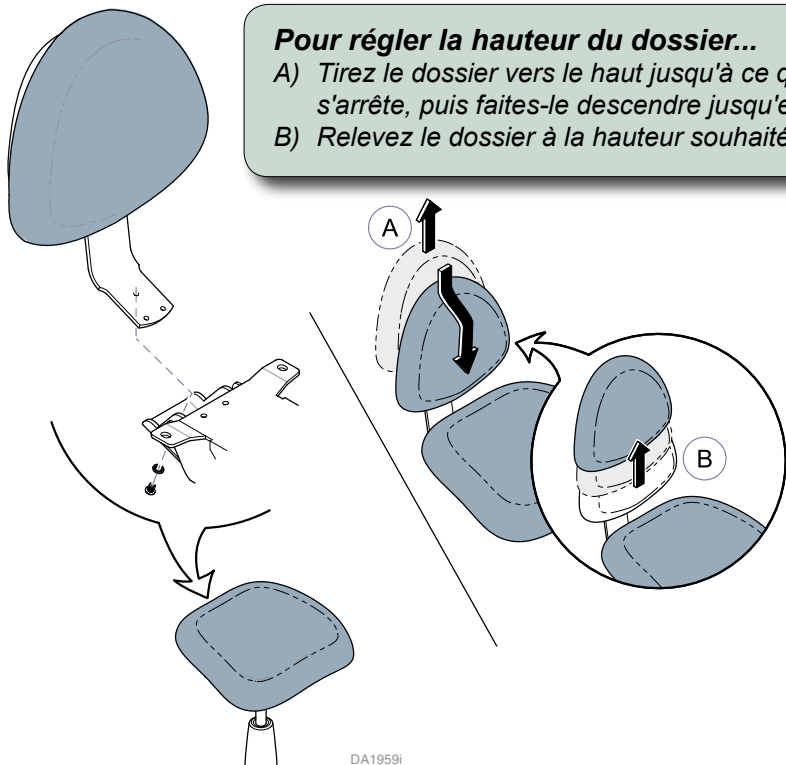


Pour installer les accoudoirs (en option)...

- Alignez les fentes des accoudoirs aux orifices sur la plaque de montage.
- Fixez l'accoudoir avec trois vis et rondelles en étoile.
- Répétez pour l'autre accoudoir.

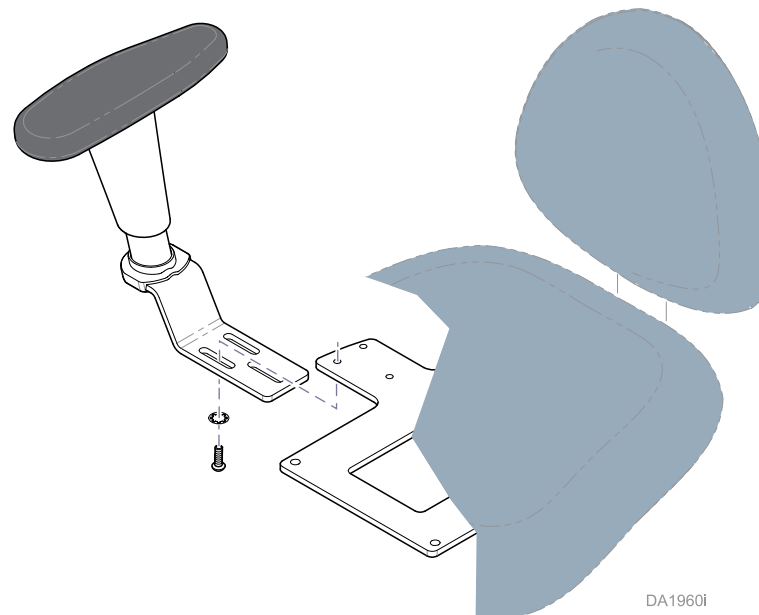

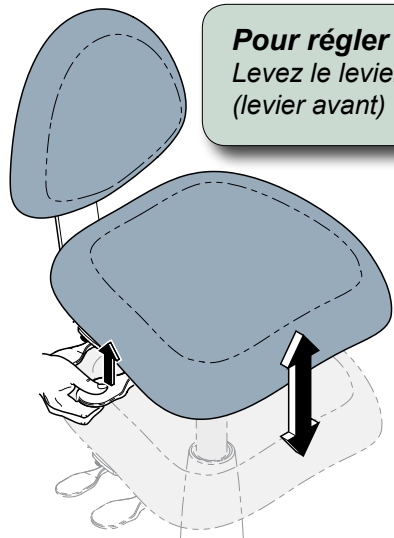


Pour régler la hauteur d'assise...
*Levez le levier de réglage en hauteur.
 (levier avant)*

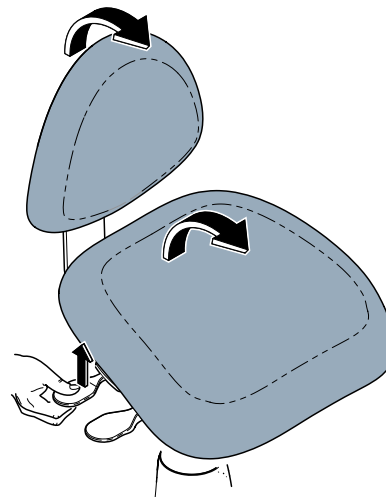



Pour régler l'inclinaison de l'assise/du dossier...
 A) *Levez le levier de réglage de l'articulation. (levier arrière)*
 B) *Penchez en avant/en arrière à l'inclinaison souhaitée.*

Pour régler la hauteur des accoudoirs...

- A) *Tirez l'accoudoir vers le haut jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis faites-le descendre jusqu'en bas.*
 B) *Levez l'accoudoir à la hauteur souhaitée.*

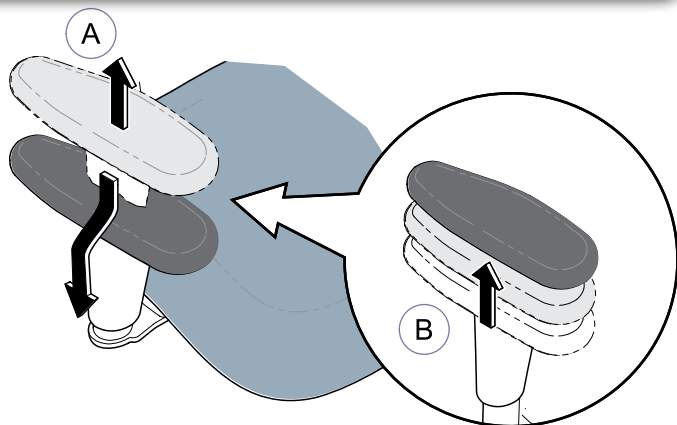

Pour régler la position des manchettes...
Avancez/reculez la manchette à votre convenance.

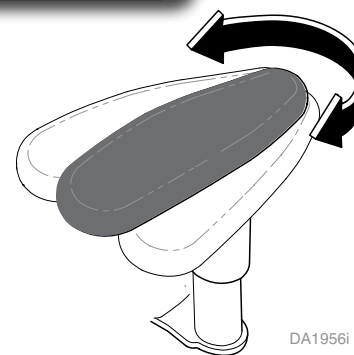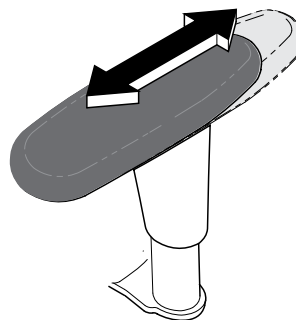

Pour régler l'inclinaison des accoudoirs...
Faites pivoter la manchette vers l'intérieur/l'extérieur.

DA1956i

Caractéristiques techniques

Tabouret dentaire (153811)	
Poids nominal	159 kg (350 lbs)
Hauteur d'assise : <i>Modèles hauts (défaut)</i>	Min. : 53 cm (21 po) Max. : 74 cm (29 po)
<i>Modèle moyen</i>	Min. : 42 cm (16,5 po) Max. : 56 cm (22 po)
<i>Modèles bas</i>	Min. : 39 cm (15,25 po) Max. : 46 cm (18,25 po)
Dimensions de l'assise : <i>Assise standard</i>	Largeur : 44,5 cm (17,5 po) Profondeur : 42 cm (16,5 po)
<i>Petite assise</i>	Largeur : 41 cm (16,25 po) Profondeur : 40,6 cm (16 po)
Dimensions de la base	61 x 61 cm (24 x 24 po)

Nettoyage

Les réglages varient en fonction du cabinet dentaire et aucun désinfectant ne peut être considéré comme universel. Ci-dessous se trouvent des organisations qui vous aideront à choisir les meilleurs désinfectants disponibles pour votre cabinet.

Organisation pour les procédures de sécurité et d'asepsie :


<http://www.osap.org>

Association dentaire américaine :

<http://www.ada.org>

Service des centres de santé et de ressources humaines pour le contrôle et la prévention des maladies :

<http://www.cdc.gov>

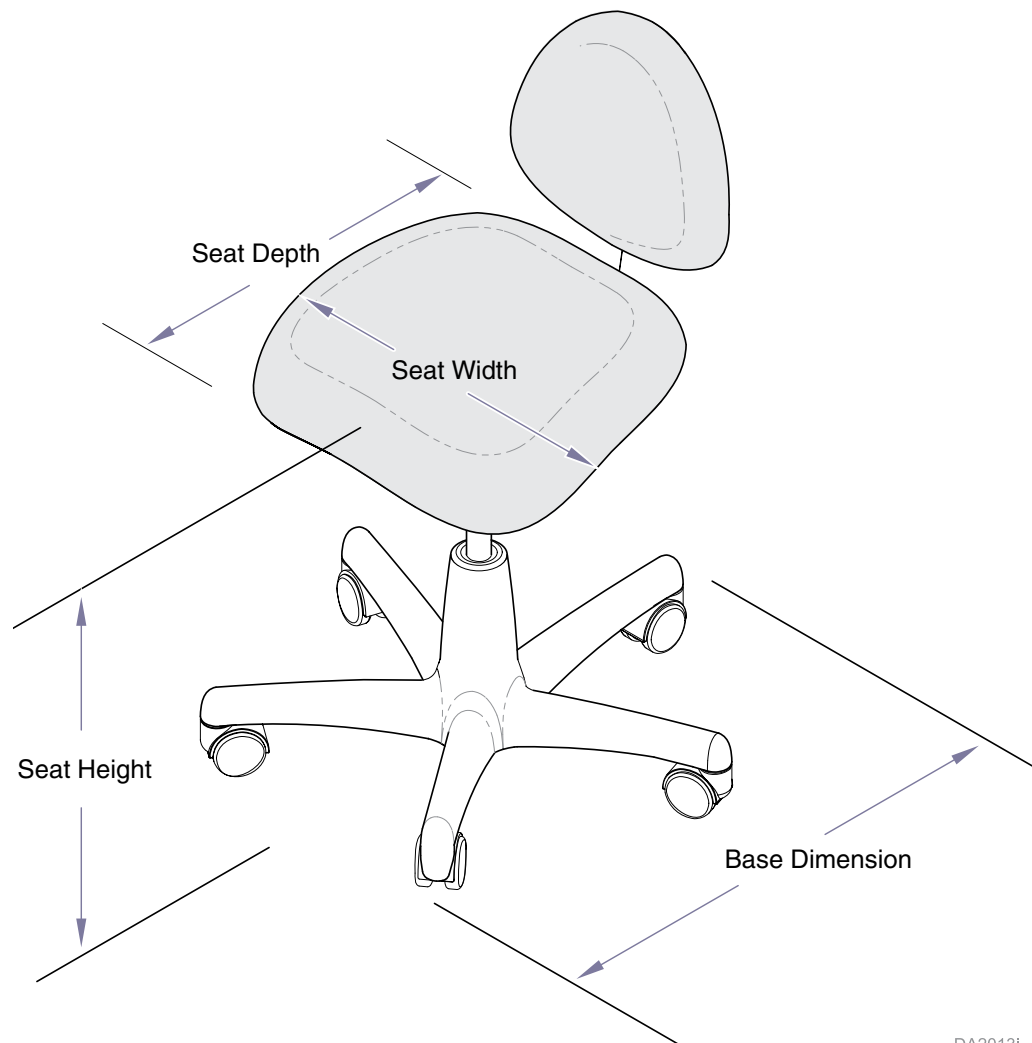

DA2013i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380-0286
Téléphone : 937-526-3662
Fax : 937-526-5542
midmark.com

Limpieza:

- Limpie el tapizado con una solución de agua con lejía en una proporción de 10:1 (agua:lejía)
Consulte la página 3 para obtener más información.
- Limpie las superficies de plástico o metal pintado con un paño suave y limpio y un limpiador no abrasivo.


Peso máximo de carga:
158 kg. (350 lb.)

Para instalar el respaldo...

- Coloque el respaldo en la pieza soldada del asiento como se muestra en la imagen.
- Fije el respaldo con tres tornillos con arandela.

Para ajustar la altura del respaldo...


- Tire del respaldo hacia arriba hasta el tope y a continuación, empújelo hacia abajo.
- Levante el respaldo hasta la altura deseada.

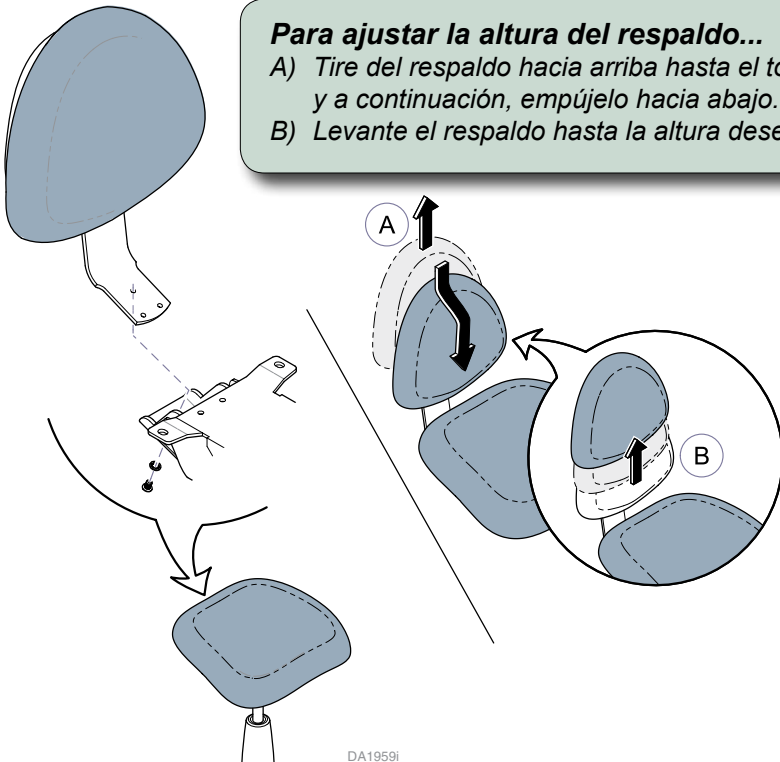


DA1959i

Para instalar los apoyabrazos (opcional)...


- Haga coincidir las ranuras del apoyabrazos con los orificios de la pletina.
- Fije el apoyabrazos con tres tornillos con arandela.
- Repita la operación para el otro apoyabrazos.

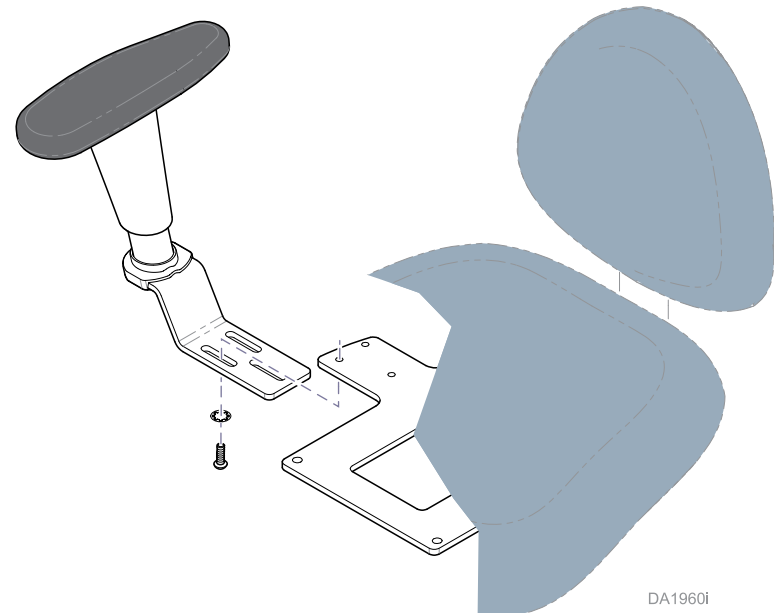

DA1960i

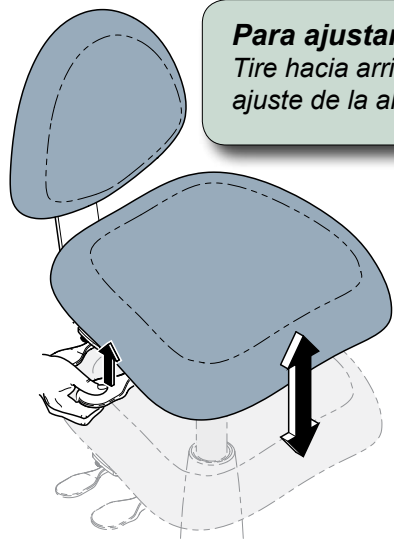

Para ajustar la altura del sillón...
Tire hacia arriba de la palanca de ajuste de la altura. (palanca frontal)

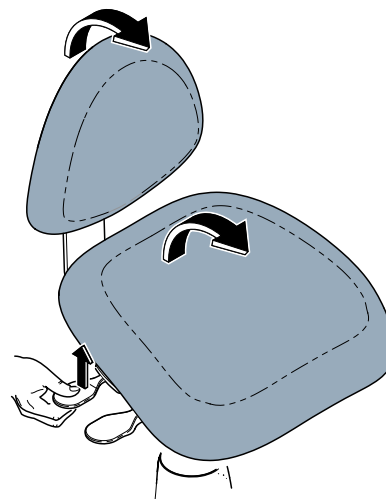


Para ajustar el ángulo de giro del asiento y el respaldo...

- A) Tire hacia arriba de la palanca de ajuste del giro. (palanca trasera)
- B) Incline el respaldo hacia adelante o hacia atrás hasta conseguir el ángulo deseado.



Para ajustar la altura del apoyabrazos...

- A) Tire del apoyabrazos hacia arriba hasta el tope y a continuación, empujelo hacia abajo.
- B) Levante el apoyabrazos hasta la altura deseada.

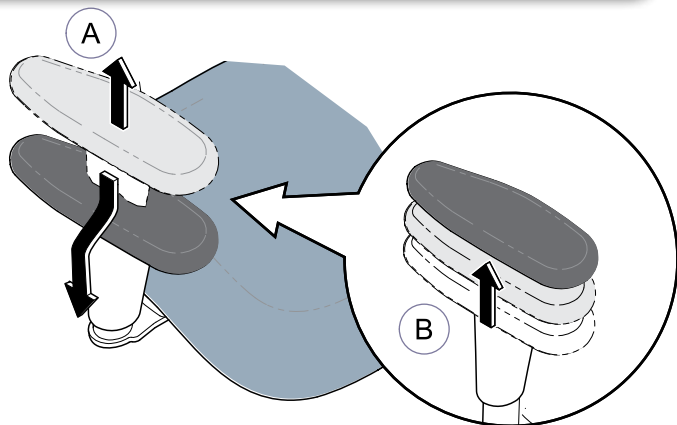

Para ajustar la posición de la almohadilla del apoyabrazos...

Desplace la almohadilla del apoyabrazos adelante y atrás.

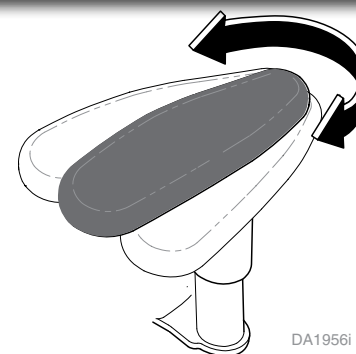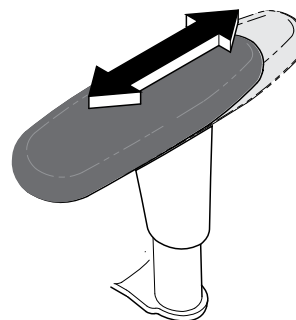

DA1956i

Para ajustar el ángulo del apoyabrazos...

Gire la almohadilla del apoyabrazos hacia dentro o hacia afuera.

Especificaciones

Taburete del odontólogo (153811)	
Peso	159 kg. (350 lb.)
Altura del asiento: <i>Modelos altos (defecto)</i>	Mín: 53 cm. (21 pulgadas) Máx: 74 cm. (29 pulgadas)
<i>Modelo mediano</i>	Mín: 42 cm. (16,5 pulgadas) Máx: 56 cm. (22 pulgadas)
<i>Modelos bajos</i>	Mín: 39 cm. (15,25 pulgadas) Máx: 46 cm. (18,25 pulgadas)
Medidas del asiento: <i>Asiento estándar</i>	Anchura: 44,5 cm. (17,5 pulgadas) Profundidad: 42 cm. (16,5 pulgadas)
<i>Asiento pequeño</i>	Anchura: 41 cm. (16,25 pulgadas) Profundidad: 40,6 cm. (16 pulgadas)
Medidas de la base	61 x 61 cm. (24 x 24 pulgadas)

Limpieza

Cada consulta dental es diferente y no hay un único desinfectante que sea la mejor opción para todas las instalaciones. A continuación se enumeran algunas organizaciones que le ayudarán a elegir el mejor desinfectante para su consulta.

Organización de Seguridad y Procedimientos de Asepsia

<http://www.osap.org>


Asociación Dental Americana:

<http://www.ada.org>

Departamento de Salud y Recursos Humanos

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:

<http://www.cdc.gov>

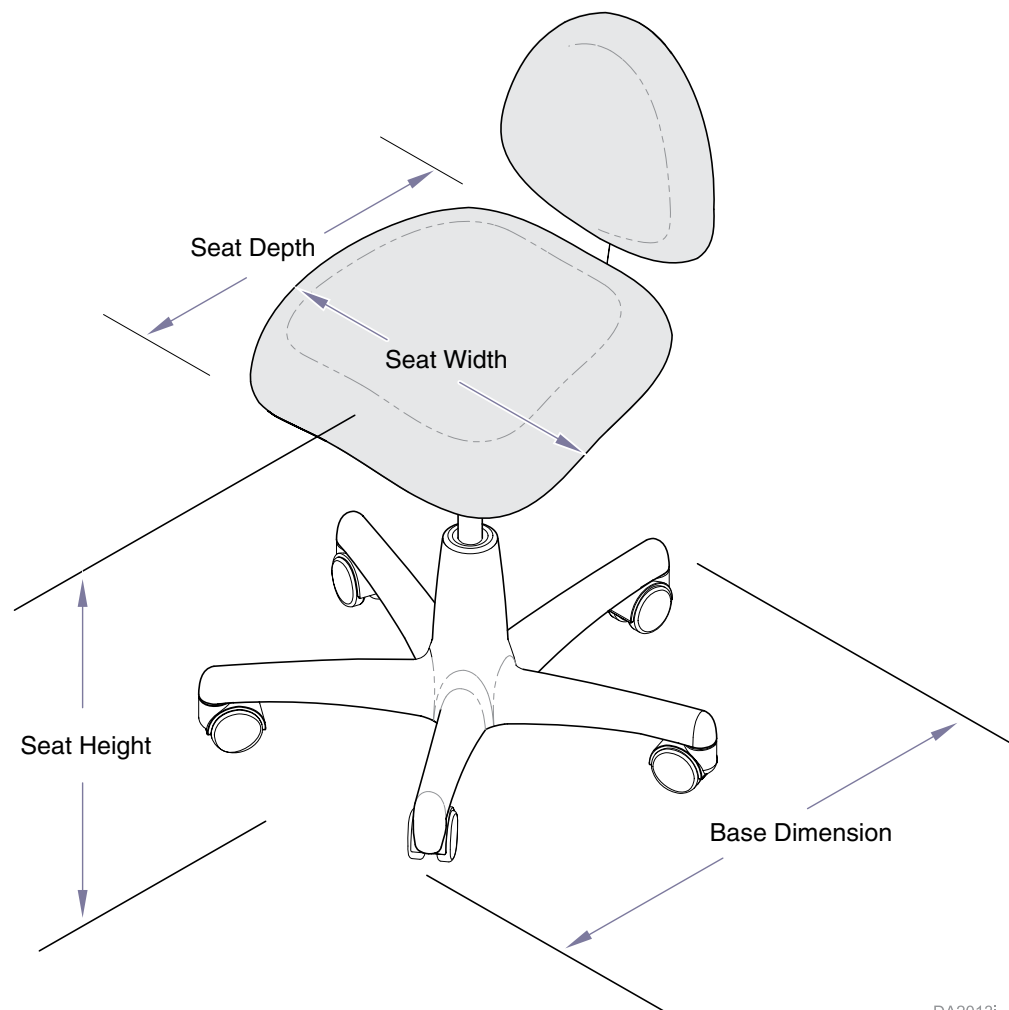

DA2013i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380-0286
Teléfono: 937-526-3662
Fax: 937-526-5542
midmark.com

© Midmark Corporation 2008 Style A

Español - 3



Pulizia:

- Pulire la tappezzeria di rivestimento con una soluzione diluita a base di candeggina. 10 parti d'acqua e 1 di candeggina **Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla pag. 3.**
- Strofinare le superfici plastiche e metalliche con un panno morbido pulito e un detergente delicato.

Peso massimo


sostenibile:
158 kg (350 libbre).

Per montare lo schienale...

- Collocare lo schienale sulla piastra di montaggio del seggiolino come mostrato nella figura.
- Fissare lo schienale con tre viti e rondelle dentate.

Per regolare l'altezza dello schienale...


- Sollevare lo schienale fino a quando si arresta, quindi spingerlo nella posizione più bassa.
- Sollevare lo schienale fino all'altezza desiderata.

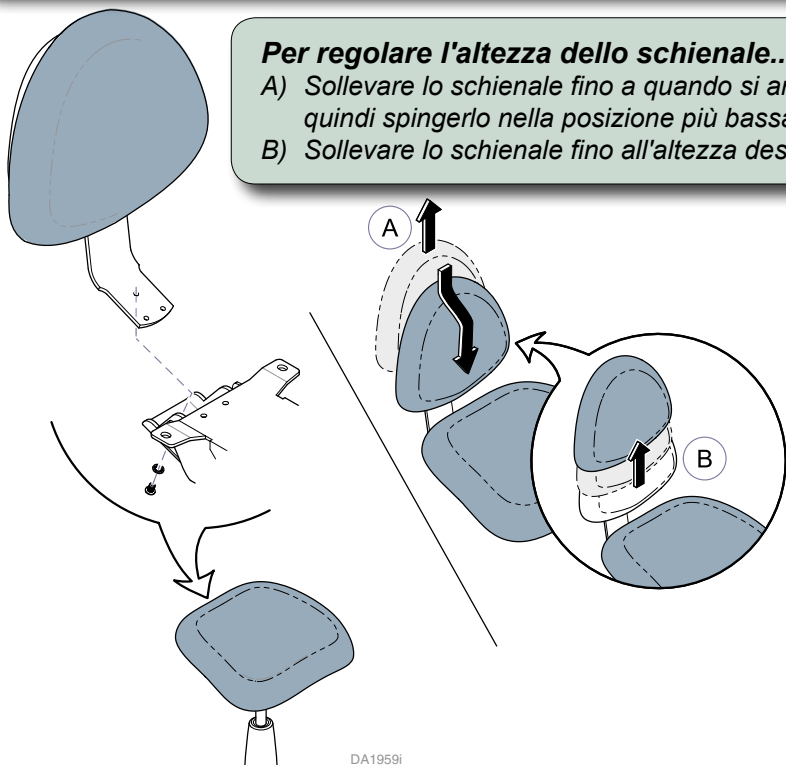


DA1959i

Per montare i braccioli (opzionali)...


- Allineare le scanalature del bracciolo ai fori della piastra di montaggio.
- Fissare il bracciolo con tre viti e rondelle dentate.
- Ripetere l'operazione per l'altro bracciolo.

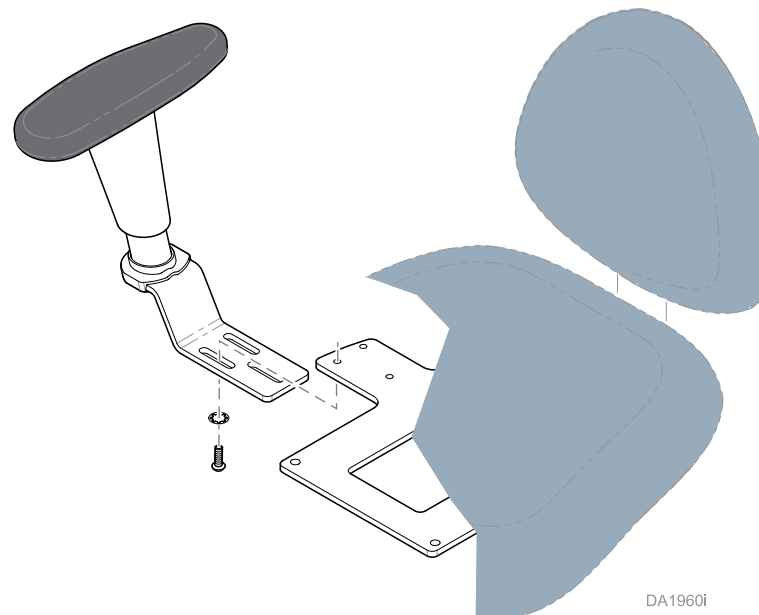

DA1960i

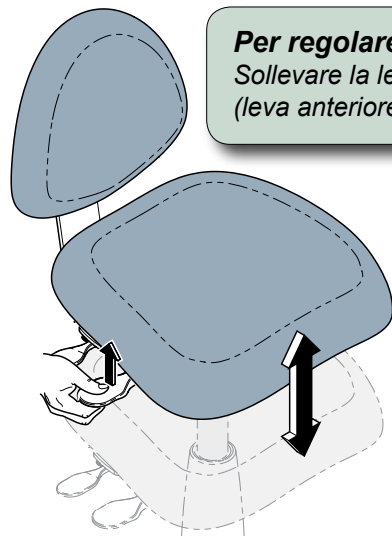

Per regolare l'altezza della seduta...
Sollevare la leva di regolazione dell'altezza
(leva anteriore)

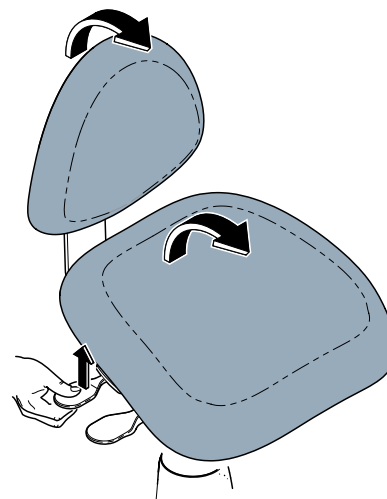


**Per regolare l'angolo di basculaggio
del seggiolino o dello schienale...**

- A) Sollevare la leva di regolazione del
basculaggio (leva posteriore)
- B) Piegare in avanti o all'indietro fino a
ottenere l'angolo desiderato.


Per regolare l'altezza del bracciolo...

- A) Sollevare il bracciolo fino a quando si arresta, quindi
spingerlo nella posizione più bassa.
- B) Sollevare il bracciolo fino all'altezza desiderata.

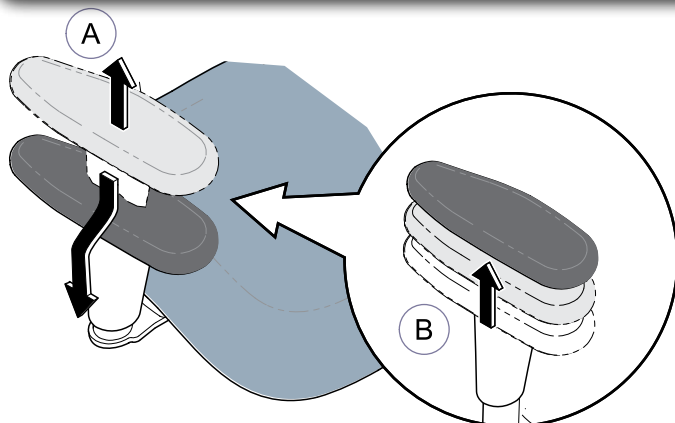

**Per regolare la posizione dell'imbottitura
del bracciolo...**

Spostare l'imbottitura del bracciolo all'indietro o
in avanti fino a ottenere la posizione desiderata.

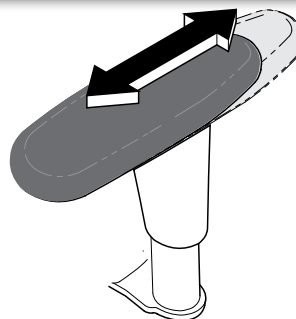

**Per regolare
l'angolo del
bracciolo...**

Girare l'imbottitura
del bracciolo ver-
so l'interno o verso
l'esterno.

DA1956i

Specifiche

Seggiolino per il medico (153811)	
Peso sostenibile	159 kg (350 libbre)
Altezza della seduta: <i>Modelli per statura alta (predefinito)</i>	Min: 53 cm (21 pollici) Max: 74 cm (29 pollici)
<i>Modello medio</i>	Min: 42 cm (16,5 pollici) Max: 56 cm (22 pollici)
<i>Modelli per statura bassa</i>	Min: 39 cm (15,25 pollici) Max: 46 cm (18,25 pollici)
Dimensioni della seduta: <i>Seduta standard</i>	Larghezza: 44,5 cm (17,5 pollici) Profondità: 42 cm (16,5 pollici)
<i>Seduta piccola</i>	Larghezza: 41 cm (16,25 pollici) Profondità: 40,6 cm (16 pollici)
Dimensione della base	61 x 61 cm (24 x 24 pollici)

Pulizia

Non esiste un disinfettante adatto per tutte le strutture e per tutte le procedure odontoiatriche. Di seguito sono elencati alcuni enti che possono fornire assistenza nella scelta dei disinfettanti migliori per il tipo di procedura praticata

Organizzazione per le procedure di sicurezza e asepsi:

<http://www.osap.org>


Associazione odontoiatrica americana:

<http://www.ada.org>

Dipartimento della salute e delle risorse umane

Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie:

<http://www.cdc.gov>

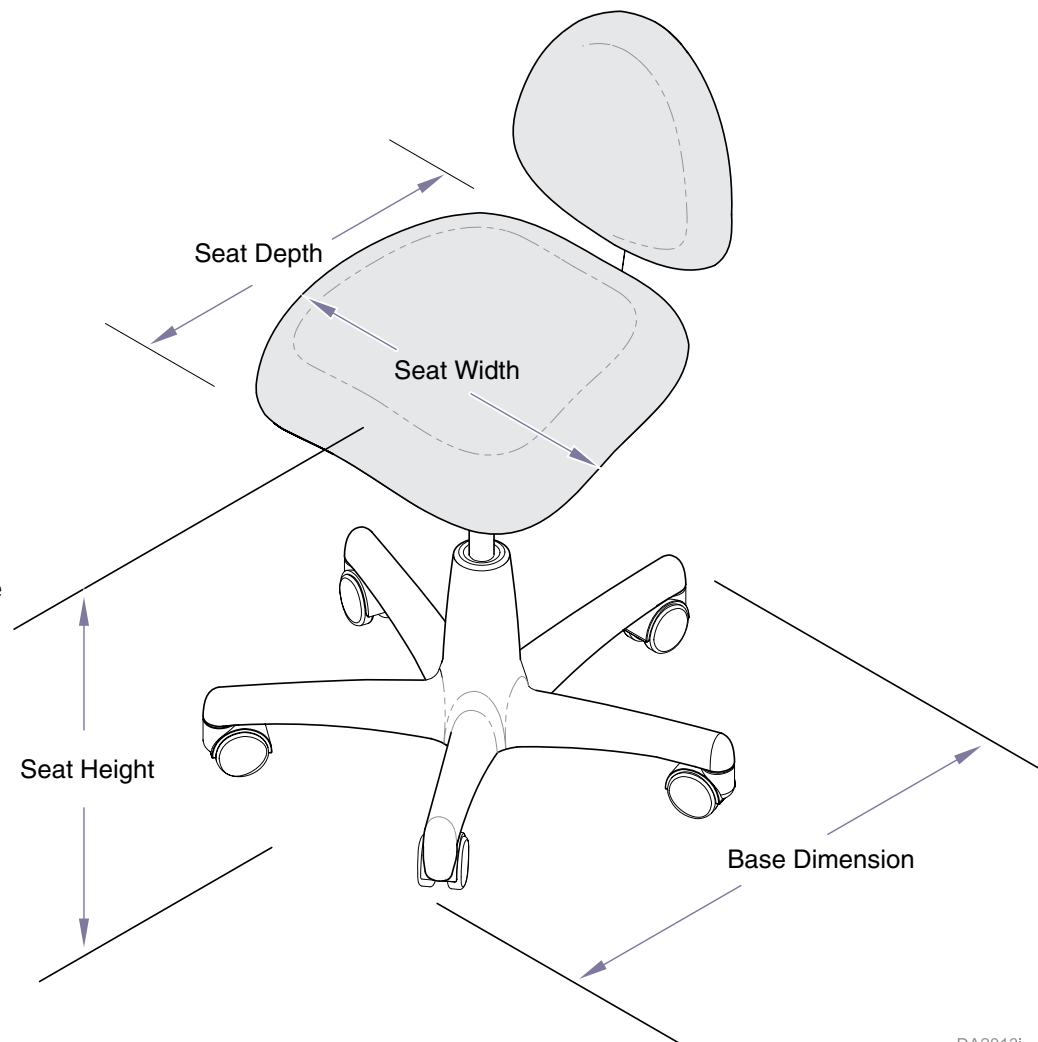

DA2013i

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380-0286
Telefono: 937-526-3662
Fax: 937-526-5542
midmark.com

© Midmark Corporation 2008 Style A

