

Rail de siège (28") [9A567]

Modèles concernés :

630 (-010 à -013)
630 (-020 à -023)
631-001

Langue d'origine : anglais

Remarque

Installez les rails de siège des deux côtés
(un côté dans l'illustration).

Modèles 630

Étape 1 : Préparation de la zone.

- Retirer la garniture supérieure.
- Régler l'angle d'inclinaison le cas échéant.




AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le siège de toute source d'alimentation avant de retirer les caches. Tout manquement à cette recommandation peut entraîner des blessures.

Étape 2 : Retirer les caches.

- Retirer la vis située sous le cache latéral.
- Retirer le cache latéral.
- Retirer les deux caches de prise.

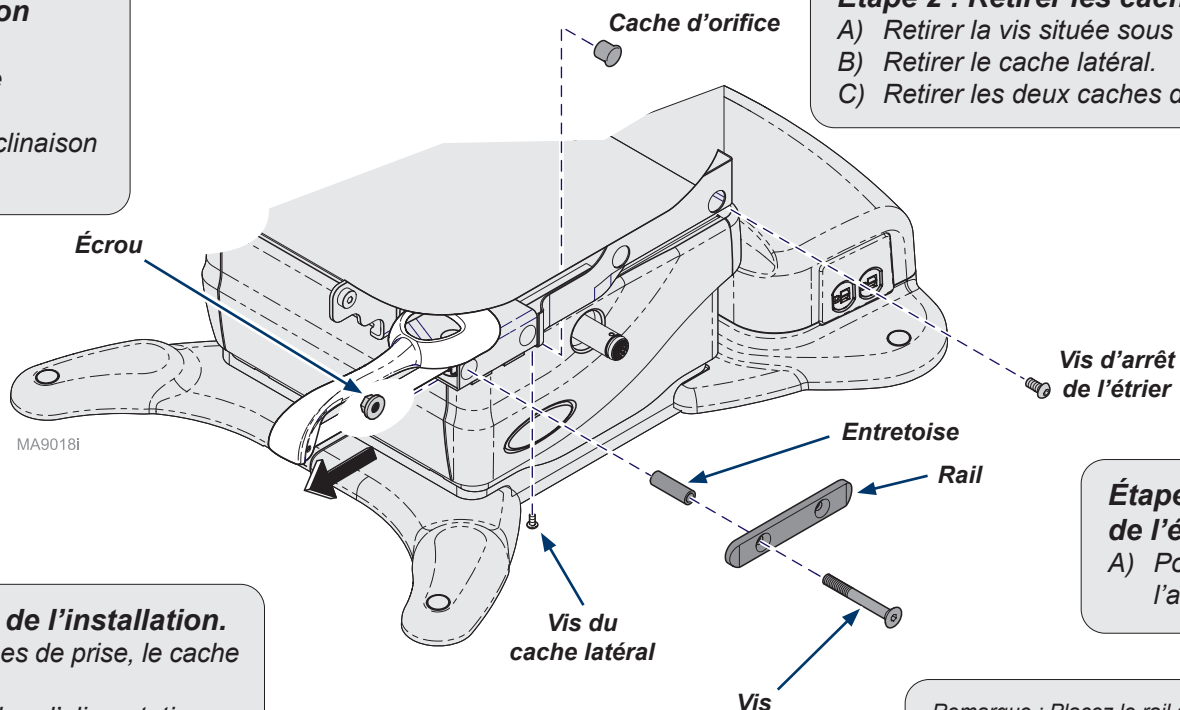

Étape 3 : Positionnement de l'étrier.

- Positionner l'étrier pour dégager l'accès.

Étape 6 : Finition de l'installation.

- Installer les caches de prise, le cache latéral et la vis.
- Brancher le cordon d'alimentation.
- Régler l'inclinaison dans sa position initiale.
- Installer la garniture.
- Vérifier le bon fonctionnement.

Étape 5 : Installation de l'étrier.

- Installer l'étrier.
- Installer la vis d'arrêt de l'étrier.

Remarque : Placez le rail avec le grand trou sur l'extérieur de manière à ce que les vis viennent affleurer le rail.

Étape 4 : Installation du rail de siège.

- Positionner le rail de siège et les entretoises.
- Bloquer avec deux vis/écrous.


631-001

Remarque

Installez les rails de siège des deux côtés (un côté dans l'illustration).

Étape 1 : Préparation de la zone.

- A) Retirer la garniture supérieure.
- B) Régler l'angle d'inclinaison le cas échéant.

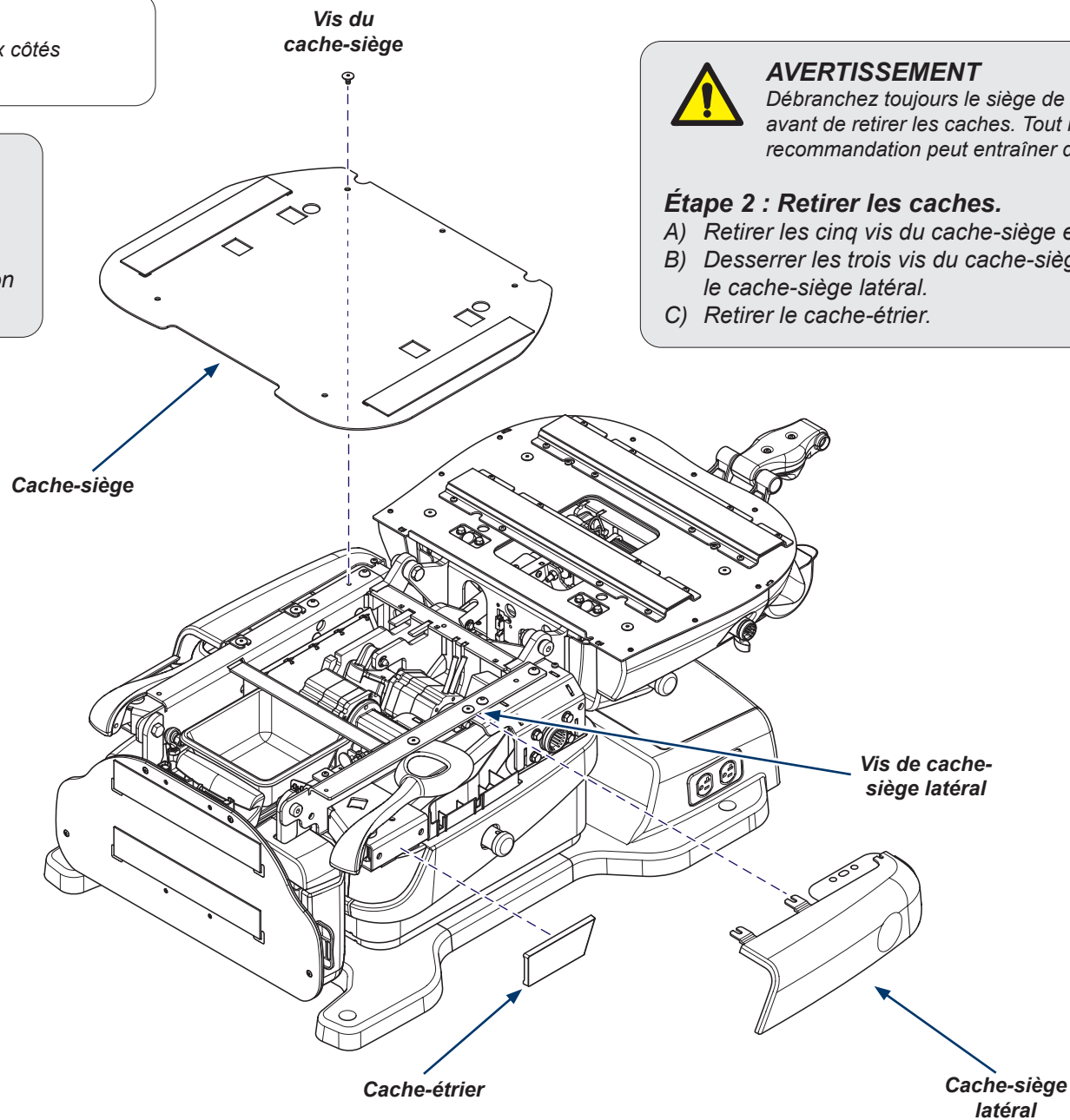

AVERTISSEMENT


Débranchez toujours le siège de toute source d'alimentation avant de retirer les caches. Tout manquement à cette recommandation peut entraîner des blessures.

Étape 2 : Retirer les caches.

- A) Retirer les cinq vis du cache-siège et le cache-siège.
- B) Desserrer les trois vis du cache-siège latéral et retirer le cache-siège latéral.
- C) Retirer le cache-étrier.

Étape 3 : Positionnement de l'étrier.

- A) Positionner l'étrier pour dégager l'accès.

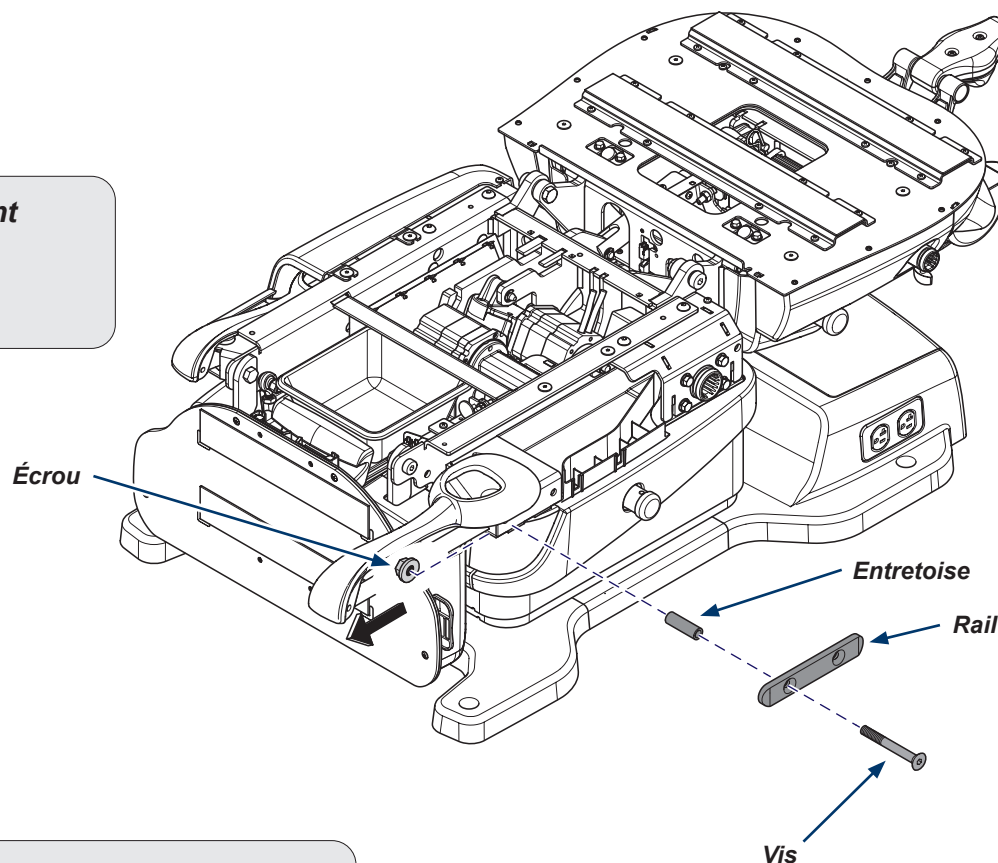

Remarque : Placez le rail avec le grand trou sur l'extérieur de manière à ce que les vis viennent affleurer le rail.

Étape 4 : Installation du rail de siège.

- A) Positionner le rail de siège et les entretoises.
B) Bloquer avec deux vis/écrous.

Étape 5 : Finition de l'installation.

- A) Installer les caches.
B) Brancher le cordon d'alimentation.
C) Régler l'inclinaison dans sa position initiale.
D) Installer la garniture.
E) Vérifier le bon fonctionnement.