

Halterungssystem mit Schiene [9A564 / 9A626]

für die Modelle:

630 (-010 bis -013)
630 (-020 bis -023)
631-001

Ausgangssprache: Englisch

Zweckbestimmung:

Befestigung der Untersuchungs Lampe 253 am Tisch Midmark® 630 und 631-001.

Beschränkungen:

Benötigt Zubehör Schienen
9A557001 (71cm Polster)
9A557002 (81cm Polster)

Einbau der Halterung mit Schiene:

- A) Das Schweißteil der Halterung mit Schiene wie abgebildet auf die Schiene schieben.
- B) Verriegelungsknopf anbringen und festziehen, um das Schweißteil zu befestigen.

Verriegelungsknopf

Einbau der Lampe und der Kabelrückhaltung:

- A) Lampe entsprechend den Löchern in der Halterungsplatte ausrichten.
- B) Lampe befestigen, indem zwei Schrauben in den oberen Löchern angebracht werden.
- C) Kabelrückhaltung positionieren und anschließend zwei Schrauben in den unteren Löchern anbringen.


Untersuchungslampe

Kabelrückhaltung


Vor dem Einsatz der Lampe:

Schutzfolie von der Linse entfernen.

Schutzfolie

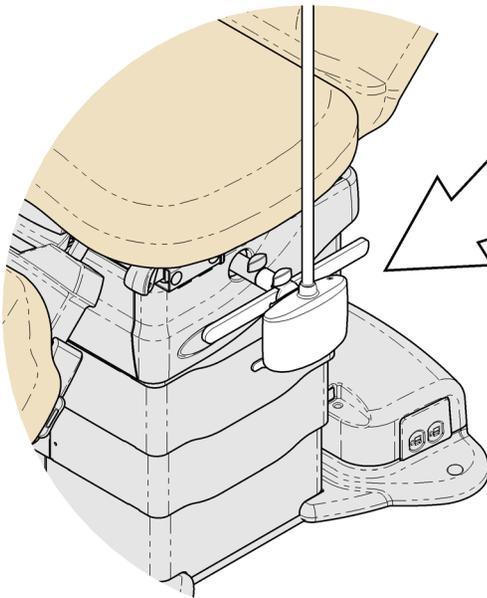

MA9069i

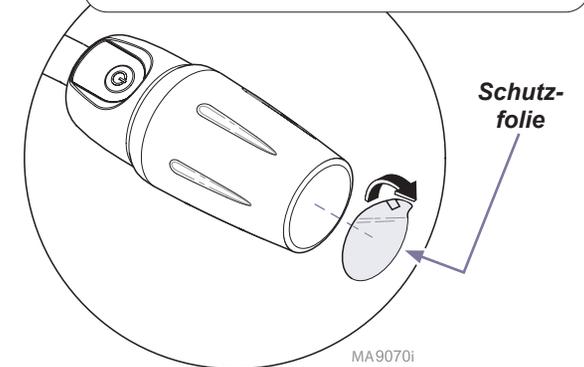

MA9070i