

Accoudoir articulé [9A550]

Modèles concernés :

630 (-010 à -013)
630 (-020 à -023)
631-001

Langue d'origine : anglais

Utilisation :

Pour soutenir les bras du patient pendant les procédures.

Restrictions :

Ne pas dépasser le poids nominal maximum pour les accoudoirs. Poids nominal maximum (chaque accoudoir) : 102 kg

Remarque : L'arbre cannelé est muni de clavettes.

Faire tourner l'accoudoir jusqu'à ce qu'il coulisse dans la douille.


Pour installer les accoudoirs...

- Retirez le capuchon de la douille de l'accoudoir.
- Placez l'accoudoir comme indiqué sur l'illustration.
- Introduisez l'accoudoir dans la douille jusqu'à ce qu'il se bloque en place.



Attention

Assurez-vous que les bras et les mains des patients sont correctement positionnés sur les accoudoirs durant l'inclinaison du dossier. Tout manquement à cette recommandation peut entraîner des blessures.

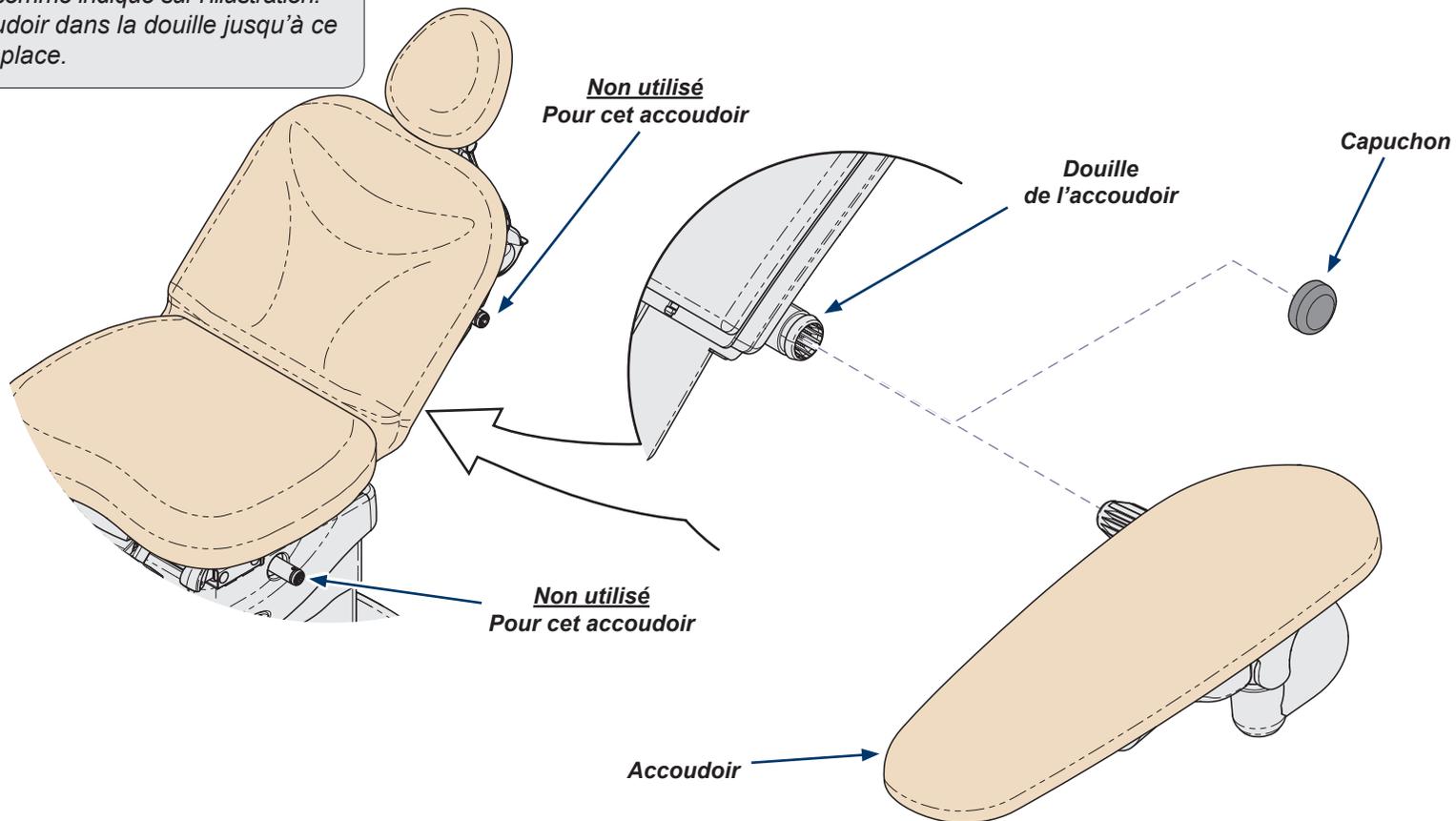

MA90271