

APPUI-TÊTE POUR PROCÉDURES SPÉCIALES 9A199001 APPUI-TÊTE ROND 9A198001

PIÈCES DU COLIS

Réf.	Description	Qté
9A198001	Appui-tête rond.....	1
ou		
9A199001	Appui-tête pour procédures spéciales	1
003-0940-02	Notice de montage	1

OUTILS REQUIS

Aucun


INTRODUCTION

Donne accès à la tête du patient pendant un examen ou une procédure.

REMARQUE

Les appuis-tête réf.9A198001 et 9A199001 ne s'adaptent pas avec le repose-poignet réf. 9A221001.

INSTALLATION

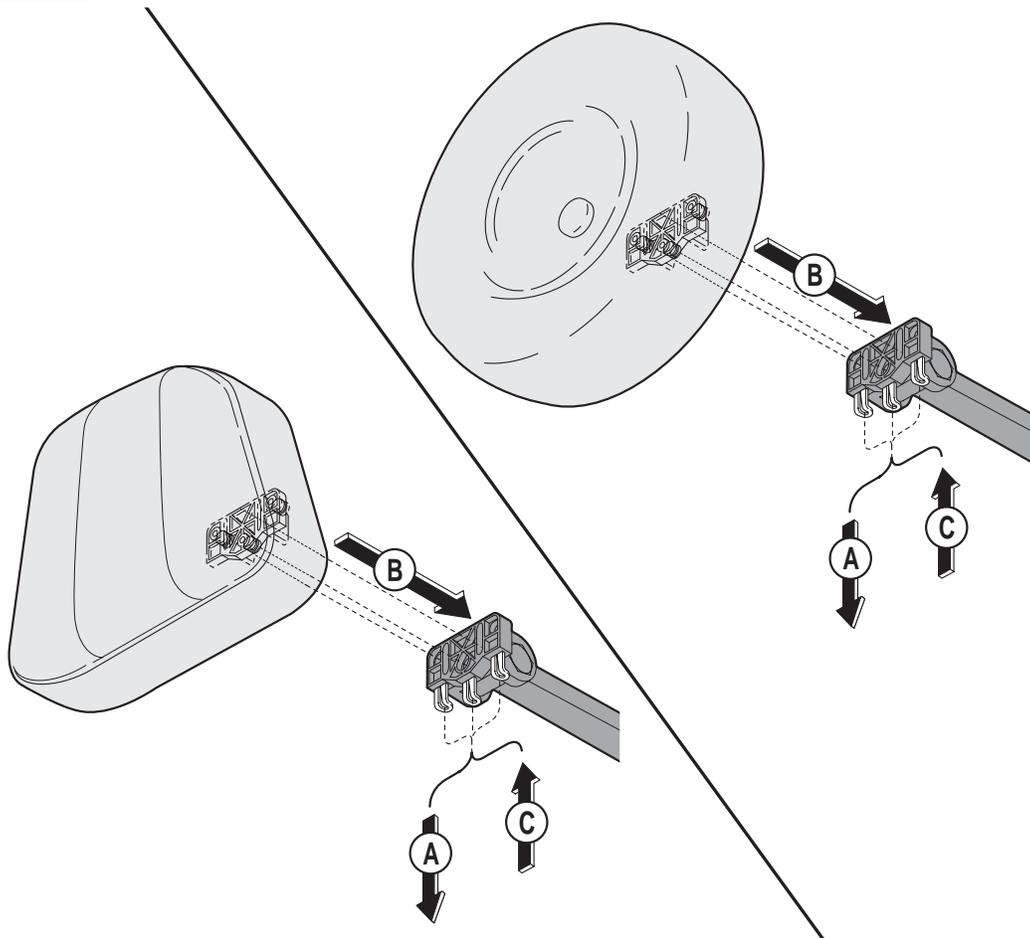

MA442000

- A. Tirer les glissières vers le bas et déposer l'appui-tête déjà en place.
- B. Installer le nouvel appui-tête sur le pivot.
- C. Enfoncer les glissières vers le haut pour verrouiller l'appui-tête sur le pivot.