


Install Assist Tool


For use with models
224, 225, 626, 627

Step 1: Slide spline adapters onto lift device Install Assist Tool legs.

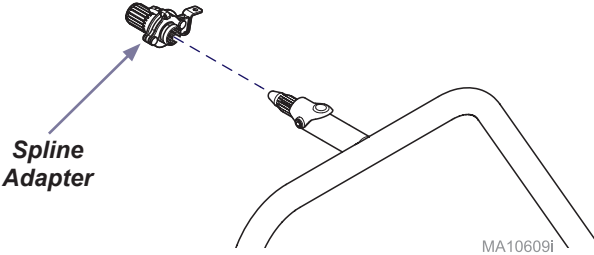


Step 2:

- A) Press Chair Up on hand control to raise chair height.
- B) Insert Install Assist Tool legs into spline receptacles.
- C) Press Chair Down on hand control to lift the chair base to desired height.

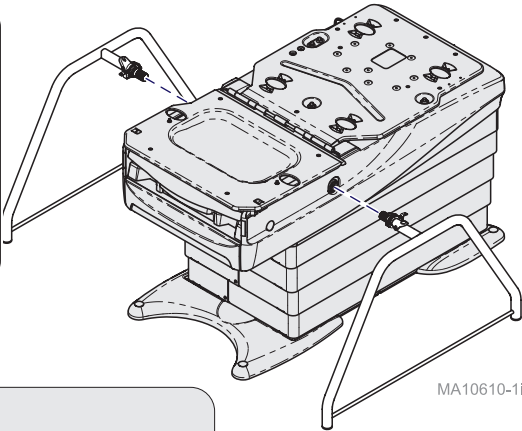

To remove Install Assist Tool legs...

- A) Press Chair Up on hand control to lower chair base to the floor.
- B) Lift up on spline adapter release lever.
- C) Slide Install Assist Tool legs from spline receptacles.

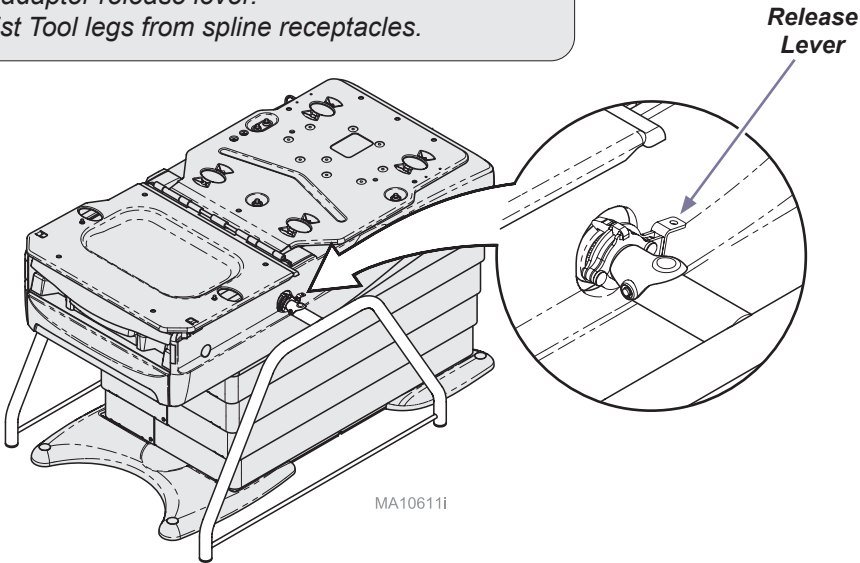


* For other languages please visit <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.
** See User Guide for Caution and Warning Statements.

Install Assist Tool


For use with models
224, 225, 626, 627

Step 1: Slide spline adapters onto lift device Install Assist Tool legs.

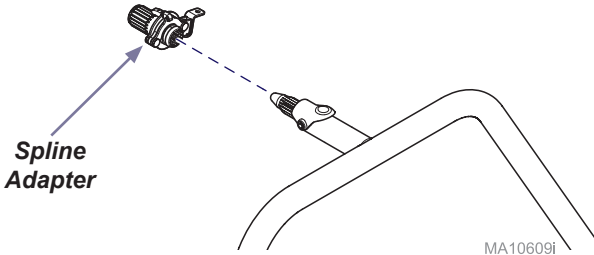


Step 2:

- A) Press Chair Up on hand control to raise chair height.
- B) Insert Install Assist Tool legs into spline receptacles.
- C) Press Chair Down on hand control to lift the chair base to desired height.

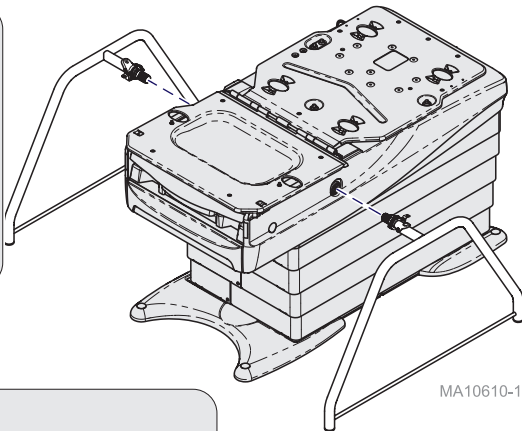

To remove Install Assist Tool legs...

- A) Press Chair Up on hand control to lower chair base to the floor.
- B) Lift up on spline adapter release lever.
- C) Slide Install Assist Tool legs from spline receptacles.

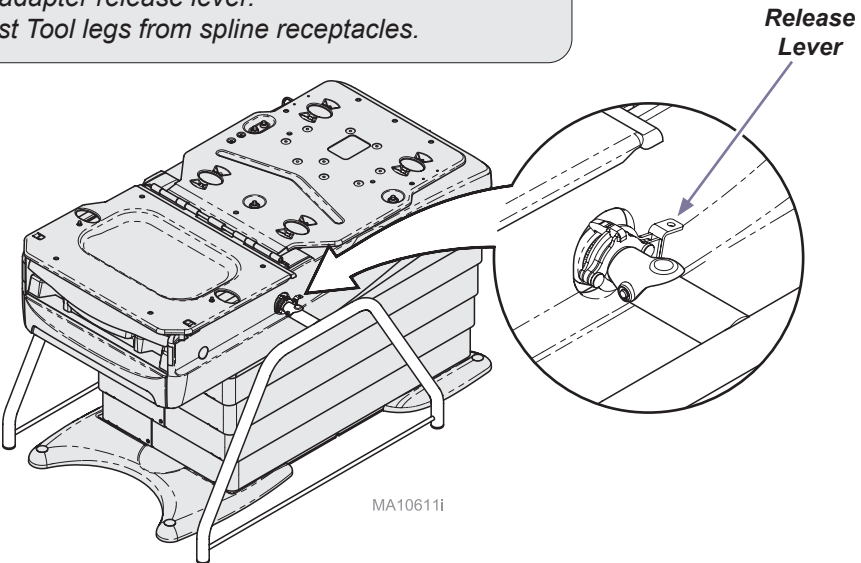

* For other languages please visit <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.
** See User Guide for Caution and Warning Statements.

Herramienta de ayuda de instalación


Utilizar con los modelos
224, 225, 626, 627

Paso 1: Adaptadores de la chaveta de deslizamiento al dispositivo de elevación de las patas de la herramienta de ayuda de instalación.

- Paso 2:**
- A) Pulse Chair Up (silla arriba) en el control manual para aumentar la altura de la silla.
 - B) Introduzca las patas de la herramienta de ayuda de instalación en los receptores de la chaveta.
 - C) Pulse Chair Down (silla abajo) en el control manual para colocar la base de la silla a la altura deseada.

Para retirar las patas de la herramienta de ayuda de instalación...

- A) Pulse Chair Up (silla arriba) en el control manual para bajar la base de la silla hasta el suelo.
- B) Levante la palanca de apertura del adaptador de chaveta.
- C) Deslice las patas de la herramienta de ayuda de instalación de los receptores de la chaveta.

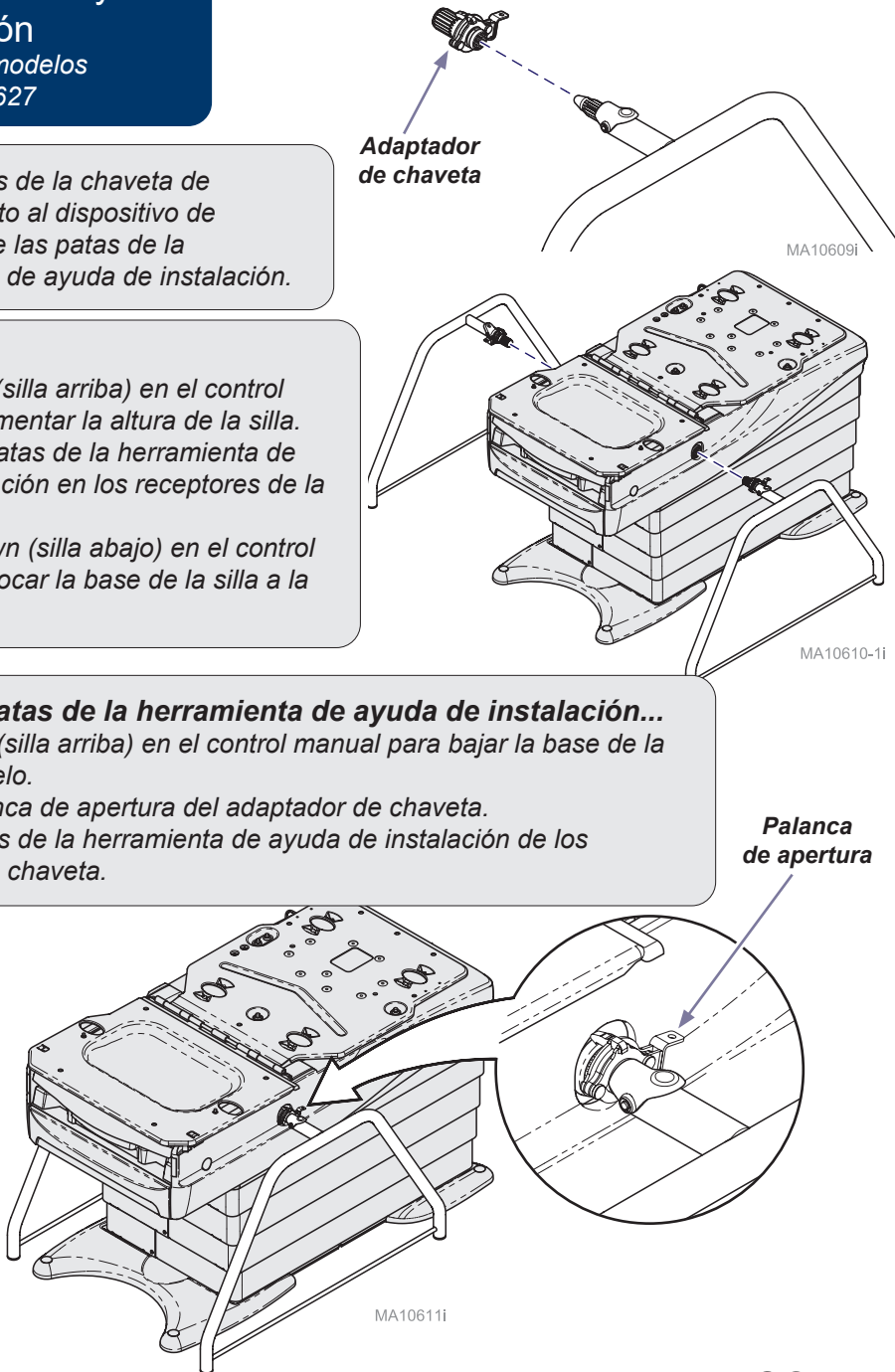

Herramienta de ayuda de instalación


Utilizar con los modelos
224, 225, 626, 627

Paso 1: Adaptadores de la chaveta de deslizamiento al dispositivo de elevación de las patas de la herramienta de ayuda de instalación.

- Paso 2:**
- A) Pulse Chair Up (silla arriba) en el control manual para aumentar la altura de la silla.
 - B) Introduzca las patas de la herramienta de ayuda de instalación en los receptores de la chaveta.
 - C) Pulse Chair Down (silla abajo) en el control manual para colocar la base de la silla a la altura deseada.

Para retirar las patas de la herramienta de ayuda de instalación...

- A) Pulse Chair Up (silla arriba) en el control manual para bajar la base de la silla hasta el suelo.
- B) Levante la palanca de apertura del adaptador de chaveta.
- C) Deslice las patas de la herramienta de ayuda de instalación de los receptores de la chaveta.

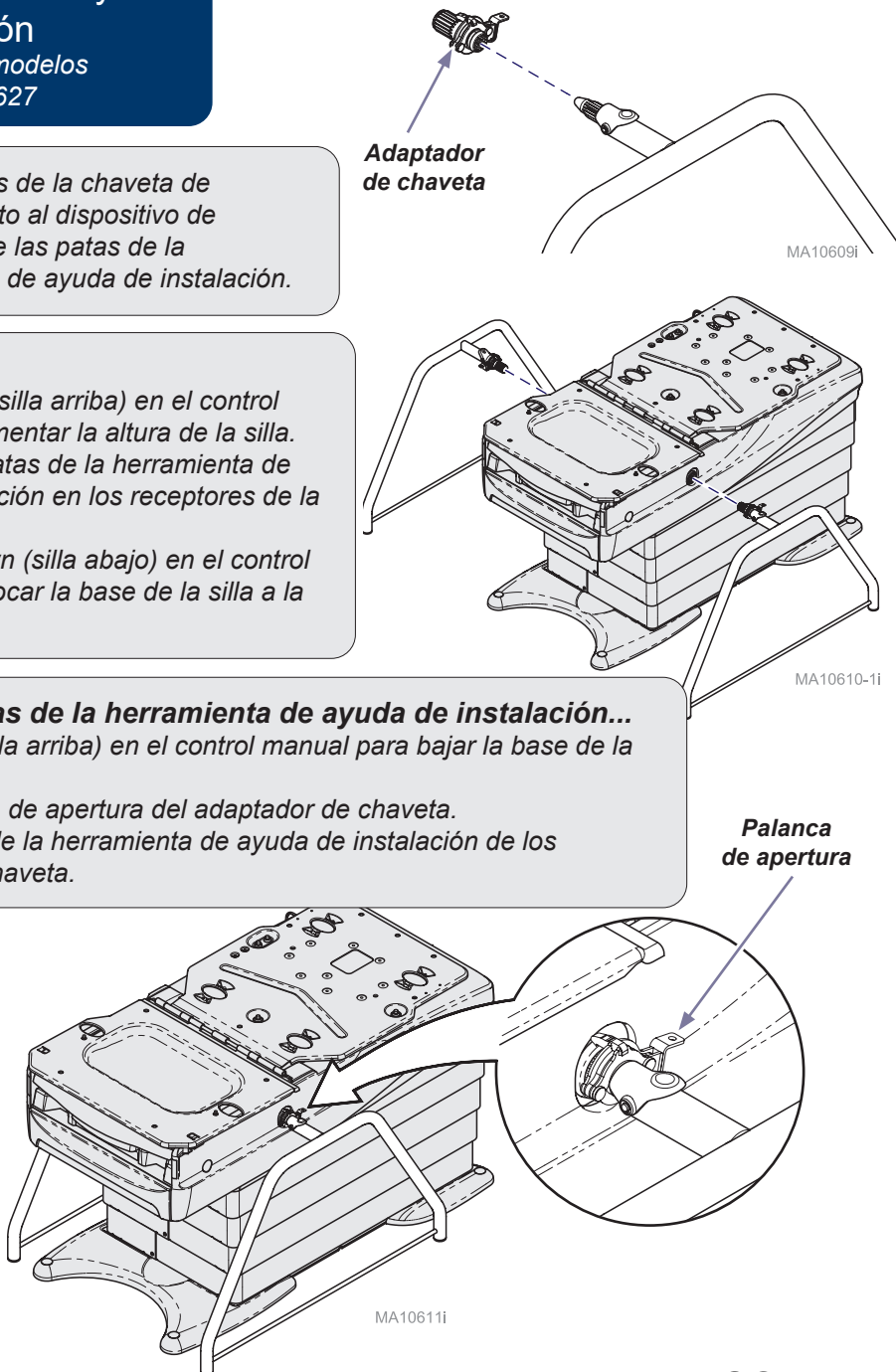

* Para consultar otros idiomas, visite <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.
** Ver la guía de usuario para las declaraciones de precaución y advertencia.


* Para consultar otros idiomas, visite <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.
** Ver la guía de usuario para las declaraciones de precaución y advertencia.

Outil d'assistance à l'installation

Compatible avec les modèles
224, 225, 626 et 627

Étape 1 : Glissez les adaptateurs à cannelures dans les supports de l'outil d'assistance à l'installation de l'appareil de levage.


Adaptateur à cannelures

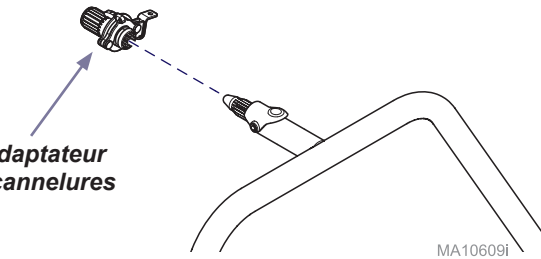

MA10609i

Étape 2 :

- A) Appuyez sur le bouton Chair Up (Haut) de la commande pour lever le fauteuil.
- B) Insérez les supports de l'outil d'assistance à l'installation dans les cannelures.
- C) Appuyez sur le bouton Chair Down (Bas) de la commande pour régler la base du fauteuil à la hauteur souhaitée.

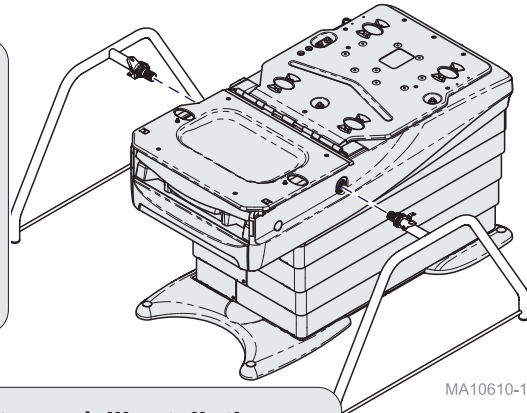


MA10610-1i

Pour déposer les supports de l'outil d'assistance à l'installation...

- A) Appuyez sur le bouton Chair Up (Haut) de la commande pour abaisser et poser la base du fauteuil sur le sol.
- B) Soulevez le levier de déverrouillage des adaptateurs à cannelures.
- C) Retirez des cannelures les supports de l'outil d'assistance à l'installation.

Levier de déverrouillage

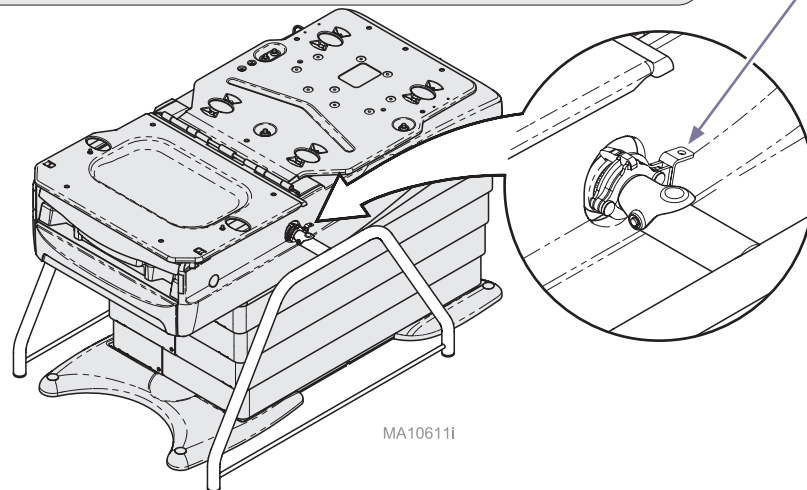

MA10611i

* Pour davantage de langues, rendez-vous sur <http://www.midmark.com/technical-library/medical>
** Se reporter au guide de l'utilisateur pour les mises en garde et les avertissements.

Français - 1

midmark®


003-10148-99

Outil d'assistance à l'installation

Compatible avec les modèles
224, 225, 626 et 627

Étape 1 : Glissez les adaptateurs à cannelures dans les supports de l'outil d'assistance à l'installation de l'appareil de levage.


Adaptateur à cannelures

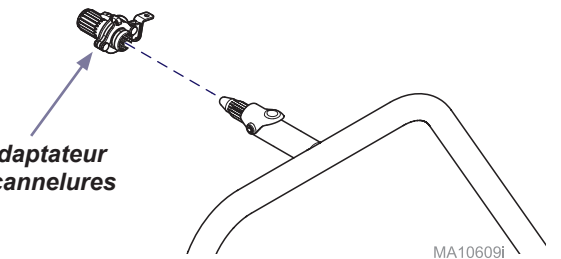

MA10609i

Étape 2 :

- A) Appuyez sur le bouton Chair Up (Haut) de la commande pour lever le fauteuil.
- B) Insérez les supports de l'outil d'assistance à l'installation dans les cannelures.
- C) Appuyez sur le bouton Chair Down (Bas) de la commande pour régler la base du fauteuil à la hauteur souhaitée.

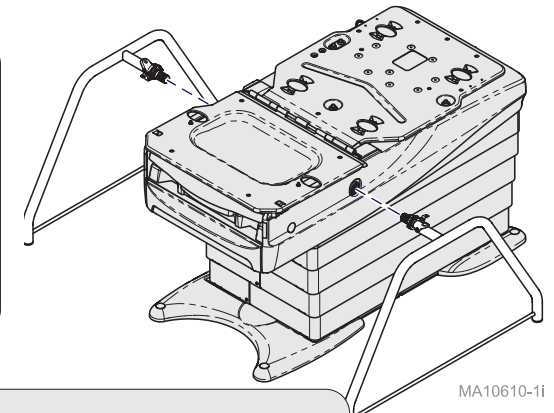


MA10610-1i

Pour déposer les supports de l'outil d'assistance à l'installation...

- A) Appuyez sur le bouton Chair Up (Haut) de la commande pour abaisser et poser la base du fauteuil sur le sol.
- B) Soulevez le levier de déverrouillage des adaptateurs à cannelures.
- C) Retirez des cannelures les supports de l'outil d'assistance à l'installation.

Levier de déverrouillage

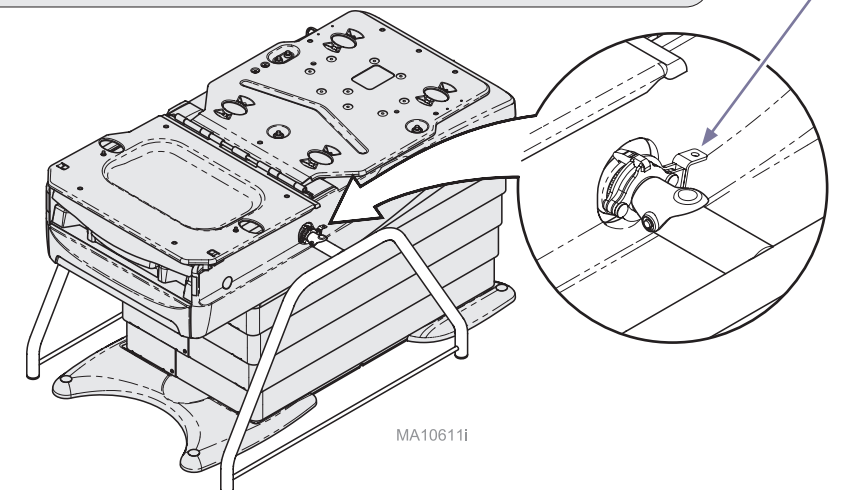

MA10611i

* Pour davantage de langues, rendez-vous sur <http://www.midmark.com/technical-library/medical>
** Se reporter au guide de l'utilisateur pour les mises en garde et les avertissements.

Français - 1

midmark®

003-10148-99