

Información sobre el cumplimiento

Declaración de conformidad con FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la parte 15 de las normas FCC. Tales límites se han determinado para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y utiliza de conformidad con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales con las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial provoque interferencias.

En tal caso, el usuario deberá correr con los gastos derivados de subsanar la interferencia. Cualquier modificación de este producto puede violar las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones e incurrir en el uso ilegal del producto.

Información de garantía



Registro de garantía



Información general

Uso previsto

La finalidad de este producto es controlar la posición del paciente y ofrecer un mejor acceso al paciente mediante la eliminación del cable del(de los) mando(s) a distancia.

Contactar con el servicio técnico

Póngase en contacto con su distribuidor Midmark si necesita asistencia técnica.

Póngase en contacto con Midmark directamente si necesita asistencia técnica:

EE. UU. 844.856.1230 / Canadá 937.526.8585
de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (ET)

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380 EE. UU.
1.800.643.6275
+1.937.526.3662
midmark.com



Guía del usuario

626 Controles inalámbricos

9A677001
9A677002



Esta guía describe el funcionamiento básico del mando/pedal de control inalámbrico y la estación de base asociada. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark si necesita asistencia técnica.

Distribuidor (nombre/teléfono):

Fecha de compra:

003-10152-03 Rev AA4 (29/09/23)

Información sobre el cumplimiento - continuación...

Declaración de conformidad con IC

Interferencia

«Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS exentas de licencia de la Industria de Canadá. El funcionamiento depende de las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias y (2) este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado del dispositivo».

"Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement".

Antenas

«Con arreglo a las normas de la Industria de Canadá, este radiotransmisor solo puede funcionar utilizando una antena de un tipo y una ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por la Industria de Canadá. Para reducir las posibles interferencias de la radio con otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de forma que la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) no sea mayor de la necesaria para una correcta comunicación».

"Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante".

Procedimiento de asociación

Los mandos de control inalámbricos solo funcionarán con el sillón al que se hayan «asociado». Esto evita los movimientos no deseados en lugares con más de un sillón. Cada asociación de los mandos de control inalámbricos viene preajustada de fábrica. Este procedimiento solo es necesario en caso de que se estén utilizando varios mandos de control para más de un sillón o cuando se utilice un mando de control con un sillón que no sea el que tenía asociado previamente.



Advertencia sobre el equipo

Al sillón solo se puede asociar como máximo un mando de control y un pedal de control al mismo tiempo.



Advertencia sobre el equipo

Los mandos de control deben estar en un radio de cuatro metros y medio (quince pies) en torno al sillón para poder manejar el mismo.

Procedimiento de asociación...

Desconecte la alimentación durante al menos tres segundos. Vuelva a conectar la alimentación y esperar hasta que el sillón pite tres veces. Pulse y mantenga pulsados los botones Detener y Bajar base hasta que el control pite tres veces.

Nota: dos pitidos indican que la asociación no se ha realizado correctamente.




Especificaciones

Rango de funcionamiento radio de 4,6 m (15 pies)

Pilas:

Mando de control AA (cant. 2)

Pedal de control AA (cant. 2)

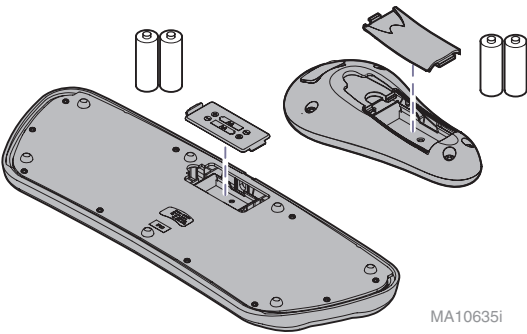

Resolución de problemas

Al pulsar cualquier botón de control, el mando de control emite un único pitido. (Todas las opciones funcionan)

Causa: Batería baja

Solución: Cambie las pilas

No ocurre nada al pulsar cualquier botón de control. (Ningún pitido, ningún movimiento, etc.)

Causa: 1. Las pilas están completamente agotadas
2. El mando a distancia inalámbrico ha perdido la «asociación» con el sillón

Solución: 1. Cambie las pilas
2. Ejecute el **Procedimiento de asociación***

Los mandos de control inalámbricos solo funcionarán con el sillón al que se hayan «asociado». Esto evita los movimientos no deseados en lugares con más de un sillón.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Midmark si necesita mayor asistencia técnica.